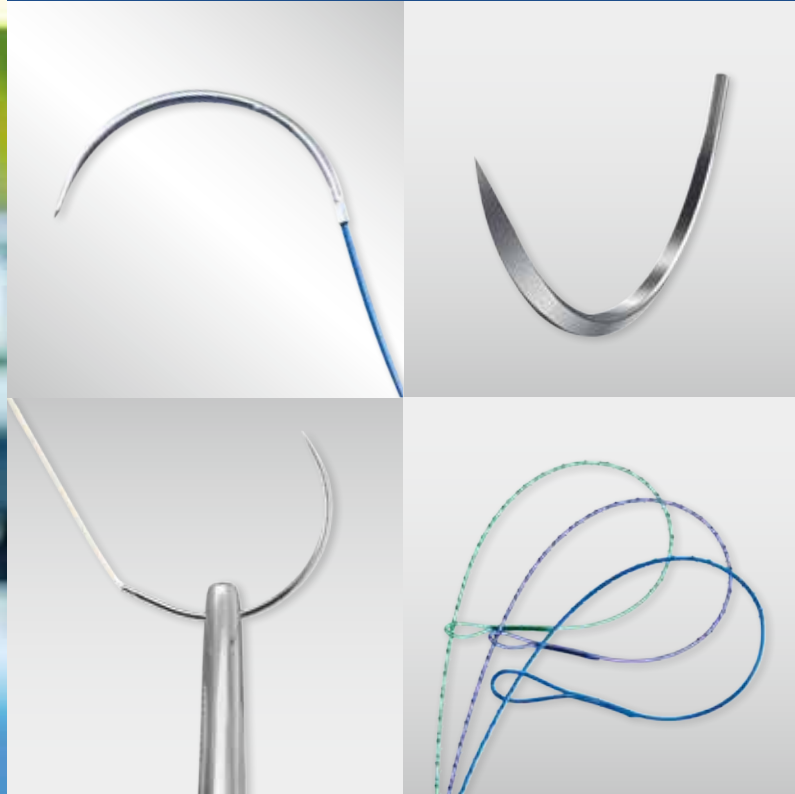




РАСХОДНЫЕ  
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ  
**ОПЕРАЦИОННОЙ**

ПОЛНЫЙ СПЕКТР  
РЕШЕНИЙ, КОТОРОМУ  
**ВЫ МОЖЕТЕ ДОВЕРЯТЬ**

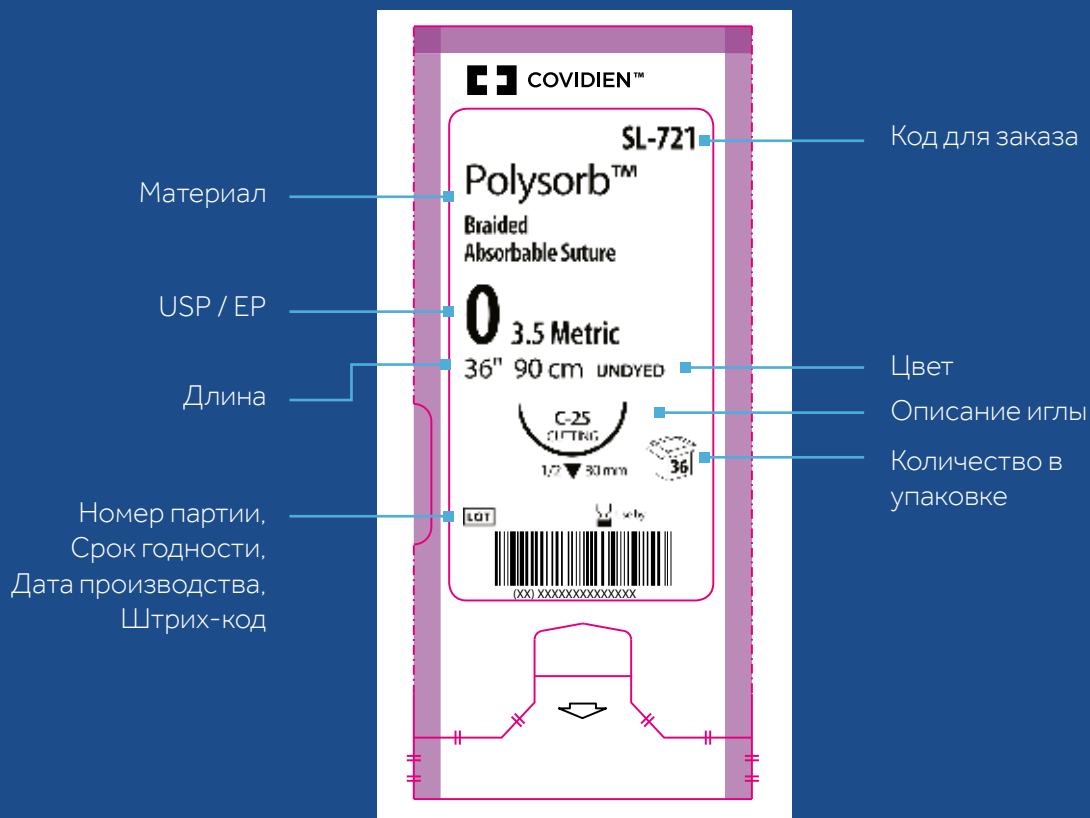


ШОВНЫЕ  
**МАТЕРИАЛЫ**

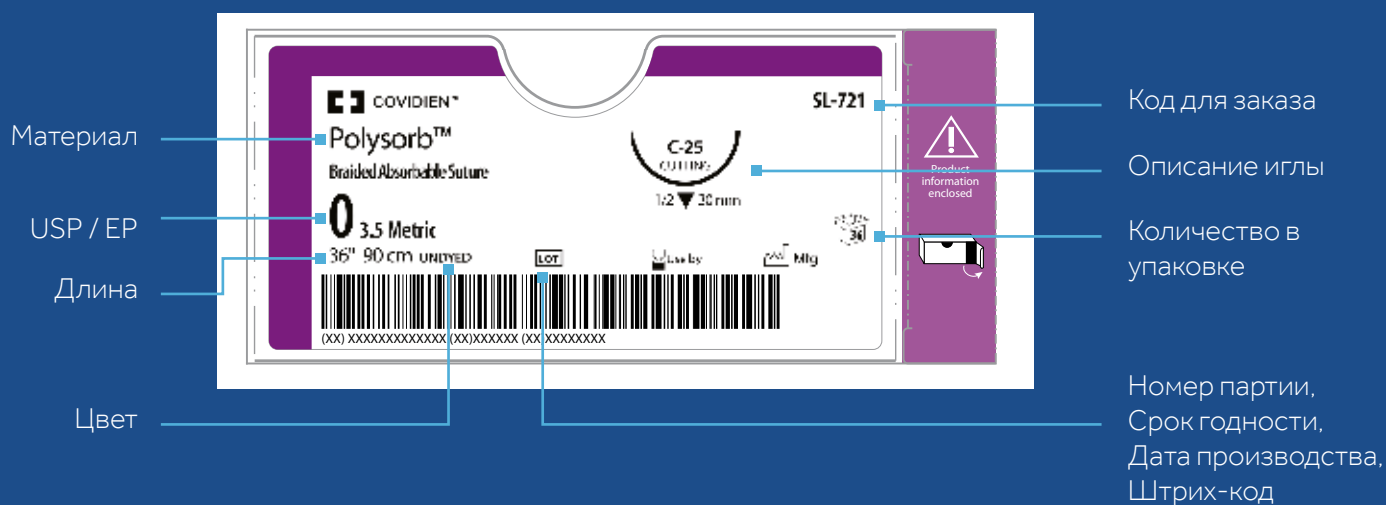
Каталог продукции 2018/2019

**Medtronic**  
Further. Together


















# МАРКИРОВКА И ЦВЕТ УПАКОВКИ



Номер партии,  
Срок годности,  
Дата производства,  
Штрих-код



# СОДЕРЖАНИЕ

	Velosorb™ Fast .....	4
	Polysorb™ .....	12
	Caprosyn™ .....	28
	Biosyn™ .....	34
	Maxon™ .....	42
	Surgipro™ и Surgipro™ II.....	52
	Ti-Cron™ и Surgidac™ .....	64
	Vascufil™ .....	78
	Flexon™ .....	82
	Steel™ .....	86
	Monosof™ /Dermalon™ .....	90
	Novafil™ .....	98
	Surgilon™ .....	104
	Sofsilk™ .....	110
	V-Loc™ 90 .....	116
	V-Loc™ 180.....	120
	V-Loc™ PBT .....	124

# VELOSORB™ FAST

Плетёный синтетический рассасывающийся покрытый шовный материал

Поддерживает, когда это вам необходимо.

Рассасывается, когда больше вам не нужен.



Шовный материал Velosorb™ Fast предназначен для соединения мягких тканей: кожи, слизистых оболочек и конъюнктивы, когда срок поддержки достаточен в течение 7-10 дней.

<b>Описание материала</b>	Рассасывающийся плетёный шовный материал Velosorb™ Fast изготовлен из композиции рассасывающихся полиэфиров: гликолида и лактида (полученных из гликолевой и молочной кислот). Шовный материал Velosorb™ Fast покрыт смесью сополимеров гликолида, лактида и стеарата кальция.
<b>Показания</b>	Шовный материал Velosorb™ Fast предназначен для соединения мягких тканей: кожи, слизистых оболочек и конъюнктивы, когда срок поддержки достаточен в течение 7-10 дней. Он не может быть использован для лигирования сердечно-сосудистой и нервной хирургической ткани.
<b>Применение</b>	Рассасывающийся шовный материал Velosorb™ Fast вызывает минимальную воспалительную реакцию в тканях, которая обусловлена поэтапной инкапсуляцией материала соединительной и фиброзной тканью. Прогрессивная потеря прочности и окончательное рассасывание происходит путем гидролиза, когда сополимер гликолида и лактида распадается на гликолевую и молочные кислоты, которые метаболизируются в организме.
<b>Срок поддержки раны</b>	Исследования показывают, что через 5 дней после имплантации остаточная прочность составляет не менее 45% от изначальной. Полная потеря прочности наступает на 14 день.
<b>Стерилизация</b>	Гамма излучение.
<b>Рассасывание</b>	Рассасывание начинается как потеря прочности без потери массы. Полное рассасывание шовного материала Velosorb™ Fast завершается между 40 и 50 днем после имплантации.
<b>Упаковка</b>	Шовный материал Velosorb™ Fast выпускается размерами от от 1 USP (4 EP) до 6-0 USP (0.7 EP), в неокрашенном виде с перманентно соединенными иглами, а также в лигатурах.

Перед применением, пожалуйста, ознакомьтесь с Инструкцией из каждой индивидуальной упаковки. Внимательно изучите все показания, противопоказания, меры предосторожности и способы применения.

Быстрорассасывающийся шовный материал предназначен для соединения мягких тканей: кожи и слизистых оболочек, когда срок поддержки достаточен в течение 7-10 дней.

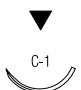
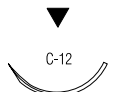
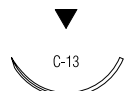
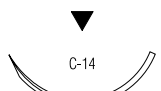
## ЛИГАТУРЫ / PRE-CUT

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
	<b>4-0</b>	1.5	6x45	Неокрашенный	36		CV-8977
	<b>3-0</b>	2	6x45	Неокрашенный	36		CV-8978
	<b>3-0</b>	2	3x45	Неокрашенный	36		CV-8644
	<b>2-0</b>	3	6x45	Неокрашенный	36		CV-8979
	<b>0</b>	3.5	6x45	Неокрашенный	36		CV-8980

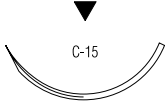
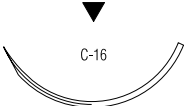
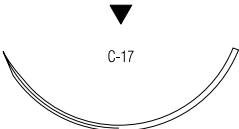
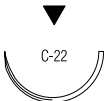
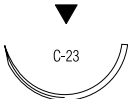


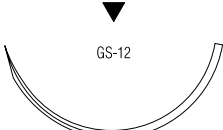
## ОТРЕЗКИ СТАНДАРТНОЙ ДЛИНЫ / STANDART LENGTH

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
	<b>2-0</b>	3	150	Неокрашенный	12		CV-9007G







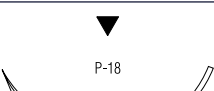
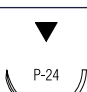
## ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / REVERSE CUTTING

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
<b>3/8 круга 12 мм</b> 	<b>5-0</b>	1	75	Неокрашенный	36		SV-2289
<b>3/8 круга 16 мм</b> 	<b>5-0</b>	1	75	Неокрашенный	36		SV-2296
	<b>4-0</b>	1.5	75	Неокрашенный	36		SV-2294
<b>3/8 круга 19 мм</b> 	<b>4-0</b>	1.5	75	Неокрашенный	36		SV-2297
	<b>3-0</b>	2	45	Неокрашенный	36		SV-2930
	<b>3-0</b>	2	75	Неокрашенный	36		SV-2298
	<b>2-0</b>	3	75	Неокрашенный	36		SV-2299
<b>3/8 круга 24 мм</b> 	<b>3-0</b>	2	45	Неокрашенный	36		SV-4431
	<b>3-0</b>	2	75	Неокрашенный	36		SV-2252
	<b>2-0</b>	3	75	Неокрашенный	36		SV-2253

**ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / REVERSE CUTTING**


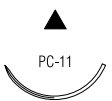
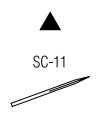
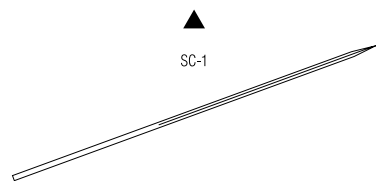
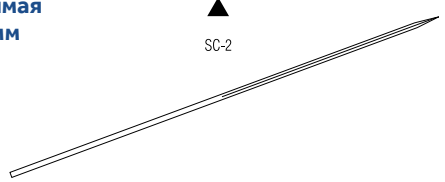
Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
<b>3/8 круга 26 мм</b> 	<b>3-0</b>	2	75	Неокрашенный	12	SV-9940G
	<b>2-0</b>	3	75	Неокрашенный	12	SV-9941G
<b>3/8 круга 30 мм</b> 	<b>2-0</b>	3	90	Неокрашенный	36	SV-2286
	<b>0</b>	3.5	90	Неокрашенный	36	SV-2287
<b>3/8 круга 39 мм</b> 	<b>2-0</b>	3	75	Неокрашенный	12	SV-9961G
<b>1/2 круга 18 мм</b> 	<b>4-0</b>	1.5	45	Неокрашенный	36	SV-4550
<b>1/2 круга 24 мм</b> 	<b>4-0</b>	1.5	45	Неокрашенный	36	SV-9926
	<b>3-0</b>	2	45	Неокрашенный	36	SV-9927
	<b>2-0</b>	3	45	Неокрашенный	36	SV-9928
<b>1/2 круга 26 мм</b> 	<b>2-0</b>	3	75	Неокрашенный	12	CV-9936G
<b>1/2 круга 37 мм</b> 	<b>3-0</b>	2	135	Неокрашенный	12	CV-931G
	<b>2-0</b>	3	90	Неокрашенный	36	CV-4721
	<b>2-0</b>	3	135	Неокрашенный	12	CV-932G
	<b>0</b>	3.5	90	Неокрашенный	36	CV-4731
<b>1/2 круга 40 мм</b> 	<b>0</b>	3.5	90	Неокрашенный	36	CV-485
	<b>1</b>	4	90	Неокрашенный	36	CV-486

**ПРЕМИУМ ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / PREMIUM REVERSE CUTTING**

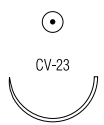
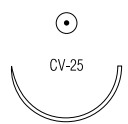
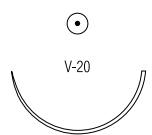
Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
<b>3/8 круга 11 мм</b> 	6-0	0.7	45	Неокрашенный	36	SV-9913
	6-0	0.7	75	Неокрашенный	36	SV-4893
	5-0	1	45	Неокрашенный	36	SV-9915
<b>3/8 круга 13 мм</b> 	5-0	1	45	Неокрашенный	36	SV-493
	4-0	1.5	45	Неокрашенный	36	SV-494
	4-0	1.5	75	Неокрашенный	36	Surgalloy™ SVP-494
<b>3/8 круга 16 мм</b> 	5-0	1	75	Неокрашенный	36	Surgalloy™ SVP-2296
	4-0	1.5	75	Неокрашенный	36	Surgalloy™ SVP-2294
	3-0	2	75	Неокрашенный	36	Surgalloy™ SVP-2295
<b>3/8 круга 19 мм</b> 	3-0	2	75	Неокрашенный	36	SV-425
	4-0	1.5	45	Неокрашенный	12	SV-496G
	4-0	1.5	75	Неокрашенный	36	SV-426
	3-0	2	45	Неокрашенный	12	SV-497G
	2-0	3	75	Неокрашенный	36	SV-424
<b>3/8 круга 24 мм</b> 	4-0	1.5	75	Неокрашенный	36	SVP-2251
	3-0	2	45	Неокрашенный	36	SV-6830
	3-0	2	75	Неокрашенный	36	SV-935
	2-0	3	45	Неокрашенный	36	SV-6840
	2-0	3	75	Неокрашенный	36	SV-439
<b>3/8 круга 30 мм</b> 	3-0	2	90	Неокрашенный	36	SVP-2285
<b>3/8 круга 39 мм</b> 	3-0	2	75	Неокрашенный	12	SV-9937G
	2-0	3	75	Неокрашенный	12	SV-9938G
<b>1/2 круга 16 мм</b> 	5-0	1	45	Неокрашенный	12	SV-9910G
	4-0	1.5	45	Неокрашенный	12	SV-9911G



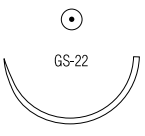
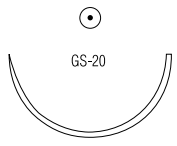
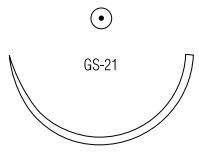
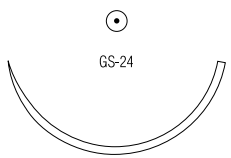
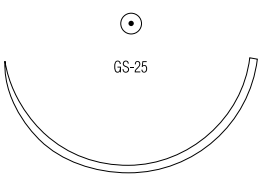
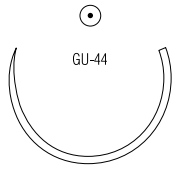
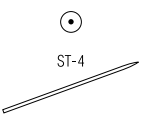
## РЕЖУЩАЯ / CONVENTIONAL CUTTING

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
<b>3/8 круга 16 мм</b> 	5-0	1	75	Неокрашенный	12		SV-834G
	4-0	1.5	75	Неокрашенный	12		SV-835G
<b>3/8 круга 16 мм</b> 	5-0	1	45	Неокрашенный	12		SV-844G
	4-0	1.5	45	Неокрашенный	12		SV-845G
	4-0	1.5	75	Неокрашенный	12		SV-488G
	3-0	2	75	Неокрашенный	12		SV-487G
<b>Прямая 11 мм</b> 	4-0	1.5	45	Неокрашенный	12		SV-9909G
<b>Прямая 51 мм</b> 	4-0	1.5	75	Неокрашенный	36		SV-2238
	3-0	2	75	Неокрашенный	36		SV-2239
	2-0	3	75	Неокрашенный	36		SV-2240
<b>Прямая 60 мм</b> 	3-0	2	75	Неокрашенный	36		SV-9943
	2-0	3	75	Неокрашенный	12		SV-9944G


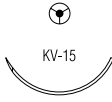
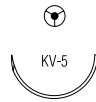
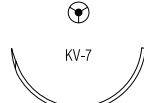


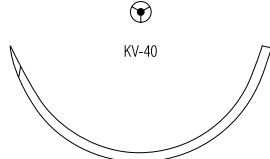
## КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
<b>1/2 круга 17 мм</b> 	5-0	1	75	Неокрашенный	36		CV-1213
	4-0	1.5	75	Неокрашенный	36		CV-1214
	3-0	2	75	Неокрашенный	36		CV-1215
<b>1/2 круга 22 мм</b> 	4-0	1.5	75	Неокрашенный	36	Optivis™	CV-3100
	3-0	2	75	Неокрашенный	36	Optivis™	CV-3110
	2-0	3	75	Неокрашенный	36		CV-3120
<b>1/2 круга 26 мм</b> 	4-0	1.5	75	Неокрашенный	36		CV-415
	3-0	2	75	Неокрашенный	12		CV-416G
	2-0	3	75	Неокрашенный	12		CV-417G
	0	3.5	75	Неокрашенный	36		CV-418

## КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
<b>1/2 круга 27 мм</b> 	2-0	3	75	Неокрашенный	36		CV-55
	0	3.5	75	Неокрашенный	36		CV-56
	1	4	75	Неокрашенный	36		CV-57
<b>1/2 круга 34 мм</b> 	2-0	3	75	Неокрашенный	12		CV-9975G
<b>1/2 круга 37 мм</b> 	3-0	2	75	Неокрашенный	36		CV-322
	3-0	2	90	Неокрашенный	36		CV-944
	2-0	3	75	Неокрашенный	36		CV-323
	2-0	3	90	Неокрашенный	36		CV-945
	0	3.5	75	Неокрашенный	36		CV-1324
	0	3.5	90	Неокрашенный	36		CV-946
	1	4	90	Неокрашенный	36		CV-947
<b>1/2 круга 40 мм</b> 	2-0	3	90	Неокрашенный	36		CV-9592
	0	3.5	90	Неокрашенный	36		CV-9591
	1	4	90	Неокрашенный	36		CV-9590
<b>1/2 круга 48 мм</b> 	2-0	3	90	Неокрашенный	36		CV-606
	0	3.5	90	Неокрашенный	36		CV-604
	1	4	90	Неокрашенный	36		CV-605
<b>5/8 круга 40 мм</b> 	1	4	90	Неокрашенный	36		UV-1382
<b>Прямая 19 мм</b> 	4-0	1.5	75	Неокрашенный	36		CV-1673

## КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ / TAPERCUTTING

Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
<b>3/8 круга 13 мм</b> 	5-0	1	75	Неокрашенный	36	CV-2293
<b>3/8 круга 17 мм</b> 	4-0	1.5	45	Неокрашенный	12	CV-2275G
	4-0	1.5	75	Неокрашенный	36	CV-2279
	3-0	2	75	Неокрашенный	36	CV-2280
<b>1/2 круга 17 мм</b> 	3-0	2	75	Неокрашенный	12	CV-1674G
<b>1/2 круга 26 мм</b> 	3-0	2	75	Неокрашенный	12	CV-2003G
	2-0	3	90	Неокрашенный	36	CV-1002
<b>1/2 круга 37 мм</b> 	3-0	2	90	Неокрашенный	36	CV-916
	2-0	3	90	Неокрашенный	36	CV-917
	0	3.5	90	Неокрашенный	36	CV-919
	1	4	90	Неокрашенный	36	CV-918
<b>1/2 круга 40 мм</b> 	2-0	3	90	Неокрашенный	36	CV-2218
	0	3.5	90	Неокрашенный	36	CV-2217
	1	4	90	Неокрашенный	36	CV-2216
<b>1/2 круга 40 мм</b>	2-0	3.5/3	3x75	Неокрашенный	24	Набор 3 нити в пакете CV-0046
<b>1/2 круга 48 мм</b> 	0	3.5	90	Неокрашенный	36	CV-7191
	1	4	90	Неокрашенный	36	CV-7190

## ШПАТЕЛЬ/ SPATULA

Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
<b>3/8 круга 6.3 мм</b> 	8-0	0.4	30	Фиолетовый	12	CV-501G
	7-0	0.5	30	Фиолетовый	12	CV-500G

# POLYSORB™

Плетёный синтетический рассасывающийся покрытый шовный материал

Максимальная поддержка во время критического периода заживления раны.



Прочность материала Polysorb™, обусловленная большим количеством более тонких моноволокон в составе нити, обеспечивает надежную поддержку раны на протяжении всего критического периода заживления раны.

<b>Описание материала</b>	Покрытый, плетеный синтетический рассасывающийся шовный материал Polysorb™ состоит из Lactomer™ 9-1 кополимера гликолид/лактида, который представляет собой синтетический полиэфир, состоящий из гликолида и лактида, полученного из гликолиевой и молочной кислоты. Шовный материал Polysorb™ при изготовлении покрывается составом из кополимера капролактона, гликолида и стеаройл лактилата кальция.
<b>Показания</b>	Шовный материал Polysorb™ предназначен для сшивания или для лигирования тканей в общей, торакальной хирургии, урологии и гинекологии, офтальмохирургии. Однако применение в сердечно-сосудистой хирургии и на нервных тканях ограничено.
<b>Применение</b>	Синтетический рассасывающийся шовный материал Polysorb™ вызывает минимальную воспалительную реакцию в тканях, быстро инкапсулируется. Прогрессирующая потеря прочности и окончательное рассасывание шовного материала Polysorb™ происходит путем гидролиза, когда Lactomer™9-1 распадается на гликолиевую и молочную кислоту, которые впоследствии метаболизируются в организме и выводятся почками.
<b>Срок поддержки раны</b>	Проведенные исследования в области подкожной имплантации шовного материала Polysorb™ определили, что его первоначальная прочность в узле оценивается как 140% стандарта USP и EP. Около 80% прочности сохраняется в первые 2 недели и более 30% сохраняется по истечению 3 недель после имплантации шовного материала.
<b>Стерилизация</b>	Окись этилена.
<b>Рассасывание</b>	Процесс рассасывания начинается как потеря прочности без потери массы и заканчивается между 56 и 70 днями.
<b>Упаковка</b>	Шовный материал Polysorb™ производится в бесцветном варианте или окрашенном в фиолетовый цвет. Возможные варианты размеров от 2 USP (5 EP) до 8-0 USP (0.4 EP). Стерильный шовный материал поставляется в отрезках, катушках, безыгольном исполнении или с различными видами игл, как перманентно зафиксированных, так и отсоединяемых. Формируется в коробках по 12, 24 и 36 шт.

Перед применением, пожалуйста, ознакомьтесь с Инструкцией из каждой индивидуальной упаковки. Внимательно изучите все показания, противопоказания, меры предосторожности и способы применения.

Polysorb™ - шовный материал, которому вы доверяете более 20 лет, имеющий свою историю усовершенствования качества.

## ЛИГАТУРЫ / PRE-CUT

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
	4-0	1.5	12x45	Фиолетовый	24		L-11
	3-0	2	12x45	Фиолетовый	24		L-12
	3-0	2	6x75	Фиолетовый	24		L-38
	2-0	3	12x45	Неокрашенный	24		L-3
	2-0	3	12x45	Фиолетовый	24		L-13
	2-0	3	3x45	Фиолетовый	36		L-73
	2-0	3	6x45	Фиолетовый	24		L-23
	2-0	3	12x60	Фиолетовый	24		L-33
	2-0	3	3x75	Фиолетовый	24		L-403
	2-0	3	6x75	Фиолетовый	24		L-39
	0	3.5	12x45	Фиолетовый	24		L-27
	0	3.5	6x45	Фиолетовый	24		L-14
	0	3.5	3x75	Фиолетовый	24		L-404
	0	3.5	6x75	Фиолетовый	24		L-40
	1	4	6x45	Фиолетовый	24		L-15
	1	4	12x60	Фиолетовый	24		L-36
	1	4	3x75	Фиолетовый	24		L-405
	1	4	6x75	Фиолетовый	24		L-41
	2	5	12x45	Неокрашенный	24		L-26
	2	5	12x45	Фиолетовый	24		L-28
	2	5	3x45	Фиолетовый	36		L-76
	2	5	6x75	Фиолетовый	24		L-42

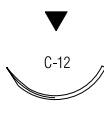
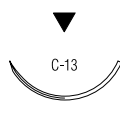
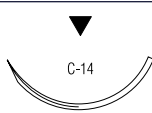
## ОТРЕЗКИ СТАНДАРТНОЙ ДЛИНЫ / STANDARD LENGTH

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
<b>Отрезки стандартной длины</b>	4-0	1.5	150	Фиолетовый	36		L-111
	3-0	2	150	Фиолетовый	36		L-112
	2-0	3	150	Фиолетовый	36		L-113
	0	3.5	150	Фиолетовый	36		L-114
	1	4	150	Фиолетовый	36		L-115
	2	5	150	Фиолетовый	36		L-116

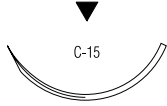
## КАТУШКИ / REEL

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
<b>Катушки</b>	4-0	1.5	150	Неокрашенный	24		LL-101
	4-0	1.5	250	Фиолетовый	24		LL-221
	3-0	2	150	Фиолетовый	24		LL-112
	3-0	2	250	Неокрашенный	24		LL-322
	3-0	2	250	Фиолетовый	24		LL-222
	2-0	3	150	Фиолетовый	24		LL-113
	2-0	3	250	Фиолетовый	24		LL-223
	0	3.5	150	Фиолетовый	24		LL-114
	0	3.5	250	Фиолетовый	24		LL-224
	1	4	150	Фиолетовый	24		LL-115
	1	4	250	Фиолетовый	24		LL-225
	2	5	150	Фиолетовый	24		LL-116
	2	5	250	Фиолетовый	24		LL-226

## ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / REVERSE CUTTING

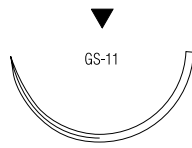
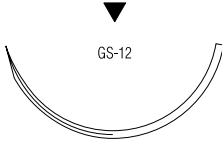
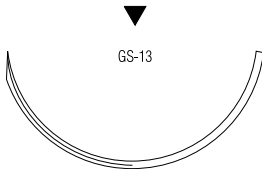
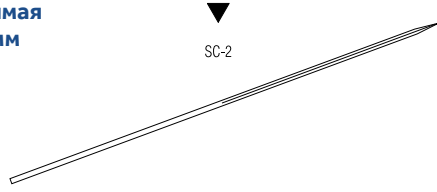
Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
<b>3/8 круга 16 мм</b> 	5-0	1	75	Фиолетовый	36		SL-630
	4-0	1.5	75	Фиолетовый	36		SL-607
	3-0	2	75	Фиолетовый	36		SL-608
<b>3/8 круга 19 мм</b> 	5-0	1	75	Неокрашенный	36		SL-690
	5-0	1	75	Фиолетовый	36		SL-634
	4-0	1.5	75	Неокрашенный	36		SL-691
	4-0	1.5	75	Фиолетовый	36		SL-635
	3-0	2	45	Неокрашенный	36		SL-637
	3-0	2	75	Неокрашенный	36		SL-822
	3-0	2	75	Фиолетовый	36		SL-636
<b>3/8 круга 24 мм</b> 	4-0	1.5	75	Неокрашенный	36		SL-692
	3-0	2	75	Неокрашенный	36		SL-693
	3-0	2	75	Фиолетовый	36		SL-694
	2-0	3	75	Неокрашенный	36		SL-823
	2-0	3	75	Фиолетовый	36		CL-823

**ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / REVERSE CUTTING**




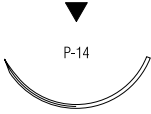
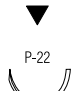
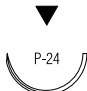
Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
<b>3/8 круга 26 мм</b> 	<b>2-0</b>	3	75	Неокрашенный	36	SL-586
	<b>0</b>	3.5	75	Неокрашенный	36	SL-587
<b>3/8 круга 30 мм</b> 	<b>3-0</b>	2	75	Неокрашенный	36	SL-696
	<b>2-0</b>	3	75	Неокрашенный	36	SL-611
	<b>0</b>	3.5	90	Фиолетовый	36	SL-712
<b>1/2 круга 24 мм</b> 	<b>3-0</b>	2	75	Неокрашенный	36	SL-613
	<b>3-0</b>	2	75	Фиолетовый	36	SL-632
	<b>2-0</b>	3	75	Неокрашенный	36	SL-612
<b>1/2 круга 26 мм</b> 	<b>3-0</b>	2	75	Неокрашенный	36	CL-868
	<b>2-0</b>	3	75	Неокрашенный	36	CL-869
	<b>2-0</b>	3	75	Фиолетовый	36	CL-769
	<b>0</b>	3.5	75	Неокрашенный	36	CL-870
	<b>1</b>	4	75	Неокрашенный	36	CL-867
<b>1/2 круга 30 мм</b> 	<b>2-0</b>	3	75	Фиолетовый	36	SL-622
	<b>0</b>	3.5	90	Неокрашенный	36	SL-721
	<b>1</b>	4	90	Фиолетовый	36	SL-722
<b>1/2 круга 37 мм</b> 	<b>2-0</b>	3	150	Фиолетовый	36	CL-992
<b>1/2 круга 37 мм</b> 	<b>1</b>	4	75	Фиолетовый	36	CL-528



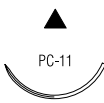
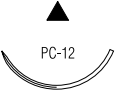
**ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / REVERSE CUTTING**

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа	
	USP	Метрик						
<b>1/2 круга 37 мм</b> 	<b>3-0</b>	2	75	Фиолетовый	36		CL-815	
	<b>2-0</b>	3	75	Неокрашенный	36		CL-543	
	<b>2-0</b>	3	75	Фиолетовый	36		CL-816	
	<b>2-0</b>	3	90	Фиолетовый	36		CL-916	
	<b>0</b>	3.5	75	Неокрашенный	36		CL-544	
	<b>0</b>	3.5	75	Фиолетовый	36		CL-817	
	<b>0</b>	3.5	90	Неокрашенный	36		CL-534	
	<b>0</b>	3.5	90	Фиолетовый	36		CL-917	
	<b>1</b>	4	75	Фиолетовый	36		CL-818	
	<b>1</b>	4	90	Фиолетовый	36		CL-918	
	<b>2</b>	5	90	Неокрашенный	36		CL-533	
	<b>2</b>	5	90	Фиолетовый	36		CL-919	
	<b>1/2 круга 40 мм</b> 	<b>2-0</b>	3	75	Фиолетовый	36		CL-833
		<b>0</b>	3.5	75	Фиолетовый	36		CL-804
<b>0</b>		3.5	90	Фиолетовый	36		CL-933	
<b>1</b>		4	75	Фиолетовый	36		CL-805	
<b>1</b>		4	90	Фиолетовый	36		CL-936	
<b>2</b>		5	90	Фиолетовый	36		CL-937	
<b>1/2 круга 48 мм</b> 		<b>0</b>	3.5	75	Фиолетовый	36		CL-568
	<b>0</b>	3.5	90	Фиолетовый	36		CL-927	
	<b>1</b>	4	75	Фиолетовый	36		CL-569	
	<b>1</b>	4	90	Фиолетовый	36		CL-928	
	<b>2</b>	5	90	Фиолетовый	36		CL-929	
	<b>Прямая 60 мм</b> 	<b>3-0</b>	2	75	Неокрашенный	36		SL-643
<b>3-0</b>		2	75	Фиолетовый	36		SL-653	
<b>2-0</b>		3	75	Неокрашенный	36		SL-642	

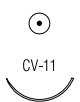

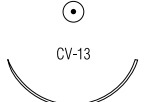
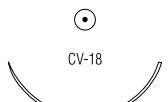

## КОСМЕТИЧЕСКАЯ ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / COSMETIC REVERSE CUTTING

Описание		Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
		USP	Метрик					
<b>3/8 круга 11 мм</b>		6-0	0.7	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SL-1625
		5-0	1	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SL-1689
<b>3/8 круга 13 мм</b>		6-0	0.7	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SL-5688
		5-0	1	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SL-5687
		5-0	1	45	Неокрашенный	12	Surgalloy™	SL-5687G
		4-0	1.5	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SL-5690
<b>3/8 круга 16 мм</b>		5-0	1	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SL-5626
		4-0	1.5	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SL-5686
<b>3/8 круга 19 мм</b>		5-0	1	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SL-5636
		4-0	1.5	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SL-5627
		4-0	1.5	75	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SL-5637
		3-0	2	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SL-5628
		3-0	2	45	Неокрашенный	12	Surgalloy™	SL-5628G
		3-0	2	75	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SL-5638
<b>3/8 круга 24 мм</b>		4-0	1.5	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SL-5641
		4-0	1.5	75	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SL-5678
		3-0	2	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SL-5640
		3-0	2	45	Неокрашенный	12	Surgalloy™	SL-5640G
		3-0	2	75	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SL-5679
		2-0	3	75	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SL-5680
<b>1/2 круга 13 мм</b>		4-0	1.5	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SL-1615
<b>1/2 круга 16 мм</b>		4-0	1.5	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SL-5633



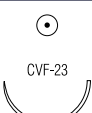
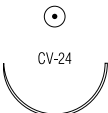
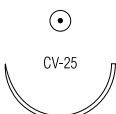

## КОСМЕТИЧЕСКАЯ РЕЖУЩАЯ / COSMETIC CONVENTIONAL CUTTING

Описание		Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
		USP	Метрик					
<b>3/8 круга 16 мм</b>		<b>4-0</b>	1.5	45	Неокрашенный	36		SL-1657
<b>3/8 круга 19 мм</b>		<b>4-0</b>	1.5	45	Неокрашенный	36		SL-1653

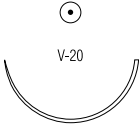
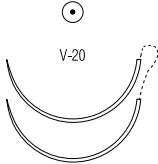
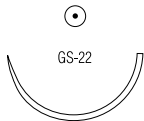

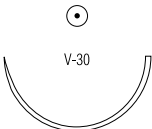
## КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание		Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
		USP	Метрик					
<b>3/8 круга 13 мм</b>		<b>6-0</b>	0.7	75	Фиолетовый	36		GL-889
		<b>5-0</b>	1	75	Фиолетовый	36		GL-890
<b>3/8 круга 17 мм</b>		<b>4-0</b>	1.5	75	Фиолетовый	36		GL-881
<b>3/8 круга 22 мм</b>		<b>3-0</b>	2	75	Фиолетовый	36		GL-303
		<b>2-0</b>	3	75	Фиолетовый	36		GL-302
<b>3/8 круга 26 мм</b>		<b>2-0</b>	3	75	Фиолетовый	36		CL-457
<b>3/8 круга 32 мм</b>		<b>3-0</b>	2	75	Фиолетовый	36		GL-522
		<b>2-0</b>	3	75	Фиолетовый	36		GL-523
		<b>0</b>	3.5	75	Фиолетовый	36		GL-524

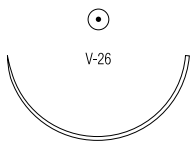
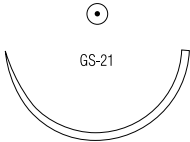

## КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание		Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
		USP	Метрик					
<b>1/2 круга 12 мм</b>		6-0	0.7	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™	UL-101
		6-0	0.7	45	Фиолетовый	36	Surgalloy™	UL-102
		5-0	1	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SL-432
<b>1/2 круга 13 мм</b>		5-0	1	75	Неокрашенный	36		GL-885
		4-0	1.5	75	Неокрашенный	36		GL-884
<b>1/2 круга 17 мм</b>		6-0	0.7	75	Фиолетовый	36		UL-201
		5-0	1	75	Фиолетовый	36		UL-202
		3-0	2	75	Неокрашенный	36		UL-215
		3-0	2	75	Фиолетовый	36		UL-204
		2-0	3	75	Фиолетовый	36		UL-205
<b>1/2 круга 17 мм</b>		4-0	1.5	75	Неокрашенный	36	Surgalloy™	UL-214
		4-0	1.5	75	Фиолетовый	36	Surgalloy™	UL-203
<b>1/2 круга 20 мм</b>		4-0	1.5	75	Фиолетовый	36		CL-460
		3-0	2	75	Фиолетовый	36		CL-461
<b>1/2 круга 22 мм</b>		4-0	1.5	75	Неокрашенный	36		GL-191
		4-0	1.5	75	Фиолетовый	36		GL-181
		3-0	2	75	Неокрашенный	36		GL-192
		3-0	2	75	Фиолетовый	36		GL-182
		2-0	3	75	Фиолетовый	36		GL-183
<b>1/2 круга 22 мм</b>		3-0	2	90	Фиолетовый	36		GL-282
<b>1/2 круга 22 мм</b>		3-0	2	75	Фиолетовый	36		CL-892
		2-0	3	75	Фиолетовый	36		CL-893
		0	3.5	75	Фиолетовый	36		CL-894

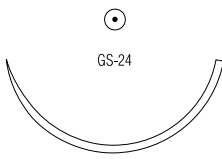

## КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
<b>1/2 круга 26 мм</b> 	<b>5-0</b>	1	75	Фиолетовый	36		GL-120
	<b>4-0</b>	1.5	75	Неокрашенный	36		GL-321
	<b>4-0</b>	1.5	75	Фиолетовый	36	Surgalloy™	GLS-121
	<b>4-0</b>	1.5	75	Фиолетовый	36		GL-121
	<b>3-0</b>	2	75	Неокрашенный	36		GL-322
	<b>3-0</b>	2	75	Фиолетовый	36	Surgalloy™	GLS-122
	<b>3-0</b>	2	75	Фиолетовый	36		GL-122
	<b>3-0</b>	2	90	Фиолетовый	36		GL-226
	<b>2-0</b>	3	75	Неокрашенный	36	Surgalloy™	GLS-323
	<b>2-0</b>	3	75	Неокрашенный	36		GL-323
	<b>2-0</b>	3	75	Фиолетовый	36	Surgalloy™	GLS-123
	<b>2-0</b>	3	75	Фиолетовый	36		GL-123
	<b>2-0</b>	3	90	Фиолетовый	36		GL-125
	<b>0</b>	3.5	75	Фиолетовый	36		GL-124
<b>1/2 круга 26 мм</b> 	<b>3-0</b>	2	90	Фиолетовый	36		GL-332
<b>1/2 круга 27 мм</b> 	<b>3-0</b>	2	75	Фиолетовый	36		CL-882
	<b>2-0</b>	3	75	Фиолетовый	36	Surgalloy™	CL-883
	<b>0</b>	3.5	90	Фиолетовый	36		CL-330
	<b>1</b>	4	75	Фиолетовый	36		CL-885
	<b>2</b>	5	75	Фиолетовый	36		CL-232
<b>1/2 круга 27 мм</b> 	<b>1</b>	4	75	Фиолетовый	36		CL-871
<b>1/2 круга 30 мм</b> 	<b>3-0</b>	2	75	Фиолетовый	36		GL-222
	<b>2-0</b>	3	75	Фиолетовый	36		GL-223
	<b>0</b>	3.5	75	Фиолетовый	36		GL-224
	<b>1</b>	4	75	Фиолетовый	36		GL-225

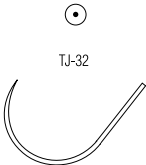
## КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
<b>1/2 круга 37 мм</b> 	<b>3-0</b>	2	75	Фиолетовый	36		GL-126
	<b>2-0</b>	3	75	Фиолетовый	36		GL-127
	<b>0</b>	3.5	75	Фиолетовый	36		GL-128
	<b>1</b>	4	75	Фиолетовый	36		GL-129
<b>1/2 круга 37 мм</b> 	<b>4-0</b>	1.5	75	Фиолетовый	36		CL-809
	<b>3-0</b>	2	75	Неокрашенный	36		CL-842
	<b>3-0</b>	2	75	Фиолетовый	36		CL-810
	<b>3-0</b>	2	90	Фиолетовый	36		CL-922
	<b>2-0</b>	3	75	Фиолетовый	36		CL-811
	<b>2-0</b>	3	90	Неокрашенный	36		CL-953
	<b>2-0</b>	3	90	Фиолетовый	36		CL-923
	<b>0</b>	3.5	5x45	Фиолетовый	12	D-Tach™	CL-10-MG
	<b>0</b>	3.5	75	Неокрашенный	36		CL-844
	<b>0</b>	3.5	75	Фиолетовый	36		CL-812
	<b>0</b>	3.5	5x75	Фиолетовый	12	D-Tach™	CL-5-M
	<b>0</b>	3.5	90	Неокрашенный	36		CL-954
	<b>0</b>	3.5	90	Фиолетовый	36		CL-924
	<b>1</b>	4	5x45	Фиолетовый	12	D-Tach™	CL-11-MG
	<b>1</b>	4	75	Фиолетовый	36		CL-813
	<b>1</b>	4	5x75	Фиолетовый	12	D-Tach™	CL-6-M
	<b>1</b>	4	90	Неокрашенный	36		CL-955
	<b>1</b>	4	90	Фиолетовый	36		CL-925
	<b>2</b>	5	75	Фиолетовый	36		CL-814
	<b>2</b>	5	90	Фиолетовый	36		CL-926
<b>1/2 круга 37 мм</b> 	<b>0</b>	3.5	75	Фиолетовый	36		CL-931
	<b>0</b>	3.5	90	Фиолетовый	36		CL-971
	<b>1</b>	4	5x45	Фиолетовый	12	D-Tach™	CL-201-M
	<b>1</b>	4	75	Фиолетовый	36		CL-932
	<b>1</b>	4	90	Фиолетовый	36		CL-239

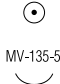
## КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
<b>1/2 круга 40 мм</b> 	2-0	3	75	Фиолетовый	36		CL-801
	2-0	3	90	Фиолетовый	36		CL-913
	0	3.5	75	Фиолетовый	36		CL-802
	0	3.5	90	Неокрашенный	36		CL-964
	0	3.5	90	Фиолетовый	36		CL-914
	1	4	5x45	Фиолетовый	12	D-Tach™	CL-21-MG
	1	4	75	Неокрашенный	36		CL-855
	1	4	75	Фиолетовый	36		CL-803
	1	4	90	Фиолетовый	36		CL-915
	2	5	5x60	Фиолетовый	12	D-Tach™	CL-622-M
	2	5	75	Фиолетовый	36		CL-779
	2	5	90	Фиолетовый	36		CL-911
	<b>1/2 круга 48 мм</b> 	3-0	2	75	Фиолетовый	36	
2-0		3	75	Фиолетовый	36		CL-863
2-0		3	90	Фиолетовый	36		CL-903
0		3.5	75	Фиолетовый	36		CL-864
0		3.5	90	Неокрашенный	36		CL-974
0		3.5	90	Фиолетовый	36		CL-904
1		4	5x45	Фиолетовый	12	D-Tach™	CL-31-MG
1		4	75	Фиолетовый	36		CL-865
1		4	5x75	Фиолетовый	12	D-Tach™	CL-64-M
1		4	90	Фиолетовый	36		CL-905
2		5	5x45	Фиолетовый	6	D-Tach™	CL-633-M
2		5	75	Фиолетовый	36		CL-866
2		5	5x75	Фиолетовый	6	D-Tach™	CL-665-M
2		5	90	Фиолетовый	36		CL-906
<b>1/2 круга 65 мм</b> 	2-0	3	75	Неокрашенный	24		CL-63
	1	4	90	Фиолетовый	36		CL-968
	1	4	150	Фиолетовый	24		CL-824
	2	5	150	Фиолетовый	24		CL-825
<b>1/2 круга, петля 65 мм</b> 	1	4	120	Фиолетовый	24	Петля	CL-824-L
	2	5	240	Фиолетовый	24	Петля	CL-835-L

## КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
<b>5/8 круга 27 мм</b> 	<b>3-0</b>	2	75	Фиолетовый	36	UL-879
	<b>2-0</b>	3	75	Фиолетовый	36	UL-878
	<b>0</b>	3.5	75	Фиолетовый	36	UL-877
	<b>1</b>	4	75	Фиолетовый	36	UL-876
<b>5/8 круга 37 мм</b> 	<b>2-0</b>	3	75	Фиолетовый	36	UL-245
	<b>0</b>	3.5	75	Фиолетовый	36	UL-246
<b>J-Игла 32 мм</b> 	<b>1</b>	4	75	Фиолетовый	12	CL-673-G
<b>Лыжа 23 мм</b> 	<b>3-0</b>	2	18	Фиолетовый	36	Эндоскопия EL-415
	<b>3-0</b>	2	120	Фиолетовый	24	Эндоскопия EL-450

## МИКРОХИРУРГИЧЕСКАЯ КОЛЮЩАЯ / MICROSURGERY TAPER POINT

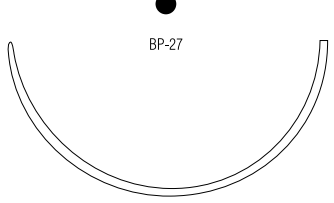
Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
<b>3/8 круга 6 мм</b> 	<b>8-0</b>	0.4	13	Фиолетовый	12	Surgalloy™ L-2800



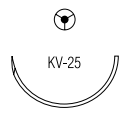
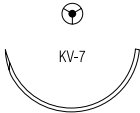
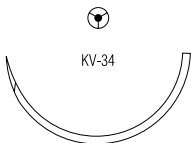
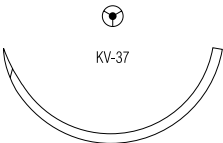
## ТУПОКОНЕЧНАЯ КОЛЮЩАЯ / BLUNT TAPER

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
<b>1/2 круга 26 мм</b> 	3-0	2	5x45	Неокрашенный	12	Protect-Point™ - D-Tach™	GLT-69-MG
<b>1/2 круга 37 мм</b> 	3-0	2	90	Неокрашенный	36	Protect-Point™	CLT-952
	2-0	3	75	Неокрашенный	36	Protect-Point™	CLT-259
	0	3.5	90	Неокрашенный	36	Protect-Point™	CLT-954
<b>1/2 круга 37 мм</b> 	0	3.5	90	Фиолетовый	36	Protect-Point™	CL-957
<b>1/2 круга 40 мм</b> 	0	3.5	90	Фиолетовый	36	Protect-Point™	CL-950
	1	4	90	Фиолетовый	36	Protect-Point™	CL-951
<b>1/2 круга 48 мм</b> 	0	3.5	90	Фиолетовый	36	Protect-Point™	CL-948
	1	4	90	Фиолетовый	36	Protect-Point™	CL-949
<b>1/2 круга 65 мм</b> 	2	5	2x90	Фиолетовый	24	Protect-Point™	2-CL-852

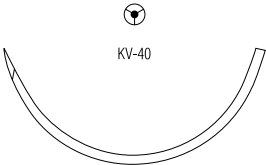
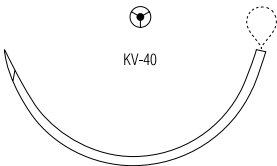
## ТУПОКОНЕЧНАЯ / BLUNT POINT

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
<b>1/2 круга 64 мм</b> 	1	4	90	Фиолетовый	36		CL-271
	2	5	90	Фиолетовый	36		CL-270



## КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ / TAPERCUTTING

Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
<b>1/2 круга</b> <b>22 мм</b> 	<b>1</b>	4	75	Неокрашенный	36	CL-513
<b>1/2 круга</b> <b>26 мм</b> 	<b>3-0</b>	2	75	Фиолетовый	36	Surgalloy™ CL-510
	<b>2-0</b>	3	75	Фиолетовый	36	Surgalloy™ CL-511
<b>1/2 круга</b> <b>37 мм</b> 	<b>3-0</b>	2	90	Фиолетовый	36	CL-942
	<b>2-0</b>	3	75	Фиолетовый	36	CL-837
	<b>2-0</b>	3	90	Неокрашенный	36	CL-946
	<b>2-0</b>	3	90	Фиолетовый	36	CL-943
	<b>0</b>	3.5	75	Фиолетовый	36	CL-838
	<b>0</b>	3.5	90	Фиолетовый	36	CL-944
	<b>1</b>	4	75	Фиолетовый	36	CL-839
	<b>1</b>	4	90	Неокрашенный	36	CL-516
	<b>1</b>	4	90	Фиолетовый	36	CL-945
	<b>2</b>	5	90	Фиолетовый	36	CL-517
	<b>1/2 круга</b> <b>40 мм</b> 	<b>2-0</b>	3	75	Фиолетовый	36
<b>0</b>		3.5	75	Фиолетовый	36	CL-602



## КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ / TAPERCUTTING

Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
<b>1/2 круга</b> <b>48 мм</b> 	<b>0</b>	3.5	90	Фиолетовый	36	CL-739
	<b>1</b>	4	75	Фиолетовый	36	CL-840
	<b>2</b>	5	75	Фиолетовый	36	CL-841
	<b>2</b>	5	90	Фиолетовый	36	CL-941
<b>1/2 круга, петля</b> <b>48 мм</b> 	<b>1</b>	4	150	Фиолетовый	24	Петля CL-740-L
	<b>2</b>	5	150	Фиолетовый	24	Петля CL-741-L

## ШПАТЕЛЬ / SPATULA

Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа	
							USP
<b>1/4 круга 8 мм</b>   Кривизна 90°	6-0	0.7	30	Фиолетовый	12	Surgalloy™	L-1742K
	6-0	0.7	30	Неокрашенный	12	Surgalloy™	L-1745K
	6-0	0.7	45	Неокрашенный	24	Surgalloy™	L-2752K
	5-0	1	30	Фиолетовый	12	Surgalloy™	L-1785K
<b>1/4 круга 8,6 мм</b>   Кривизна 115°	5-0	1	45	Неокрашенный	12		L-1669-K
	5-0	1	45	Фиолетовый	12		L-1792-K

## ПРЕМИУМ ШПАТЕЛЬ / PREMIUM SPATULA

Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа	
							USP
<b>3/8 круга 6 мм</b>   Кривизна 140°	8-0	0.4	30	Фиолетовый	12	Surgalloy™	L-2748-K
<b>1/2 круга 5,5 мм</b>   Кривизна 160°	7-0	0.5	45	Фиолетовый	12	Surgalloy™	L-1787-K

## МНОГОЦЕЛЕВАЯ / MULTIPURPOSE

Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа	
							USP
<b>1/2 круга 30 мм</b>   4.31	0	3.5	75	Фиолетовый	36		CL-030
	<b>1/2 круга 40 мм</b>   4.41	0	3.5	75	Фиолетовый	36	
<b>1/2 круга 50 мм</b>   4.50		1	4	75	Фиолетовый	36	
	2	5	90	Фиолетовый	36		CL-055

# CAPROSYN™

Монофиламентный синтетический рассасывающийся шовный материал

Поддерживает, когда это вам необходимо.

Рассасывается, когда больше вам не нужен.



Быстрое рассасывание, что  
уменьшает возможные осложнения  
раны.

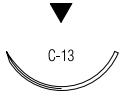

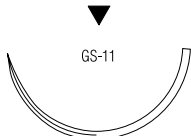
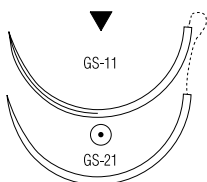
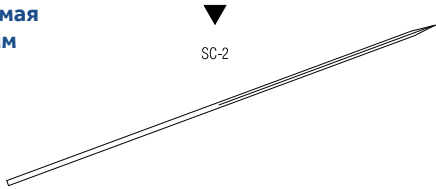
<b>Описание материала</b>	Монофиламентный синтетический рассасывающийся шовный материал Caprosyn™ изготавливается из синтетического полиэфира POLYGLYTONE™ 6211, который состоит из гликолида, капролактона, триметилен карбоната и лактида.
<b>Показания</b>	Синтетический рассасывающийся шовный материал Caprosyn™ предназначен для сопоставления тканей и/или для лигирования в общей, пластической и косметической хирургии, урологии и гинекологии. Применение в сердечно-сосудистой хирургии и на нейрохирургии, микрохирургии и офтальмологии не рекомендуется.
<b>Применение</b>	Синтетический рассасывающийся шовный материал Caprosyn™ вызывает минимальную острую воспалительную реакцию в тканях, быстро инкапсулируется. Прогрессирующая потеря прочности и окончательное рассасывание шовного материала Caprosyn™ происходит путем гидролиза.
<b>Срок поддержки раны</b>	Проведенные исследования в области подкожной имплантации шовного материала Caprosyn™ определили, что минимум 50 - 60% прочности узла по USP и EP сохраняется в первые 5 дней и около 20 - 30% сохраняется по истечении 10 дней после имплантации шовного материала. Полная потеря прочности происходит к 21 дню после имплантации.
<b>Стерилизация</b>	Окись этилена.
<b>Рассасывание</b>	Процесс рассасывания начинается, как потеря прочности без потери массы и заканчивается к 56 дню.
<b>Упаковка</b>	Шовный материал CAPROSYN™ производится в бесцветном варианте или окрашенными в фиолетовый D&C цвет № 2. Возможные варианты размеров от 1 USP (4 UP) до 6-0 (0.7 EP). Стерильный шовный материал поставляется в отрезках, катушках, безыгольном исполнении или с различными видами игл, зафиксированными перманентно или отсоединяемыми. Формируется в коробках по 12, 24 и 36 шт.  Перед применением, пожалуйста, ознакомьтесь с Инструкцией из каждой индивидуальной упаковки. Внимательно изучите все показания, противопоказания, меры предосторожности и способы применения.

Caprosyn™ - шовный материал, которому вы доверяете более 10 лет, имеющий доказанную временем эффективность.



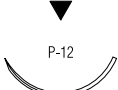

## КАТУШКИ / REEL

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
	0	3.5	150	Неокрашенный	36		C-214


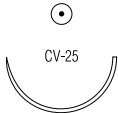
## ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / REVERSE CUTTING

Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
<b>3/8 круга</b> <b>19 мм</b> 	4-0	1.5	45	Неокрашенный	12	SC-690G
	4-0	1.5	75	Неокрашенный	36	SC-691
	3-0	2	75	Неокрашенный	36	SC-692
<b>3/8 круга</b> <b>26 мм</b> 	3-0	2	75	Неокрашенный	36	SC-587
	2-0	3	75	Неокрашенный	36	SC-586
<b>1/2 круга</b> <b>37 мм</b> 	2-0	3	75	Неокрашенный	36	CC-543
<b>1/2 круга</b> <b>37 мм</b> 	2-0	3	150	Неокрашенный	36	CC-983
<b>Прямая</b> <b>60 мм</b> 	4-0	1.5	75	Неокрашенный	36	SC-644
	3-0	2	75	Неокрашенный	36	SC-643

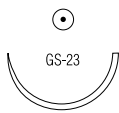
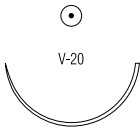
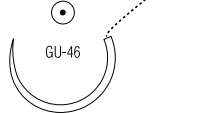
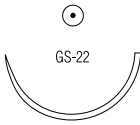
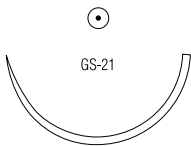
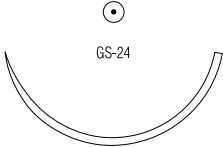
## КОСМЕТИЧЕСКАЯ ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / COSMETIC REVERSE CUTTING

Описание		Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
		USP	Метрик					
<b>3/8 круга 11 мм</b>		6-0	0.7	45	Неокрашенный	12	Surgalloy™	SC-3625G
		5-0	1	45	Неокрашенный	12	Surgalloy™	SC-3626G
<b>3/8 круга 13 мм</b>		6-0	0.7	45	Неокрашенный	12	Surgalloy™	SC-5688G
		5-0	1	45	Неокрашенный	12	Surgalloy™	SC-5689G
		5-0	1	45	Фиолетовый	12	Surgalloy™	SC-5587G
		4-0	1.5	45	Неокрашенный	12	Surgalloy™	SC-5690G
		4-0	1.5	45	Фиолетовый	12	Surgalloy™	SC-5590G
<b>3/8 круга 16 мм</b>		5-0	1	45	Неокрашенный	12	Surgalloy™	SC-5626G
		4-0	1.5	45	Неокрашенный	12	Surgalloy™	SC-5686G
<b>3/8 круга 19 мм</b>		5-0	1	45	Неокрашенный	12	Surgalloy™	SC-5616G
		4-0	1.5	45	Неокрашенный	12	Surgalloy™	SC-5617G
		4-0	1.5	75	Неокрашенный	12	Surgalloy™	SC-5637G
		3-0	2	45	Неокрашенный	12	Surgalloy™	SC-5618G
		3-0	2	75	Неокрашенный	12	Surgalloy™	SC-5638G
<b>3/8 круга 24 мм</b>		4-0	1.5	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SC-5679
		4-0	1.5	75	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SC-5779
		3-0	2	75	Неокрашенный	12	Surgalloy™	SC-5780G

## КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

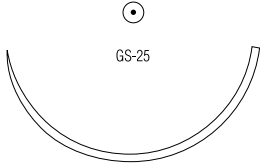
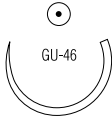
Описание		Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
		USP	Метрик					
<b>1/2 круга 17 мм</b>		5-0	1	75	Неокрашенный	36	Surgalloy™	UC-202
		4-0	1.5	75	Неокрашенный	36	Surgalloy™	UC-203
		3-0	2	75	Неокрашенный	36	Surgalloy™	UC-204
<b>1/2 круга 22 мм</b>		4-0	1.5	75	Неокрашенный	36	Surgalloy™	UC-403
		3-0	2	75	Неокрашенный	36	Surgalloy™	UC-404

## КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

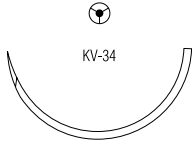
Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
<b>1/2 круга</b> <b>22 мм</b> 	2-0	3	75	Неокрашенный	36		UC-863
<b>1/2 круга</b> <b>26 мм</b> 	4-0	1.5	75	Неокрашенный	36	Surgalloy™	GC-121
	4-0	1.5	75	Фиолетовый	36	Surgalloy™	GC-321
	3-0	2	75	Неокрашенный	36	Surgalloy™	GC-122
	3-0	2	75	Фиолетовый	36	Surgalloy™	GC-322
	2-0	3	75	Неокрашенный	36	Surgalloy™	GC-123
	2-0	3	75	Фиолетовый	36	Surgalloy™	GC-323
	0	3.5	75	Неокрашенный	36		GC-124
<b>1/2 круга</b> <b>26 мм</b> 	2-0	3	75	Фиолетовый	36		CC-658
<b>5/8 круга</b> <b>27 мм</b> 							
<b>1/2 круга</b> <b>27 мм</b> 	2-0	3	75	Неокрашенный	36		CC-883
	2-0	3	75	Фиолетовый	36		CC-830
	0	3.5	75	Неокрашенный	36		CC-884
	1	4	75	Неокрашенный	36		CC-885
<b>1/2 круга</b> <b>37 мм</b> 	3-0	2	75	Неокрашенный	36		CC-810
	2-0	3	75	Неокрашенный	36		CC-811
	2-0	3	90	Неокрашенный	36		CC-923
	0	3.5	75	Неокрашенный	36		CC-812
	0	3.5	75	Фиолетовый	36		CC-844
	0	3.5	90	Неокрашенный	36		CC-924
	1	4	75	Неокрашенный	36		CC-813
	1	4	75	Фиолетовый	36		CC-845
	1	4	90	Неокрашенный	36		CC-925
<b>1/2 круга</b> <b>40 мм</b> 	2-0	3	75	Неокрашенный	36		CC-801
	2-0	3	90	Неокрашенный	36		CC-915
	0	3.5	75	Неокрашенный	36		CC-802
	0	3.5	90	Неокрашенный	36		CC-913
	1	4	75	Неокрашенный	36		CC-803
	1	4	90	Неокрашенный	36		CC-914






## КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
<b>1/2 круга 48 мм</b> 	0	3.5	90	Неокрашенный	36	CC-904
	1	4	90	Неокрашенный	36	CC-905
<b>5/8 круга 27 мм</b> 	2-0	3	75	Неокрашенный	36	UC-978

## КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ / TAPER CUTTING

Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
<b>1/2 круга 37 мм</b> 	2-0	3	90	Неокрашенный	12	CC-1945G

## КОСМЕТИЧЕСКАЯ РЕЖУЩАЯ / COSMETIC CONVENTIONAL CUTTING

Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
<b>3/8 круга 13 мм</b> 	5-0	1	45	Неокрашенный	12	XC-834
<b>3/8 круга 16 мм</b> 	5-0	1	45	Неокрашенный	12	XC-844
	4-0	1.5	45	Неокрашенный	12	XC-845
<b>3/8 круга 19 мм</b> 	4-0	1.5	45	Неокрашенный	12	XC-823

# BIOSYN™

Монофиламентный синтетический рассасывающийся шовный материал

Прочность, мягкость и надёжность.



Прочность, мягкость и надёжность монофиламента, как у плетёного шовного материала.

<b>Описание материала</b>	Синтетический рассасывающийся шовный материал Biosyn™ изготавливается из синтетического полиэфира, состоящего из гликолида, диоксанона и триметилен карбоната Glycomer™ 631. Шовный материал Biosyn™ производится в бесцветном варианте или окрашенным в Фиолетовый цвет.
<b>Показания</b>	Синтетический рассасывающийся шовный материал Biosyn™ предназначен для сопоставления тканей и/или для лигирования в общей, торакальной хирургии, урологии и гинекологии, офтальмохирургии. Не рекомендуется применение в сердечно-сосудистой и нейрохирургии.
<b>Применение</b>	Синтетический рассасывающийся шовный материал Biosyn™ вызывает минимальную воспалительную реакцию в тканях, быстро инкапсулируется. Прогрессирующая потеря прочности и окончательное рассасывание шовного материала Biosyn™ происходит путем гидролиза. Шовный материал распадается на гликолиевую кислоту, диаксаноновую кислоту, пропандиол и углекислый газ, которые в последствии метаболизируются в организме.
<b>Срок поддержки раны</b>	Проведенные исследования в области подкожной имплантации шовного материала Biosyn™ определили, что примерно 75% прочности узла по USP и EP сохраняется в первые 2 недели и около 40% сохраняется по истечению 3 недель после имплантации шовного материала.
<b>Стерилизация</b>	Окись этилена.
<b>Рассасывание</b>	Процесс рассасывания начинается как потеря прочности без потери массы и заканчивается между 90 и 110 днём.
<b>Упаковка</b>	Шовный материал BIOSYN™ производится в бесцветном варианте или окрашенным в Фиолетовый цвет. Возможные варианты размеров от 1 USP (4 EP) до 6-0 (0.7 EP). Стерильный шовный материал поставляется в отрезках, в катушках, безыгольном исполнении или с различными видами игл, зафиксированными перманентно или отсоединяемыми. Формируется в коробках по 12, 24 и 36 шт.  Перед применением, пожалуйста, ознакомьтесь с Инструкцией из каждой индивидуальной упаковки. Внимательно изучите все показания, противопоказания, меры предосторожности и способы применения.

Biosyn™ - шовный материал, которому вы доверяете более 15 лет, имеющий доказанную временем эффективность.

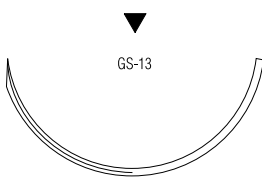
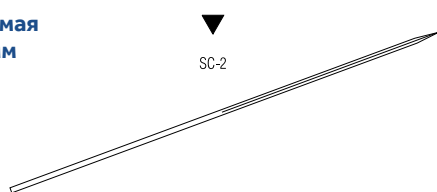
## ЛИГАТУРЫ / PRE-CUT

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
	0	3.5	3x45	Фиолетовый	36		M-74
	1	4	3x45	Фиолетовый	36		M-75

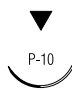
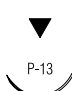
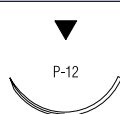

## ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / REVERSE CUTTING

Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
<b>3/8 круга</b> <b>19 мм</b> 	5-0	1	75	Неокрашенный	36	SM-690
	4-0	1.5	75	Неокрашенный	36	SM-691
	3-0	2	75	Неокрашенный	36	SM-822
<b>3/8 круга</b> <b>24 мм</b> 	3-0	2	75	Неокрашенный	36	SM-693
	2-0	3	75	Неокрашенный	36	SM-823
<b>1/2 круга</b> <b>24 мм</b> 	4-0	2	75	Фиолетовый	36	SM-633
	3-0	1.5	75	Фиолетовый	36	SM-632
<b>1/2 круга</b> <b>26 мм</b> 	2-0	3	75	Фиолетовый	36	CM-879
<b>1/2 круга</b> <b>37 мм</b> 	2-0	3	75	Фиолетовый	36	CM-816
	0	3.5	75	Неокрашенный	36	CM-544
<b>1/2 круга</b> <b>37 мм</b> 	1	4	75	Фиолетовый	36	CM-528



## ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / REVERSE CUTTING

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
<b>1/2 круга 48 мм</b> 	<b>1</b>	4	90	Фиолетовый	36		CM-222
<b>Прямая 60 мм</b> 	<b>3-0</b>	2	75	Неокрашенный	36		SM-643


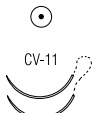
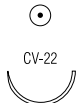
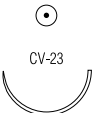
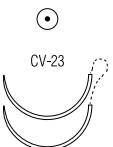
## КОСМЕТИЧЕСКАЯ ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / COSMETIC REVERSE CUTTING

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
<b>3/8 круга 11 мм</b> 	<b>6-0</b>	0.7	45	Неокрашенный	12	Surgalloy™	SM-3625
<b>3/8 круга 13 мм</b> 	<b>6-0</b>	0.7	45	Неокрашенный	12	Surgalloy™	SM-5688
	<b>5-0</b>	1	45	Неокрашенный	12	Surgalloy™	SM-5687
	<b>4-0</b>	1.5	45	Неокрашенный	12	Surgalloy™	SM-5690
<b>3/8 круга 19 мм</b> 	<b>5-0</b>	1	45	Неокрашенный	12	Surgalloy™	SM-5624
	<b>4-0</b>	1.5	45	Неокрашенный	12	Surgalloy™	SM-5627
	<b>4-0</b>	1.5	75	Неокрашенный	12	Surgalloy™	SM-5637
	<b>3-0</b>	2	45	Неокрашенный	12	Surgalloy™	SM-5628
	<b>3-0</b>	2	75	Неокрашенный	12	Surgalloy™	SM-5638
<b>3/8 круга 24 мм</b> 	<b>4-0</b>	1.5	75	Неокрашенный	24	Surgalloy™	SM-5679
	<b>4-0</b>	1.5	75	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SM-5678
	<b>3-0</b>	2	75	Неокрашенный	12	Surgalloy™	SM-5679G

## КОСМЕТИЧЕСКАЯ РЕЖУЩАЯ / COSMETIC CONVENTIONAL CUTTING

Описание		Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
		USP	Метрик					
<b>3/8 круга 16 мм</b>		<b>4-0</b>	1.5	45	Неокрашенный	12	Dermax™	XM-845
<b>3/8 круга 19 мм</b>		<b>5-0</b>	1	45	Неокрашенный	12	Dermax™	XM-822
		<b>4-0</b>	1.5	45	Неокрашенный	12	Dermax™	XM-823

## КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание		Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
		USP	Метрик					
<b>1/2 круга 12 мм</b>		<b>5-0</b>	1	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SM-432
		<b>4-0</b>	1.5	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SM-431
<b>3/8 круга 13 мм</b>		<b>5-0</b>	1	75	Фиолетовый	36	Surgalloy™	CM-126
<b>1/2 круга 13 мм</b>		<b>6-0</b>	0.7	x75	Неокрашенный	36	Surgalloy™	UM-886
		<b>6-0</b>	0.7	75	Фиолетовый	36	Surgalloy™	UM-986
		<b>5-0</b>	1	75	Фиолетовый	36	Surgalloy™	GM-875
<b>1/2 круга 17 мм</b>		<b>6-0</b>	0.7	75	Фиолетовый	36	Surgalloy™	UM-201
		<b>5-0</b>	1	75	Неокрашенный	36	Surgalloy™	UM-213
		<b>5-0</b>	1	75	Фиолетовый	36	Surgalloy™	UM-202
		<b>4-0</b>	1.5	75	Неокрашенный	36	Surgalloy™	UM-214
		<b>4-0</b>	1.5	75	Фиолетовый	36	Surgalloy™	UM-203
		<b>3-0</b>	2	75	Неокрашенный	36	Surgalloy™	UM-215
		<b>3-0</b>	2	75	Фиолетовый	36	Surgalloy™	UM-204
<b>1/2 круга 17 мм</b>		<b>4-0</b>	1.5	75	Фиолетовый	36	Surgalloy™	UM-403
		<b>3-0</b>	2	75	Фиолетовый	36	Surgalloy™	CM-208

## КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

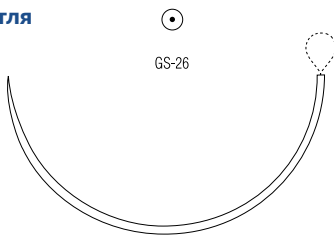
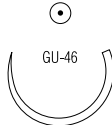
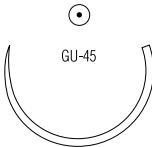
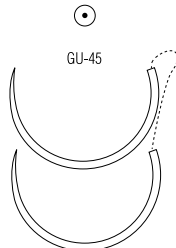
Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа	
							USP
<b>1/2 круга 22 мм</b> 	4-0	1.5	75	Фиолетовый	36	Surgalloy™	GM-181
	3-0	2	75	Фиолетовый	36	Surgalloy™	GM-324
	2-0	3	75	Фиолетовый	36	Surgalloy™	GM-183
<b>1/2 круга 22 мм</b> 	4-0	1.5	75	Фиолетовый	36	Surgalloy™	GM-281
	4-0	1.5	90	Фиолетовый	36	Surgalloy™	GM-291
	3-0	2	90	Фиолетовый	36	Surgalloy™	GM-282
<b>1/2 круга 26 мм</b> 	4-0	1.5	75	Фиолетовый	36	Surgalloy™	GM-121
	3-0	2	75	Неокрашенный	36	Surgalloy™	GM-322
	3-0	2	75	Фиолетовый	36	Surgalloy™	GM-122
	3-0	2	5 × 75	Фиолетовый	12	D-Tach™	GM-67-M
	2-0	3	75	Неокрашенный	36		GM-323
	2-0	3	75	Фиолетовый	36		GM-123
	2-0	3	90	Фиолетовый	36		GM-125
<b>1/2 круга 26 мм</b> 	4-0	1.5	75	Фиолетовый	36	Surgalloy™	GM-421
	4-0	1.5	90	Фиолетовый	36	Surgalloy™	GM-432
	3-0	2	90	Фиолетовый	36	Surgalloy™	GM-332
<b>1/2 круга 27 мм</b> 	3-0	2	75	Фиолетовый	36		CM-882
	2-0	3	75	Фиолетовый	36		CM-883
	0	3.5	75	Неокрашенный	36		CM-831
	0	3.5	75	Фиолетовый	36		CM-884
	1	4	75	Фиолетовый	36		CM-832
<b>1/2 круга 30 мм</b> 	3-0	2	75	Фиолетовый	36		GM-222
	2-0	3	75	Фиолетовый	36		GM-223
	2-0	3	90	Фиолетовый	36		GM-326
	0	3.5	90	Фиолетовый	36		GM-327

## КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
<b>1/2 круга 37 мм</b> 	<b>3-0</b>	2	75	Фиолетовый	36		CM-810
	<b>3-0</b>	2	90	Фиолетовый	36		CM-922
	<b>2-0</b>	3	75	Фиолетовый	36		CM-811
	<b>2-0</b>	3	90	Неокрашенный	36		CM-953
	<b>2-0</b>	3	90	Фиолетовый	36		CM-923
	<b>0</b>	3.5	75	Неокрашенный	36		CM-844
	<b>0</b>	3.5	75	Фиолетовый	36		CM-812
	<b>0</b>	3.5	90	Неокрашенный	36		CM-954
	<b>0</b>	3.5	90	Фиолетовый	36		CM-924
	<b>1</b>	4	75	Неокрашенный	36		CM-845
	<b>1</b>	4	75	Фиолетовый	36		CM-813
	<b>1</b>	4	90	Фиолетовый	36		CM-925
	<b>1/2 круга 40 мм</b> 	<b>0</b>	3.5	90	Фиолетовый	36	
<b>1</b>		4	90	Фиолетовый	36		CM-966
<b>1/2 круга, петля 40 мм</b> 	<b>1</b>	4	150	Фиолетовый	12	Петля	CM-767L
<b>1/2 круга 48 мм</b> 	<b>0</b>	3.5	90	Фиолетовый	36		CM-904
	<b>1</b>	4	90	Фиолетовый	36		CM-905
<b>1/2 круга, петля 48 мм</b> 	<b>0</b>	3.5	150	Фиолетовый	12	Петля	CM-790L
	<b>1</b>	4	150	Фиолетовый	12	Петля	CM-776L



## КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
<b>1/2 круга, петля 65 мм</b> 	<b>1</b>	4	240	Фиолетовый	12	Петля	CM-780L
<b>5/8 круга 27 мм</b> 	<b>3-0</b>	2	75	Фиолетовый	36		UM-879
	<b>2-0</b>	3	75	Неокрашенный	36		UM-978
	<b>2-0</b>	3	75	Фиолетовый	36		UM-878
	<b>0</b>	3.5	75	Неокрашенный	36		UM-977
	<b>0</b>	3.5	75	Фиолетовый	36		UM-877
<b>5/8 круга 37 мм</b> 	<b>2-0</b>	3	75	Неокрашенный	36		UM-345
	<b>2-0</b>	3	75	Фиолетовый	36		UM-245
<b>5/8 круга 37 мм</b> 	<b>3-0</b>	2	75	Фиолетовый	36		UM-243

## КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ / TAPPERCUTTING

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
<b>1/2 круга, петля 48 мм</b> 	<b>1</b>	4	150	Фиолетовый	12	Нить 150 см, Петля 75 см	CM-740L

# MAXON™

Монофиламентный синтетический рассасывающийся шовный материал

Вся сила удержания узла.



Вся сила удержания узла,  
позволяющая доверять шовному  
материалу.

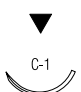
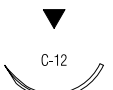

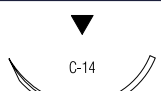
<b>Описание материала</b>	Синтетический рассасывающийся шовный материал Maxon™ и Maxon™ CV производится из полигликоната (кополимера гликолиевой кислоты и триметилен карбоната).
<b>Показания</b>	Синтетический рассасывающийся шовный материал Maxon™ и Maxon™ CV применяется для сопоставления тканей и/или для лигирования, включая использование в детской сердечно-сосудистой хирургии и в периферической сосудистой хирургии. Синтетический рассасывающийся шовный материал Maxon™ и Maxon™ CV не применяется во взрослой сердечно-сосудистой хирургии, офтальмохирургии, микрохирургии и на нервных тканях.
<b>Применение</b>	Синтетический рассасывающийся шовный материал Maxon™ и Maxon™ CV вызывает минимальную воспалительную реакцию в тканях, быстро инкапсулируется. Прогрессирующая потеря прочности и окончательное рассасывание шовного материала Maxon™ и Maxon™ CV происходит путем гидролиза.
<b>Срок поддержки раны</b>	Проведенные исследования в области подкожной имплантации шовного материала Maxon™ и Maxon™ CV определили, что примерно 80% прочности сохраняется после первой недели имплантации шовного материала. Приблизительно 75% прочности сохраняется в первые 2 недели, 65% прочности - в течение 3 недель, 50% прочности сохраняется по истечению 4 недель, 25% прочности остается на 6-ю неделю после имплантации шовного материала.
<b>Стерилизация</b>	Окись этилена.
<b>Рассасывание</b>	Процесс рассасывания заканчивается на 180 день.
<b>Упаковка</b>	<p>Стерильный шовный материал MAXON™ и MAXON™ CV производится различной длины, диаметра и с разным количеством в индивидуальной упаковке с иглами и без игл. Возможные варианты размеров от 1 USP (4 EP) до 7-0 USP (0.5 EP). Шовный материал MAXON™ и MAXON™ CV выпускается окрашенным в Зеленый D&amp;C цвет № 6. Шовный материал MAXON™ возможен в неокрашенном виде.</p> <p>Перед применением, пожалуйста, ознакомьтесь с Инструкцией из каждой индивидуальной упаковки. Внимательно изучите все показания, противопоказания, меры предосторожности и способы применения.</p>

Maxon™ - шовный материал, которому вы доверяете более 25 лет, улучшенный и эффективный.

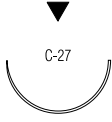
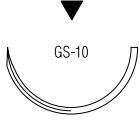
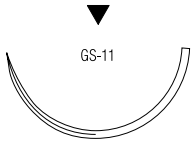
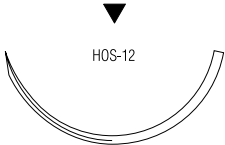
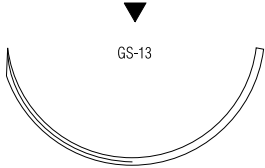
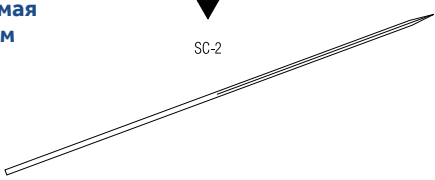
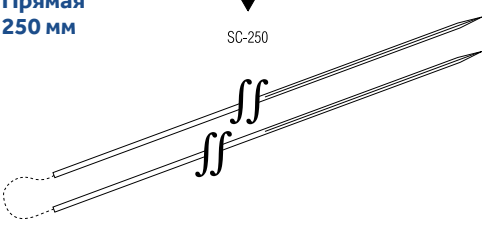
**ЛИГАТУРЫ / PRE-CUT**

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
	<b>3-0</b>	2	3x45	Зелёный	36		8886600741
	<b>2-0</b>	3	3x45	Зелёный	36		8886600751
	<b>0</b>	3.5	3x45	Зелёный	12		8886601563

**ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / REVERSE CUTTING**

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
<b>3/8 круга 12 мм</b> 	<b>5-0</b>	1	45	Зелёный	36		8886660521
	<b>4-0</b>	1.5	45	Зелёный	36		8886660531
<b>3/8 круга 16 мм</b> 	<b>4-0</b>	1.5	75	Неокрашенный	36		8886611831
<b>3/8 круга 19 мм</b> 	<b>5-0</b>	1	45	Неокрашенный	36		8886660821
	<b>4-0</b>	1.5	45	Неокрашенный	36		8886660831
	<b>4-0</b>	1.5	75	Неокрашенный	36		8886661231
	<b>4-0</b>	1.5	75	Зелёный	36		8886663931
	<b>3-0</b>	2	45	Неокрашенный	36		8886660841
	<b>3-0</b>	2	75	Зелёный	36		8886663941
<b>3/8 круга 24 мм</b> 	<b>4-0</b>	1.5	75	Неокрашенный	36		8886661831
	<b>3-0</b>	2	75	Неокрашенный	36		8886661841
	<b>3-0</b>	2	75	Зелёный	36		8886664141
	<b>2-0</b>	3	75	Неокрашенный	36		8886661851
	<b>2-0</b>	3	75	Зелёный	36		8886664151

**ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / REVERSE CUTTING**

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
<b>1/2 круга</b> <b>20 мм</b> 	3-0	2	45	Зелёный	36		8886605941
<b>1/2 круга</b> <b>26 мм</b> 	3-0	2	75	Неокрашенный	36		8886674441
	2-0	3	75	Зелёный	36		8886674551
	2-0	3	75	Неокрашенный	36		8886674451
<b>1/2 круга</b> <b>37 мм</b> 	2-0	3	75	Зелёный	36		8886675551
	0	3.5	75	Зелёный	36		8886675561
	1	4	75	Зелёный	36		8886675571
<b>1/2 круга</b> <b>40 мм</b> 	1	4	75	Зелёный	36		8886678771
<b>1/2 круга</b> <b>48 мм</b> 	1	4	90	Зелёный	36		8886676971
<b>Прямая</b> <b>60 мм</b> 	4-0	1.5	75	Неокрашенный	36		8886690831
	3-0	2	75	Неокрашенный	36		8886690841
<b>Прямая</b> <b>250 мм</b> 	2-0	3	75	Зелёный	12		8886639053

## КОСМЕТИЧЕСКАЯ ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / COSMETIC REVERSE CUTTING

Описание		Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
		USP	Метрик					
<b>3/8 круга 11 мм</b>		6-0	0.7	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™	8886653311
		6-0	0.7	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™	8886653211
		5-0	1	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™	8886653221
<b>3/8 круга 13 мм</b>		6-0	0.7	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SMM-5516
		5-0	1	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SMM-5526
		4-0	1.5	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SMM-5536
<b>3/8 круга 16 мм</b>		4-0	1.5	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SMM-5431
<b>1/2 круга 19 мм</b>		4-0	1.5	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SMM-5043
		3-0	2	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SMM-5044


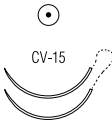


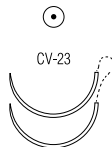
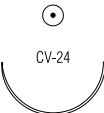
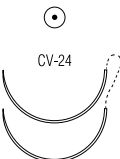
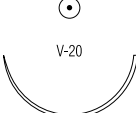
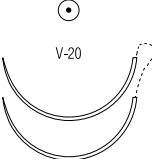
## ШПАТЕЛЬ/ SPATULA

Описание		Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
		USP	Метрик					
<b>3/8 круга 8 мм</b>		7-0	0.5	45	Зелёный	36		8886662801

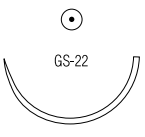
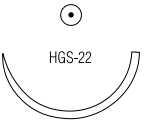
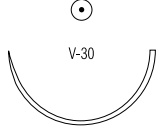
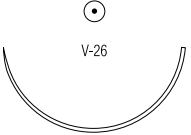
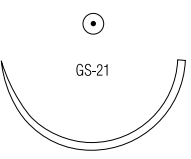
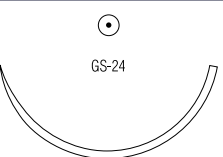

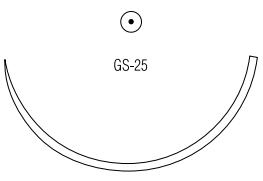
## КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание		Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
		USP	Метрик					
<b>3/8 круга 9 мм</b>		7-0	0.5	45	Зелёный	36	Maxon™ CV - Surgalloy™	8886614501
		7-0	0.5	60	Зелёный	36	Maxon™ CV - Surgalloy™	8886613901
		7-0	0.5	75	Зелёный	36	Maxon™ CV - Surgalloy™	8886612701
		6-0	0.7	75	Зелёный	36	Maxon™ CV - Surgalloy™	8886612711
<b>3/8 круга 13 мм</b>		6-0	0.7	75	Зелёный	36	Maxon™ CV - Surgalloy™	8886614811
<b>3/8 круга 13 мм</b>		6-0	0.7	75	Зелёный	36	Maxon™ CV - Surgalloy™	8886612411
		5-0	1	75	Зелёный	36	Maxon™ CV - Surgalloy™	8886612421

**КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT**

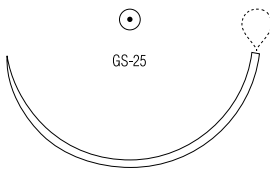
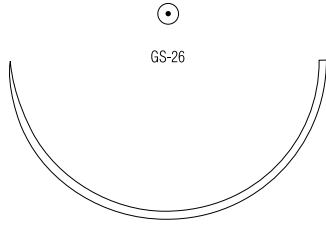
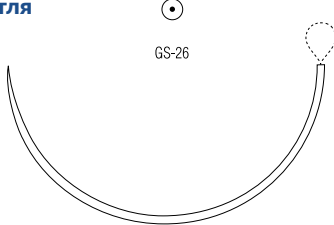
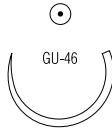
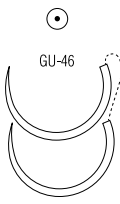
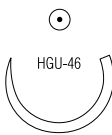
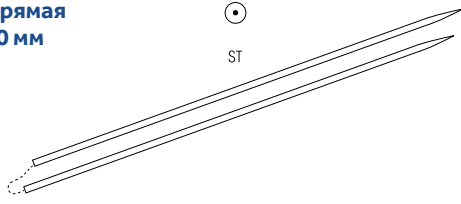
Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
<b>3/8 круга 17 мм</b> 	4-0	1.5	75	Зелёный	36	8886605731
<b>3/8 круга 17 мм</b> 	5-0	1	75	Зелёный	36	Maxon™ CV- Surgalloy™ 8886646221
	4-0	1.5	75	Зелёный	36	Maxon™ CV - Surgalloy™ 8886646231
<b>1/2 круга 13 мм</b> 	6-0	0.7	75	Зелёный	36	Surgalloy™ 8886621311
	5-0	1	75	Зелёный	36	Surgalloy™ 8886621321
<b>1/2 круга 17 мм</b> 	5-0	1	75	Зелёный	36	Surgalloy™ 8886620721
	4-0	1.5	75	Зелёный	36	Surgalloy™ 8886620731
	3-0	2	75	Зелёный	36	Surgalloy™ 8886620741
<b>1/2 круга 17 мм</b> 	5-0	1	75	Зелёный	36	Maxon™ CV - Surgalloy™ 8886614921
	4-0	1.5	90	Зелёный	36	Maxon™ CV- Surgalloy™ 8886613431
<b>1/2 круга 20 мм</b> 	5-0	1	75	Зелёный	36	8886621721
	4-0	1.5	75	Зелёный	36	8886621731
	3-0	2	75	Зелёный	36	8886621741
<b>1/2 круга 20 мм</b> 	4-0	1.5	90	Зелёный	36	8886622131
	3-0	2	90	Зелёный	36	8886603641
<b>1/2 круга 26 мм</b> 	4-0	1.5	75	Зелёный	36	Surgalloy™ 8886623331
	3-0	2	5x45	Зелёный	12	D-Tach™ 8886622943
	3-0	2	75	Зелёный	36	8886623341
	2-0	3	75	Зелёный	36	Surgalloy™ 8886623351
<b>1/2 круга 26 мм</b> 	4-0	1.5	90	Зелёный	36	Surgalloy™ 8886623531
	3-0	2	90	Зелёный	36	Surgalloy™ 8886623541

**КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT**

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
<b>1/2 круга 27 мм</b> 	2-0	3	75	Зелёный	36		8886624551
	0	3.5	75	Зелёный	36		8886624561
<b>1/2 круга 27 мм Н</b> 	0	3.5	75	Зелёный	36		8886624961
<b>1/2 круга 30 мм</b> 	4-0	1.5	75	Зелёный	36		8886626131
	3-0	2	75	Зелёный	36		8886626141
	2-0	3	75	Зелёный	36		8886626151
	0	3.5	75	Зелёный	36		8886626161
<b>1/2 круга 37 мм</b> 	3-0	2	75	Зелёный	36		8886625741
	2-0	3	75	Зелёный	36		8886625751
	0	3.5	75	Зелёный	36		8886625761
<b>1/2 круга 37 мм</b> 	2-0	3	75	Зелёный	36		8886626751
	0	3.5	75	Зелёный	36		8886626761
	0	3.5	90	Зелёный	36		8886626961
	1	4	75	Зелёный	36		8886626771
	1	4	90	Зелёный	36		8886626971
<b>1/2 круга 40 мм</b> 	2-0	3	90	Зелёный	36		8886628751
	0	3.5	75	Зелёный	36		8886628561
	0	3.5	90	Зелёный	36		8886628761
	1	4	75	Зелёный	36		8886628571
	1	4	90	Зелёный	36		8886628771
<b>1/2 круга, петля 40 мм</b> 	0	3.5	150	Зелёный	12	Петля	GMM-563L
	1	4	150	Зелёный	12	Петля	GMM-573L
<b>1/2 круга 48 мм</b> 	0	3.5	90	Зелёный	36		8886630761
	1	4	90	Зелёный	36		8886630771



## КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
<b>1/2 круга, петля 48 мм</b> 	0	3.5	150	Зелёный	12	Петля	GMM-634L
	1	4	150	Зелёный	12	Петля	GMM-632L
<b>1/2 круга 65 мм</b> 	0	3.5	150	Зелёный	24		8886631962
	1	4	150	Зелёный	24		8886631972
<b>1/2 круга, петля 65 мм</b> 	0	3.5	150	Зелёный	12	Петля	GMM-341L
	0	3.5	240	Зелёный	12	Петля	GMM-343L
	1	4	240	Зелёный	12	Петля	GMM-344L
<b>5/8 круга 27 мм</b> 	2-0	3	75	Зелёный	36		8886640351
<b>5/8 круга 27 мм</b> 	2-0	3	75	Зелёный	36		8886640451
<b>5/8 круга 27 мм</b> 	0	3.5	75	Зелёный	36		8886645661
	1	4	75	Зелёный	36		8886641971
<b>Прямая 60 мм</b> 	0	3.5	75	Зелёный	36		8886623761
	3-0	2	75	Зелёный	36		8886623741

## ТУПОКОНЕЧНАЯ КОЛЮЩАЯ / BLUNT POINT

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
<b>1/2 круга 48 мм</b> 	1	4	150	Зелёный	12	Нить 150 см, Петля 75 см	GMMT-90L

## КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ / TAPERCUTTING

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
<b>1/2 круга 37 мм</b> 	0	3.5	90	Зелёный	36		8886627761
<b>1/2 круга, петля 40мм</b> 	1	4	150	Зелёный	12	Нить 150 см, Петля 75 см	GMM-873L
<b>1/2 круга 48мм</b> 	1	4	90	Зелёный	36		8886629571
<b>1/2 круга, петля 48мм</b> 	0	3.5	150	Зелёный	12	Петля	GMM-806L
	1	4	150	Зелёный	12	Петля	GMM-807L

## МНОГОЦЕЛЕВАЯ / MULTIPURPOSE

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
<b>5/8 круга, петля 65 мм</b> 	0	3.5	150	Зелёный	12	Петля	GMM-496L
	1	4	180	Зелёный	12	Петля	GMM-497L



# SURGIPro™ II / SURGIPro™

Монофиламентный нерассасывающийся шовный материал  
из полипропилена

Удовлетворяет всем требованиям к полипропилену.

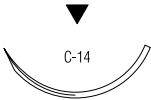
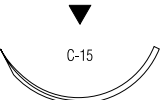


Surgipro™ / Surgipro™ II - шовный материал, которому вы доверяете много лет, улучшенный и эффективный.

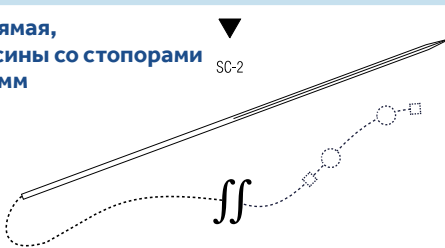
<b>Описание материала</b>	Инертный, нерассасывающийся окрашенный монофиламентный шовный материал Surgipro™ II / Surgipro™ изготовлен из изотактического кристаллизованного стереоизомера полипропилена и содержит полиэтилен.
<b>Показания</b>	Полипропиленовый шовный материал Surgipro™ II / Surgipro™ предназначен для сопоставления мягких тканей и/или для лигирования, применяется в сердечно-сосудистой хирургии, офтальмологии и нейрохирургии, общей и торакальной хирургии, пластической хирургии.
<b>Применение</b>	Полипропиленовый шовный материал Surgipro™ II / Surgipro™ вызывает минимальную реакцию в тканях, быстро инкапсулируется.
<b>Срок поддержки раны</b>	Полипропиленовый шовный материал Surgipro™ II / Surgipro™ не рассасывается и не имеет значительного изменения прочности in vivo.
<b>Стерилизация</b>	Окись этилена.
<b>Упаковка</b>	<p>Полипропиленовый шовный материал SURGIPRO™ II производится как в неокрашенном виде, так и окрашенном фталоцианином меди в синий цвет, размерами от 3-0 USP (2 EP) до 8-0 USP (0.4 EP).</p> <p>Полипропиленовый шовный материал SURGIPRO™ также производится как в неокрашенном виде, так и окрашенным фталоцианином меди в синий цвет, размерами от 10-0 USP (0.2 EP), 8-0 USP (0.4 EP) до 2 USP (5 EP). Стерильный шовный материал поставляется в отрезках, катушках, безыгольном исполнении или с различными видами игл, зафиксированными перманентно или отсоединяемыми. Формируется в коробках по 12, 24 и 36 шт.</p> <p>Полипропиленовый шовный материал SURGIPRO™ II возможен с PTFE (политетрафлуорэтиленовые) прокладками, которые располагаются между нитью и тканью для лучшего поддерживающего эффекта. Полипропиленовый шовный материал SURGIPRO™ также возможен в следующих вариантах поставки:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. С PTFE (политетрафлуорэтиленовыми) прокладками, которые располагаются между нитью и тканью для лучшего поддерживающего эффекта.</li> <li>2. С бусинами и стопорами для фиксации кончика нити при внутрикожном шве или для использования как подтягивающие нити.</li> </ol> <p>Перед применением, пожалуйста, ознакомьтесь с Инструкцией из каждой индивидуальной упаковки. Внимательно изучите все показания, противопоказания, меры предосторожности и способы применения.</p>

# Surgipro™ II / Surgipro™




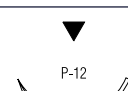
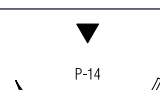
Surgipro™ / Surgipro™ II - шовный материал, которому вы доверяете много лет, улучшенный и эффективный.

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / REVERSE CUTTING								
Описание		Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
		USP	Метрик					
<b>3/8 круга 16 мм</b>		<b>6-0</b>	0.7	45	Синий	36		SP-660
		<b>6-0</b>	0.7	45	Синий	12		SP-660G
		<b>5-0</b>	1	45	Синий	12		SP-559G
		<b>4-0</b>	1.5	75	Синий	36		SP-631
<b>3/8 круга 19 мм</b>		<b>5-0</b>	1	45	Синий	36		SP-661
		<b>5-0</b>	1	45	Синий	12		SP-661G
		<b>4-0</b>	1.5	45	Синий	36		SP-683
		<b>4-0</b>	1.5	45	Синий	12		SP-683G
		<b>3-0</b>	2	45	Синий	36		SP-665
		<b>3-0</b>	2	45	Синий	12		SP-665G
<b>3/8 круга 24 мм</b>		<b>4-0</b>	1.5	45	Синий	36		SP-629
		<b>3-0</b>	2	45	Синий	36		SP-684
		<b>3-0</b>	2	45	Синий	12		SP-684G
<b>3/8 круга 26 мм</b>		<b>2-0</b>	3	45	Синий	36		SP-868
		<b>2-0</b>	3	75	Синий	36		SP-685
<b>3/8 круга 30 мм</b>		<b>4-0</b>	1.5	75	Синий	36		SP-670
		<b>3-0</b>	2	75	Синий	36		SP-675
<b>3/8 круга 39 мм</b>		<b>3-0</b>	2	75	Синий	36		SP-649
		<b>2-0</b>	3	75	Синий	36		SP-689
		<b>0</b>	3.5	75	Синий	36		SP-690
<b>1/2 круга 26 мм</b>		<b>2-0</b>	3	75	Синий	36		CP-443
<b>Прямая 60 мм</b>		<b>3-0</b>	2	75	Синий	36		SP-622
		<b>2-0</b>	3	75	Синий	36		SP-623

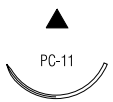
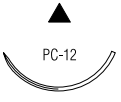
## ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / REVERSE CUTTING

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
<b>Прямая, бусины со стопорами 60 мм</b> 	<b>3-0</b>	2	75	Синий	24	2 бусины со стопорами	SP-622-BC
	<b>2-0</b>	3	75	Синий	24	2 бусины со стопорами	SP-623-BC

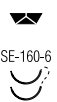
## КОСМЕТИЧЕСКАЯ ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / COSMETIC REVERSE CUTTING

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
<b>3/8 круга 11 мм</b> 	<b>7-0</b>	0.5	45	Синий	36	Surgalloy™	SP-1696
	<b>7-0</b>	0.5	45	Синий	12	Surgalloy™	SP-1696G
	<b>6-0</b>	0.7	45	Синий	36	Surgalloy™	SP-1697
	<b>6-0</b>	0.7	45	Синий	12	Surgalloy™	SP-5697G
	<b>6-0</b>	0.7	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SP-1606
<b>3/8 круга 13 мм</b> 	<b>6-0</b>	0.7	45	Синий	36	Surgalloy™	SP-5695
	<b>5-0</b>	1	45	Синий	36	Surgalloy™	SP-5698
	<b>4-0</b>	1.5	45	Синий	36	Surgalloy™	SP-5699
<b>3/8 круга 16 мм</b> 	<b>6-0</b>	0.7	45	Синий	12	Surgalloy™	SP-5680G
	<b>5-0</b>	1	45	Синий	36	Surgalloy™	SP-5681
	<b>5-0</b>	1	45	Синий	12	Surgalloy™	SP-5681G
	<b>4-0</b>	1.5	45	Синий	12	Surgalloy™	SP-5692G
	<b>3-0</b>	2	45	Синий	12	Surgalloy™	SP-1693G
<b>3/8 круга 19 мм</b> 	<b>5-0</b>	1	45	Синий	36	Surgalloy™	SP-5686
	<b>4-0</b>	1.5	45	Синий	36	Surgalloy™	SP-5682
	<b>4-0</b>	1.5	45	Синий	12	Surgalloy™	SP-5682G
	<b>3-0</b>	2	45	Синий	36	Surgalloy™	SP-5687
	<b>3-0</b>	2	45	Синий	12	Surgalloy™	SP-5687G
<b>3/8 круга 24 мм</b> 	<b>3-0</b>	2	45	Синий	36	Surgalloy™	SP-5663



## КОСМЕТИЧЕСКАЯ РЕЖУЩАЯ / COSMETIC CONVENTIONAL CUTTING

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
<b>3/8 круга 16 мм</b> 	<b>5-0</b>	1	45	Синий	36	Surgalloy™	SP-1635
	<b>4-0</b>	1.5	45	Синий	36		SP-1634
<b>3/8 круга 19 мм</b> 	<b>4-0</b>	1.5	45	Синий	36		SP-1644

## ПРЕМИУМ ШПАТЕЛЬ / PREMIUM SPATULA


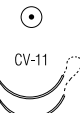


Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
<b>1/2 круга 5.5 мм</b> 	<b>10-0</b>	0.2	30	Синий	12	Surgalloy™	P-2756K

## КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT




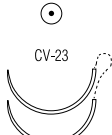
Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
<b>3/8 круга 9 мм</b> 	<b>7-0</b>	0.5	60	Синий	36	Surgalloy™ Optimis™	VP-72-X
	<b>7-0</b>	0.5	60	Синий	36	Surgalloy™	VP-702-X
	<b>7-0</b>	0.5	5x60	Синий	12	Surgalloy™ Optimis™	VP-72-MX
	<b>7-0</b>	0.5	5x60	Синий	12	Surgalloy™	VP-702-MX
	<b>7-0</b>	0.5	75	Синий	36	Surgalloy™	VP-713-X
	<b>7-0</b>	0.5	5x75	Синий	12	Surgalloy™	VP-713-MX
	<b>6-0</b>	0.7	45	Синий	36	Surgalloy™	VP-746-X
	<b>6-0</b>	0.7	60	Синий	36	Surgalloy™ Optimis™	VP-73-X
	<b>6-0</b>	0.7	60	Синий	36	Surgalloy™	VP-703-X
	<b>6-0</b>	0.7	75	Синий	36	Surgalloy™	VP-709-X
<b>3/8 круга 9 мм</b> 	<b>7-0</b>	0.5	60	Синий	36	Surgalloy™	VPF-702-X
	<b>7-0</b>	0.5	75	Синий	36	Surgalloy™	VPF-713-X
	<b>6-0</b>	0.7	75	Синий	36	Surgalloy™	VPF-709-X



## КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа		
							USP	Метрик
<b>3/8 круга 11 мм</b> 	<b>6-0</b>	0.7	60	Синий	36	Surgalloy™ Optimis™	VP-74-X	
	<b>6-0</b>	0.7	75	Синий	36	Surgalloy™	VP-776-X	
<b>3/8 круга 13 мм</b> 	<b>6-0</b>	0.7	75	Синий	36	Surgalloy™	VP-889-X	
	<b>5-0</b>	1	75	Синий	36	Surgalloy™	VP-890-X	
<b>3/8 круга 13 мм</b> 	<b>7-0</b>	0.5	60	Синий	36	Surgalloy™	VP-727-X	
	<b>6-0</b>	0.7	60	Синий	36	Surgalloy™	VP-726-X	
	<b>6-0</b>	0.7	5x60	Синий	12	Surgalloy™	VP-726-MX	
	<b>6-0</b>	0.7	75	Синий	36	Surgalloy™ Optimis™	VP-76-X	
	<b>6-0</b>	0.7	75	Синий	36	Surgalloy™	VP-706-X	
	<b>5-0</b>	1	60	Синий	36	Surgalloy™ Optimis™	VP-75-X	
	<b>5-0</b>	1	60	Синий	36	Surgalloy™	VP-725-X	
	<b>5-0</b>	1	75	Синий	36	Surgalloy™	VP-705-X	
	<b>5-0</b>	1	5x75	Синий	12	Surgalloy™	VP-705-MX	
	<b>5-0</b>	1	90	Синий	36	Surgalloy™ Optimis™	VP-70-X	
	<b>5-0</b>	1	90	Синий	36	Surgalloy™	VP-720-X	
	<b>4-0</b>	1.5	75	Синий	36	Surgalloy™	VP-813-X	
	<b>3/8 круга 13 мм</b> 	<b>6-0</b>	0.7	75	Синий	36	Surgalloy™	VPF-706-X
<b>3/8 круга 17 мм</b> 	<b>4-0</b>	1.5	75	Синий	36	Surgalloy™	VP-881-X	
<b>3/8 круга 17 мм</b> 	<b>5-0</b>	1	90	Синий	36	Surgalloy™	VP-580-X	
	<b>4-0</b>	1.5	90	Синий	36	Surgalloy™	VP-581-X	
	<b>4-0</b>	1.5	90	Синий	36	Surgalloy™ Прокладки 3X7 мм жёсткие	VP-582-X	
	<b>3-0</b>	2	90	Синий	36	Surgalloy™	VP-585-X	
<b>3/8 круга 22 мм</b> 	<b>4-0</b>	1.5	75	Синий	36	Surgalloy™	VP-841-X	
	<b>4-0</b>	1.5	90	Синий	36	Surgalloy™	VP-851-X	
	<b>3-0</b>	2	90	Синий	36	Surgalloy™	VP-532-X	
	<b>2-0</b>	3	90	Синий	36	Surgalloy™	VP-533	


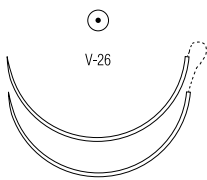
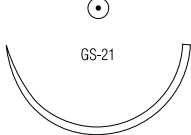

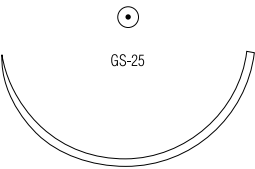
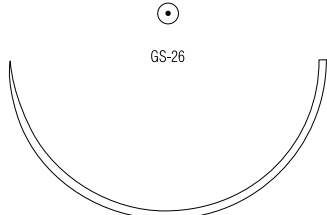
## КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа	
							USP
<b>1/2 круга 10 мм</b> 	<b>6-0</b>	0.7	60	Синий	36	Surgalloy™	VP-754-X
	<b>5-0</b>	1	60	Синий	36	Surgalloy™	VP-755-X
<b>1/2 круга 13 мм</b> 	<b>6-0</b>	0.7	60	Синий	36	Surgalloy™	VP-711-X
	<b>6-0</b>	0.7	75	Синий	36	Surgalloy™	VP-733-X
	<b>5-0</b>	1	45	Синий	36	Surgalloy™	VP-715-X
	<b>5-0</b>	1	60	Синий	36	Surgalloy™	VP-205-X
	<b>5-0</b>	1	75	Синий	36	Surgalloy™	VP-710-X
	<b>4-0</b>	1.5	60	Синий	36	Surgalloy™	VP-204-X
<b>1/2 круга 13 мм</b> 	<b>5-0</b>	1	90	Синий	36	Surgalloy™	VPF-711-X
<b>1/2 круга 17 мм</b> 	<b>5-0</b>	1	75	Синий	36	Surgalloy™	VP-870-X
	<b>4-0</b>	1.5	75	Синий	36	Surgalloy™	VP-871-X
	<b>3-0</b>	2	75	Синий	36	Surgalloy™	VP-872-X
<b>1/2 круга 17 мм</b> 	<b>6-0</b>	0.7	90	Синий	36	Surgalloy™	VP-555-X
	<b>5-0</b>	1	60	Синий	36	Surgalloy™	VP-566-X
	<b>5-0</b>	1	90	Синий	36	Surgalloy™	VP-660-X
	<b>5-0</b>	1	90	Синий	36	Surgalloy™	VP-556-X
	<b>5-0</b>	1	5x90	Синий	12	Surgalloy™	VP-556-MX
	<b>4-0</b>	1.5	45	Синий	36	Surgalloy™	VP-757-X
	<b>4-0</b>	1.5	90	Синий	36	Surgalloy™	VP-557-X
	<b>3-0</b>	2	90	Синий	36	Surgalloy™	VP-558-X
<b>1/2 круга 17 мм</b> 	<b>4-0</b>	1.5	90	Синий	36	Surgalloy™	VPF-557-X
<b>1/2 круга 20 мм</b> 	<b>4-0</b>	1.5	90	Синий	36	Surgalloy™	VP-331-X

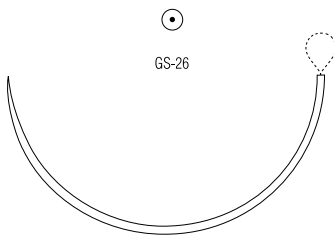
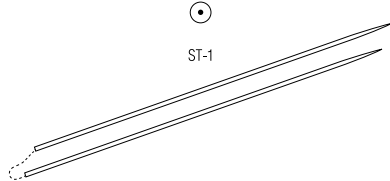
## КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
<b>1/2 круга</b> <b>22 мм</b> 	<b>4-0</b>	1.5	75	Синий	36	Surgalloy™	VP-771-X
<b>1/2 круга</b> <b>22 мм</b> 	<b>4-0</b>	1.5	90	Синий	36	Surgalloy™	VP-761-X
	<b>3-0</b>	2	75	Синий	36	Surgalloy™	VP-760-X
	<b>3-0</b>	3	90	Синий	36	Surgalloy™	VP-762-X
<b>1/2 круга</b> <b>26 мм</b> 	<b>4-0</b>	1.5	75	Синий	36	Surgalloy™	VP-831-X
	<b>3-0</b>	2	75	Синий	36	Surgalloy™	VP-832-X
	<b>2-0</b>	3	75	Синий	36	Surgalloy™	VP-833
	<b>0</b>	3.5	75	Синий	36	Surgalloy™	VP-834
<b>1/2 круга</b> <b>26 мм</b> 	<b>5-0</b>	1	75	Синий	36	Surgalloy™	VP-510-X
	<b>5-0</b>	1	90	Синий	36	Surgalloy™	VP-520-X
	<b>4-0</b>	1.5	75	Синий	36	Surgalloy™	VP-511-X
	<b>4-0</b>	1.5	90	Синий	36	Surgalloy™	VP-521-X
	<b>4-0</b>	1.5	90	Синий	36	Surgalloy™ Прокладки 3X7 мм жёсткие	VP-421-X
	<b>3-0</b>	2	90	Синий	36	Surgalloy™	VP-522-X
	<b>3-0</b>	2	120	Синий	36	Surgalloy™	VP-542-X
	<b>2-0</b>	3	90	Синий	36	Surgalloy™	VP-523
	<b>2-0</b>	3	120	Синий	36	Surgalloy™	VP-543
<b>1/2 круга</b> <b>26 мм</b> 	<b>2-0</b>	3	120	Синий	36	Surgalloy™	VP-151
<b>1/2 круга</b> <b>26 мм</b> 	<b>3-0</b>	2	90	Синий	36	Surgalloy™	VPF-522-X
	<b>2-0</b>	3	120	Синий	36	Surgalloy™	VPF-543
<b>1/2 круга</b> <b>27 мм</b> 	<b>2-0</b>	3	75	Синий	36		CP-411
	<b>0</b>	3.5	75	Синий	36		CP-412

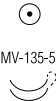
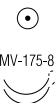
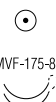
## КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
<b>1/2 круга 27 мм Н</b> 	<b>0</b>	3.5	75	Синий	36		CP-414
	<b>1</b>	4	90	Синий	36		CP-415
<b>1/2 круга 30 мм</b> 	<b>2-0</b>	3	75	Синий	36		VP-945
<b>1/2 круга 37 мм</b> 	<b>3-0</b>	2	90	Синий	36		VP-842-X
	<b>2-0</b>	3	90	Синий	36		VP-843
	<b>2-0</b>	3	120	Синий	36		VP-853
<b>1/2 круга 37 мм</b> 	<b>2-0</b>	3	75	Синий	36		CP-423
	<b>0</b>	3.5	75	Синий	36		CP-424
	<b>1</b>	4	75	Синий	36		CP-425
<b>1/2 круга 40 мм</b> 	<b>2-0</b>	3	75	Синий	36		CP-433
	<b>0</b>	3.5	75	Синий	36		CP-434
	<b>1</b>	4	75	Синий	36		CP-435
	<b>1</b>	4	100	Синий	36		CP-535
<b>1/2 круга 48 мм</b> 	<b>1</b>	4	75	Синий	36		CP-455
<b>1/2 круга 65 мм</b> 	<b>1</b>	4	150	Синий	24		CP-824
	<b>2</b>	5	150	Синий	24		CP-825



## КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
<b>1/2 круга</b> <b>65 мм</b> 	<b>1</b>	4	120	Синий	24	Нить 120 см, Петля 60 см	CP-824-L
	<b>1</b>	4	240	Синий	24	Нить 240 см, Петля 120 см	CP-834-L
<b>Прямая</b> <b>51 мм</b> 	<b>2-0</b>	3	90	Синий	36		GP-282

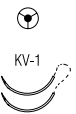

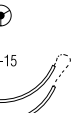
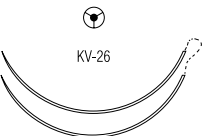

## МИКРОХИРУРГИЧЕСКАЯ КОЛЮЩАЯ / MICROSURGERY TAPER POINT

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
<b>3/8 круга</b> <b>6 мм</b> 	<b>8-0</b>	0.4	45	Синий	36	Surgalloy™	VP-900-X
	<b>8-0</b>	0.4	2x45	Синий	12	Surgalloy™	VP-900-MX
	<b>8-0</b>	0.4	60	Синий	36	Surgalloy™	VP-902-X
	<b>8-0</b>	0.4	2x60	Синий	12	Surgalloy™	VP-902-MX
	<b>8-0</b>	0.4	75	Синий	12	Surgalloy™	VP-973-X
	<b>7-0</b>	0.5	60	Синий	36	Surgalloy™	VP-904-X
<b>3/8 круга</b> <b>8 мм</b> 	<b>8-0</b>	0.4	45	Синий	36	Surgalloy™	VP-744-X
	<b>8-0</b>	0.4	2x45	Синий	12	Surgalloy™	VP-744-MX
	<b>8-0</b>	0.4	60	Синий	36	Surgalloy™	VP-745-X
	<b>7-0</b>	0.5	60	Синий	36	Surgalloy™	VP-735-X
	<b>7-0</b>	0.5	2x60	Синий	12	Surgalloy™	VP-737-MX
	<b>7-0</b>	0.5	75	Синий	36	Surgalloy™	VP-747-X
<b>3/8 круга</b> <b>8 мм</b> 	<b>7-0</b>	0.5	60	Синий	36	Surgalloy™	VPF-735-X

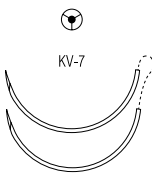
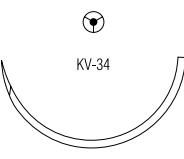
## МИКРОХИРУРГИЧЕСКАЯ КОЛЮЩАЯ / MICROSURGERY TAPER POINT

Описание		Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
		USP	Метрик					
<b>3/8 круга 8 мм</b>		<b>8-0</b>	0.4	60	Синий	36	Cardiopoint™	VP-738-X
		<b>8-0</b>	0.4	2x60	Синий	12	Cardiopoint™	VP-738-MX
		<b>7-0</b>	0.5	60	Синий	36	Cardiopoint™	VP-630-X
		<b>6-0</b>	0.7	60	Синий	36	Cardiopoint™	VP-631-X
<b>3/8 круга 10 мм</b>		<b>7-0</b>	0.5	75	Синий	36	Surgalloy™	VP-875-X
		<b>8-0</b>	0.4	60	Синий	36	Surgalloy™	VP-763-X

## КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ / TAPER CUTTING

Описание		Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
		USP	Метрик					
<b>3/8 круга 9 мм</b>		<b>7-0</b>	0.5	60	Синий	36	Surgalloy™	VP-704-X
		<b>6-0</b>	0.7	60	Синий	36	Surgalloy™	VP-712-X
<b>3/8 круга 13 мм</b>		<b>6-0</b>	0.7	75	Синий	36	Surgalloy™	VP-728-X
		<b>5-0</b>	1	75	Синий	36	Surgalloy™	VP-708-X
<b>3/8 круга 17 мм</b>		<b>5-0</b>	1	75	Синий	36	Surgalloy™	VP-914-X
		<b>4-0</b>	1.5	90	Синий	36	Surgalloy™	VP-925-X
		<b>3-0</b>	2	90	Синий	36	Surgalloy™	VP-926-X
<b>3/8 круга 26 мм</b>		<b>3-0</b>	2	90	Синий	36	Surgalloy™	VP-956
<b>1/2 круга 17 мм</b>		<b>5-0</b>	1	90	Синий	36	Surgalloy™	VP-934-X
		<b>4-0</b>	1.5	90	Синий	36	Surgalloy™	VP-935-X
		<b>3-0</b>	2	90	Синий	36	Surgalloy™	VP-936-X

## КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ / TAPER CUTTING

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
<b>1/2 круга 26 мм</b> 	<b>4-0</b>	1.5	90	Синий	36	Surgalloy™	VP-975-X
	<b>3-0</b>	2	90	Синий	36	Surgalloy™	VP-976-X
	<b>2-0</b>	3	90	Синий	36	Surgalloy™	VP-977
	<b>0</b>	3.5	90	Синий	36	Surgalloy™	VP-978
<b>1/2 круга 37 мм</b> 	<b>0</b>	3.5	75	Синий	36		CP-844

# TI-CRON™ / SURGIDAC™

Плетёный и монофиламентный нерассасывающийся  
покрытый и непокрытый шовный материал из полиэстера

Шовный материал, которому Вы доверяете свыше 35 лет.





<b>Описание материала</b>	<p>Нерассасывающийся, стерильный шовный материал из полиэстера Ti-Cron™ / Surgidac™ изготавливается из полиэтилена терефталата. Шовный материал состоит из волокон полиэстера с высоким молекулярным весом, длинными линейными цепочками с ароматическими кольцами в качестве связующего звена.</p> <p>Плетёный шовный материал Ti-Cron™ выпускается как непокрытым, так и пропитанным силиконом для увеличения скольжения поверхности, тем самым улучшая манипуляционные свойства, прохождение через ткани и опускание узла.</p> <p>Монофиламентные нити Surgidac™ не покрыты, а плетёные доступны в непокрытом варианте, а также покрытом полибутиленом адипатом.</p>
<b>Показания</b>	Шовный материал Ti-Cron™ / Surgidac™ из полиэстера предназначен для сопоставления тканей и/или для лигирования, применения в общей, торакальной, сердечно-сосудистой хирургии, офтальмологии, ортопедии и нейрохирургии.
<b>Применение</b>	Шовный материал из полиэстера Ti-Cron™ / Surgidac™ вызывает минимальную реакцию в тканях, быстро инкапсулируется.
<b>Срок поддержки раны</b>	Нерассасывающийся шовный материал Ti-Cron™ / Surgidac™ не меняет прочности in vivo.
<b>Стерилизация</b>	Шовный материал Ti-Cron™ / Surgidac™ размером 6-0 и менее или с прокладками стерилизуется окисью этилена. Размер 5-0 и более стерилизуется путем гамма облучения.
<b>Упаковка</b>	<p>Плетёный шовный материал Ti-Cron™ возможен как в неокрашенном (белом) виде, так и окрашенном в синий D&amp;C цвет No. 6, покрытый или не покрытый, размерами от 5 USP (7 EP) до 6-0 (0.7 EP). Стерильный шовный материал поставляется в отрезках различной длины и катушках, безыгольном исполнении или с различными видами игл, зафиксированными перманентно или отсоединяемыми. Формируется в коробках по 12, 24 и 36 шт.</p> <p>Шовный материал из полиэстера Ti-Cron™ выпускается со специальными PTFE (политетрафлуорэтиленовые) прокладками между нитью и тканью для лучшего поддерживающего эффекта.</p> <p>Перед применением, пожалуйста, ознакомьтесь с Инструкцией из каждой индивидуальной упаковки. Внимательно изучите все показания, противопоказания, меры предосторожности и способы применения.</p>

# Ti-Cron™ / Surgidac™

Ti-Cron™ / Surgidac™ - шовный материал, которому вы доверяете более 35 лет, имеющий доказанную временем эффективность.

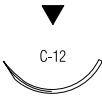
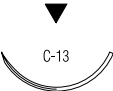
## ЛИГАТУРЫ/ PRE-CUT

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
	5-0	1	12x45	Синий	36		88863008-21
	4-0	1.5	12x75	Синий	24		88863003-32
	3-0	2	12x75	Синий	24		88863003-42
	2-0	3	12x45	Синий	36		88863008-51
	2-0	3	12x75	Синий	24		88863003-52
	0	3.5	6x75	Синий	24		88863002-62
	1	4	6x45	Синий	24		88863001-72

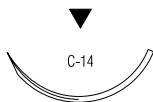
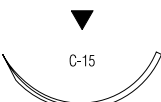
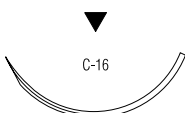
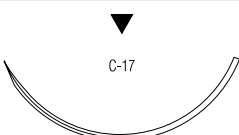
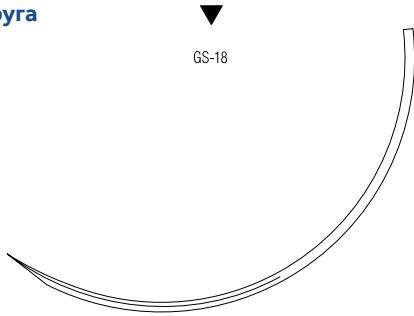
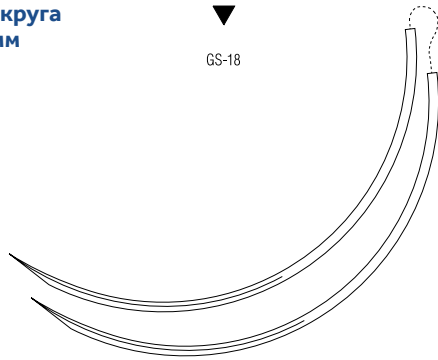
## КАТУШКИ / REEL

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
	2-0	3	250	Синий	24		88863380-52
	0	3.5	250	Синий	24		88863380-62
	1	4	250	Синий	24		88863380-72
	2	5	250	Синий	24		88863380-82
	4	6	150	Синий	24		88863381-09
	5	7	150	Синий	24		88863381-89

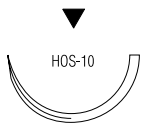
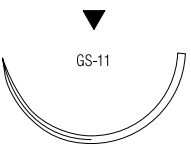
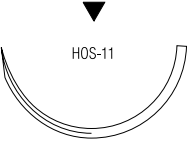

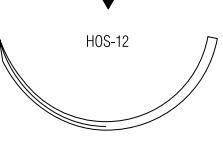
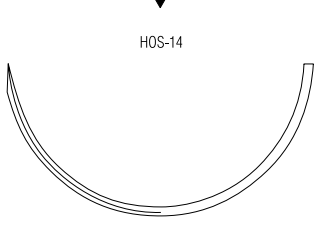
## ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / REVERSE CUTTING

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
<b>3/8 круга 16 мм</b> 	4-0	1.5	75	Синий	36		88863046-31
<b>3/8 круга 19 мм</b> 	4-0	1.5	45	Синий	36		88863047-31
	3-0	2	45	Синий	36		88863047-41
	3-0	2	75	Синий	36		88863055-41
	2-0	3	75	Синий	36		88863048-51

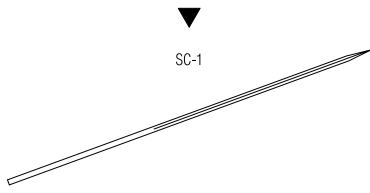
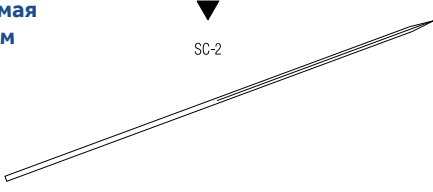
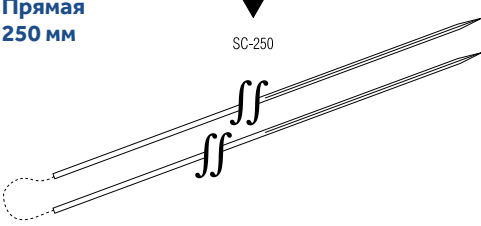
**ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / REVERSE CUTTING**

Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
<b>3/8 круга 24 мм</b> 	<b>3-0</b>	2	75	Синий	36	88863050-41
	<b>2-0</b>	3	75	Синий	36	88863050-51
	<b>0</b>	3.5	75	Синий	36	88863050-61
	<b>0</b>	3.5	90	Синий	36	88863065-61
<b>3/8 круга 26 мм</b> 	<b>2-0</b>	3	75	Синий	36	88863070-51
<b>3/8 круга 30 мм</b> 	<b>2-0</b>	3	75	Синий	36	88863023-51
	<b>0</b>	3.5	75	Синий	36	88863023-61
	<b>0</b>	3.5	90	Синий	36	88863012-61
	<b>1</b>	4	75	Синий	36	88863023-71
<b>3/8 круга 39 мм</b> 	<b>2-0</b>	3	75	Синий	36	88863054-51
	<b>0</b>	3.5	75	Синий	36	88863054-61
	<b>1</b>	4	75	Синий	36	88863054-71
	<b>2</b>	5	75	Синий	36	88863054-81
<b>3/8 круга 77 мм</b> 	<b>5</b>	7	45	Синий	12	88863056-89
<b>3/8 круга 77 мм</b> 	<b>2</b>	5	75	Синий	24	88863128-82


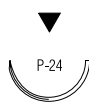
**ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / REVERSE CUTTING**

Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
<b>1/2 круга 26 мм</b> 	2-0	3	75	Синий	36	88863395-51
	0	3.5	75	Синий	36	88863395-61
	1	4	75	Синий	36	88863395-71
	2	5	75	Синий	36	88863395-81
<b>1/2 круга 37 мм</b> 	2-0	3	75	Синий	36	88863309-51
	1	4	75	Синий	36	88863309-71
	4	6	75	Синий	36	88863154-09
<b>1/2 круга 37 мм</b> 	1	4	75	Синий	36	88863028-71
<b>1/2 круга 40 мм</b> 	2	5	75	Синий	36	88863155-81
<b>1/2 круга 40 мм</b> 	1	4	75	Синий	36	88863026-71
	2	5	75	Синий	36	88863026-81
<b>1/2 круга 57 мм</b> 	5	7	75	Синий	36	88863027-79


## ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / REVERSE CUTTING

Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
<b>Прямая 51 мм</b>  SC-1	2-0	3	75	Синий	36	88863163-51
	1	4	75	Синий	36	88863163-71
<b>Прямая 60 мм</b>  SC-2	3-0	2	75	Синий	36	88863062-41
	2-0	3	75	Синий	36	88863062-51
<b>Прямая 250 мм</b>  SC-250	2-0	3	75	Синий	12	88862947-53

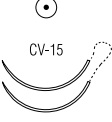
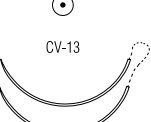
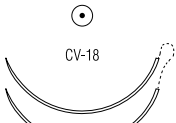


## КОСМЕТИЧЕСКАЯ ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / COSMETIC REVERSE CUTTING

Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
<b>3/8 круга 13 мм</b>  P-13	5-0	1	45	Белый	12	Surgalloy™
	4-0	1.5	45	Белый	12	Surgalloy™
<b>1/2 круга 16 мм</b>  P-24	2-0	3	45	Синий	12	Surgalloy™


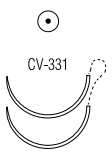
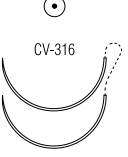
## ШПАТЕЛЬ / SPATULA

Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
<b>1/4 круга 8.6 мм</b>  SS-24	6-0	0.7	45	Белый	12	CD-3113-K
	5-0	1	45	Белый	12	CD-3123-K


## КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа	
							USP
<b>3/8 круга 13 мм</b> 	6-0	0.7	75	Синий	36	Cardiopoint™	88863280-11
	5-0	1	75	Синий	36	Cardiopoint™	88863280-21
	5-0	1	75	Белый	36	Cardiopoint™	88862801-21
	4-0	1.5	75	Синий	36	Cardiopoint™	88863280-31
	4-0	1.5	75	Синий	36	Cardiopoint™ Прокладки 3x3 мм жёсткие	88863314-31
	3-0	2	75	Синий	36	Cardiopoint™	88863280-41
<b>3/8 круга 16 мм</b> 	4-0	1.5	75	Синий	36	Cardiopoint™	88863229-31
	3-0	2	75	Синий	36	Cardiopoint™	88863229-41
<b>3/8 круга 17 мм</b> 	2-0	3	90	Белый	6	Surgalloy™	88862636-56
<b>3/8 круга 18 мм</b> 	5-0	1	75	Синий	36	Cardiopoint™	88862775-21
	4-0	1.5	75	Синий	36	Cardiopoint™	88862775-31
	3-0	2	75	Синий	36	Cardiopoint™	88862775-41
<b>3/8 круга 22 мм</b> 	3-0	2	90	Синий	36	Surgalloy™	88862627-41
<b>3/8 круга 26 мм</b> 	2-0	3	10x90	Синий / белый	6		88863230-56
<b>1/2 круга 10 мм</b> 	5-0	1	90	Синий	36	Cardiopoint™	88863139-21
	5-0	1	90	Синий	36	Cardiopoint™ Прокладки 3x3 мм жёсткие	88863297-21
<b>1/2 круга 13 мм</b> 	5-0	1	60	Синий	36	Cardiopoint™	8886322621
	4-0	1.5	60	Синий	36	Cardiopoint™	8886322631
	4-0	1.5	90	Синий	36	Cardiopoint™	8886324931
	3-0	2	45	Синий	36	Cardiopoint™ Прокладки 3x3 мм жёсткие	8886329541

## КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT


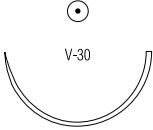
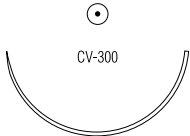
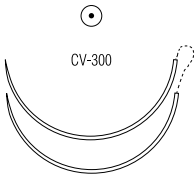
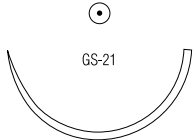
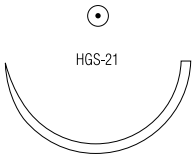

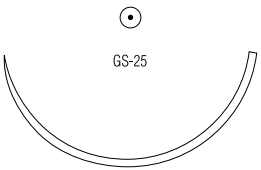
Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа		
							USP	Метрик
<b>1/2 круга 16 мм</b> 	5-0	1	75	Синий	36	Cardioint™	88863186-21	
	4-0	1.5	75	Синий	36	Cardioint™	88863186-31	
	3-0	2	75	Синий	36	Cardioint™	88863186-41	
	2-0	3	75	Синий	36	Cardioint™	88863186-51	
<b>1/2 круга 16 мм</b> 	5-0	1	90	Синий	36	Cardioint™	88863271-21	
	4-0	1.5	75	Синий	36	Cardioint™	88863087-31	
	4-0	1.5	90	Синий	36	Cardioint™	88863271-31	
	3-0	2	75	Синий	36	Cardioint™	88863087-41	
	3-0	2	10x75	Синий	6	Cardioint™	88863084-46	
	3-0	2	90	Синий	36	Cardioint™	88863271-41	
	2-0	3	75	Синий	36	Cardioint™	88863087-51	
	2-0	3	8x75	Синий / Белый	6	Cardioint™	88863083-56	
	2-0	3	8x75	Синий / Белый	6	Cardioint™ Прокладки 3x3 мм жёсткие	88863086-56	
	2-0	3	8x75	Синий / Белый	6	Cardioint™ Прокладки 3x6 мм жёсткие овал	VCD20331FE	
	2-0	3	8x75	Синий / Белый	6	Cardioint™ Прокладки 3x7 мм жёсткие	88863091-56	
	2-0	3	10x90	Синий / Белый	6	Cardioint™ Прокладки 3x7 мм жёсткие	88863269-56	
<b>1/2 круга 20 мм</b> 	4-0	1.5	90	Синий	36	Cardioint™	88863369-31	
	3-0	2	75	Синий	36	Cardioint™	88863227-41	
	3-0	2	90	Синий	36	Cardioint™	88863369-41	
	2-0	3	75	Синий	36	Cardioint™	88863227-51	
	2-0	3	75	Синий	36	Cardioint™ Прокладки 3x6 мм жёсткие овал	VCD20316FE	
	2-0	3	75	Синий	36	Cardioint™ Прокладки 3x6 мм мягкие овал	VCD20316SE	
	2-0	3	8x75	Синий / Белый	6	Cardioint™ Прокладки 3x6 мм жёсткие овал	VCD20316MFE	
	2-0	3	8x75	Синий / Белый	6	Cardioint™ Прокладки 3x6 мм мягкие овал	VCD20316MSE	
	2-0	3	10x75	Синий / Белый	6	Cardioint™	88863385-56	
	2-0	3	10x75	Синий / Белый	6	Cardioint™ Прокладки 3x3 мм жёсткие	88863277-56	
	2-0	3	10x75	Синий / Белый	6	Cardioint™ Прокладки 3x7 мм жёсткие	88863323-56	
	2-0	3	90	Синий	36	Cardioint™	88863369-51	
	2-0	3	90	Белый	36	Cardioint™	88862839-51	

## КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

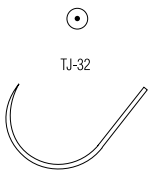
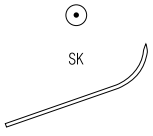
Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
<b>1/2 круга</b> <b>20 мм</b> 	<b>3-0</b>	2	5x45	Синий	24	D-Tach™	88863267-42
<b>1/2 круга</b> <b>22 мм</b> 	<b>0</b>	3.5	5x45	Синий	24	D-Tach™	88863257-62
<b>1/2 круга</b> <b>25 мм</b> 	<b>4-0</b>	1.5	75	Синий	36	Cardioint™	88863185-31
	<b>3-0</b>	2	75	Синий	36	Cardioint™	88863185-41
	<b>2-0</b>	3	75	Синий	36	Cardioint™	88863185-51
	<b>0</b>	3.5	75	Синий	36	Cardioint™	88863185-61
	<b>1</b>	4	75	Синий	36	Cardioint™	88863185-71
<b>1/2 круга</b> <b>25 мм</b> 	<b>4-0</b>	1.5	90	Синий	36	Cardioint™	88863256-31
	<b>3-0</b>	2	90	Синий	36	Cardioint™	88863256-41
	<b>2-0</b>	3	8x75	Синий / Белый	6	Cardioint™ Прокл. 3x6 мм жёсткие овал	VCD20305MFE
	<b>2-0</b>	3	75	Синий	36	Cardioint™ Прокл. 3x6 мм жёсткие овал	VCD20305FE
	<b>2-0</b>	3	75	Синий	36	Cardioint™ Прокл. 3x6 мм мягкие овал	VCD20305SE
	<b>2-0</b>	3	75	Синий / Белый	6	Cardioint™ Прокл. 3x6 мм мягкие овал	VCD20305MSE
	<b>2-0</b>	3	75	Синий / Белый	6	Cardioint™ Прокл. 4.5x6 мм жёсткие овал	VCD2030556MFE
	<b>2-0</b>	3	75	Синий / Белый	6	Cardioint™ Прокл. 4.5x6 мм мягкие овал	VCD2030556MSE
	<b>2-0</b>	3	10x75	Синий / Белый	6	Cardioint™	88863356-56
	<b>2-0</b>	3	10x75	Синий / Белый	6	Cardioint™ Прокладки 3x7 мм жёсткие	88863324-56
	<b>2-0</b>	3	8x90	Синий / Белый	6	Cardioint™ Прокл. 3x6 мм жёсткие овал	VCD2036305FE
	<b>2-0</b>	3	90	Синий	36	Cardioint™	88863256-51
	<b>2-0</b>	3	90	Синий	36	Cardioint™ Прокладки 3x7 мм жёсткие	88863336-51
	<b>2-0</b>	3	10x90	Синий / Белый	6	Cardioint™	88862981-56
	<b>2-0</b>	3	6x90	Синий / Белый	6	Cardioint™ Прокладки 3x7 мм жёсткие	88863306-56
	<b>0</b>	3.5	90	Синий	36	Cardioint™	88863256-61
<b>1/2 круга</b> <b>27 мм</b> 	<b>2-0</b>	3	75	Синий	36		88863093-51
	<b>0</b>	3.5	75	Синий	36		88863093-61





## КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
<b>1/2 круга 27 мм</b> 	<b>2</b>	5	5x45	Синий	24	88863372-82
<b>1/2 круга 30 мм</b> 	<b>3-0</b>	2	75	Синий	36	88863205-41
	<b>2-0</b>	3	75	Синий	36	88863205-51
	<b>0</b>	3.5	75	Синий	36	88863205-61
<b>1/2 круга 35 мм</b> 	<b>2-0</b>	3	75	Синий	36	Cardioint™ 88863082-51
	<b>0</b>	3.5	75	Синий	36	Cardioint™ 88863082-61
<b>1/2 круга 35 мм</b> 	<b>2-0</b>	3	90	Синий	36	Cardioint™ 88863393-51
	<b>0</b>	3.5	75	Синий	36	Cardioint™ 88863274-61
<b>1/2 круга 37 мм</b> 	<b>2-0</b>	3	75	Синий	36	88863090-51
	<b>0</b>	3.5	75	Синий	36	88863090-61
	<b>1</b>	4	75	Синий	36	88863090-71
<b>1/2 круга 37 мм</b> 	<b>1</b>	4	75	Синий	36	88863113-71
	<b>2</b>	5	75	Синий	36	88863113-81
	<b>5</b>	7	75	Синий	36	88863111-79
<b>1/2 круга 40 мм</b> 	<b>2</b>	5	75	Синий	36	88863376-81
<b>1/2 круга 48 мм</b> 	<b>0</b>	3.5	75	Синий	36	88863097-61
	<b>1</b>	4	75	Синий	36	88863097-71

## КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
<b>Ј-игла</b> <b>32 мм</b> 	<b>1</b>	4	75	Синий	36	88863103-71
<b>Лыжа</b> <b>23 мм</b> 	<b>2-0</b>	3	120	Синий	36	88863017-51
	<b>0</b>	3.5	120	Синий	36	88863017-61

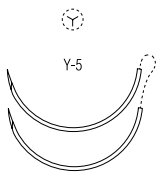
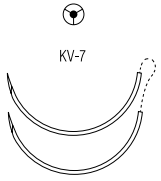
## КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ / TAPERCUTTING

Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
<b>3/8 круга</b> <b>18 мм</b> 	<b>4-0</b>	1.5	75	Синий	36	Cardioint™ 88863107-31
<b>3/8 круга</b> <b>18 мм</b> 	<b>3-0</b>	2	75	Синий	36	Cardioint™ 88863182-41
	<b>2-0</b>	3	75	Синий	36	Cardioint™ 88863182-51
	<b>2-0</b>	3	75	Синий	36	Cardioint™ Прокладки 3x7 мм жёсткие 88863233-51
	<b>2-0</b>	3	10x75	Синий / белый	6	Cardioint™ Прокладки 3x7 мм жёсткие 88863365-56
	<b>2-0</b>	3	90	Синий	36	Cardioint™ 88862631-51
	<b>2-0</b>	3	10x90	Синий / белый	6	Cardioint™ 88863052-56
	<b>2-0</b>	3	10x90	Синий / белый	6	Cardioint™ Прокладки 3x7 мм жёсткие 88862658-56

**КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ / TAPER CUTTING**

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
<b>1/2 круга 16 мм</b> 	4-0	1.5	90	Синий	36	Cardioint™	88863160-31
	3-0	2	75	Белый	36	Cardioint™	88862880-41
	3-0	2	90	Синий	36	Cardioint™	88863160-41
	2-0	3	75	Синий	36	Cardioint™	88863125-51
	2-0	3	75	Белый	36	Cardioint™	88862880-51
	2-0	3	10X75	Синий / Белый	6	Cardioint™	88862877-56
	2-0	3	10X75	Синий / Белый	6	Cardioint™ Прокладки 3x7 мм жёсткие	88863221-56
	2-0	3	8X75	Синий / Белый	6	Cardioint™ Прокладки 3x7 мм жёсткие	88863218-56
	2-0	3	8X75	Синий / Белый	6	Cardioint™ Прокладки 3x7 мм жёсткие	88863219-56
	2-0	3	8X75	Синий / Белый	6	Cardioint™ Прокладки 3x6 мм жёсткие овал	VCD2031MFE
	2-0	3	8X75	Синий / Белый	6	Cardioint™ Прокладки 3x6 мм мягкие овал	VCD2031MSE
	2-0	3	90	Синий	36	Cardioint™	88863160-51
	2-0	3	90	Синий	36	Cardioint™ Прокладки 3x7 мм жёсткие	88863204-51
	2-0	3	90	Белый	36	36 Cardioint™ Прокладки 3x7 мм жёсткие	88862808-51
	<b>1/2 круга 17 мм</b> 	4-0	1.5	90	Синий	36	Surgalloy™
3-0		2	90	Синий	36	Surgalloy™	88863159-41
2-0		3	10X75	Синий / Белый	6	Surgalloy™	88862879-56
2-0		3	8X75	Синий / Белый	6	Surgalloy™ Прокладки 3x7 мм жёсткие	88863235-56
2-0		3	90	Синий	36	Surgalloy™	88863159-51
<b>1/2 круга 20 мм</b> 	2-0	3	90	Синий	36	Cardioint™	88863157-51
<b>1/2 круга 26 мм</b> 	3-0	2	75	Синий	36	Cardioint™	88863088-41
	2-0	3	75	Синий	36	Cardioint™	88863088-51

## КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ / TAPERCUTTING

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
<b>1/2 круга 26 мм</b>  Y-5	3-0	2	90	Синий	36	Cardiopoint™	88863167-41
	2-0	3	10x75	Синий/белый		Cardiopoint™	88863222-56
	2-0	3	75	Синий	36	Cardiopoint™	88863202-51
	2-0	3	10x90	Синий/белый		Cardiopoint™ Прокладки 3x7 мм жёсткие	88863290-56
	2-0	3	90	Синий	36	Cardiopoint™ Прокладки 3x7 мм жёсткие	88863212-51
	2-0	3	90	Синий	36	Cardiopoint™	88863167-51
	2-0	3	90	Белый	36	Cardiopoint™	88862815-51
	0	3.5	90	Синий	36	Cardiopoint™	88863167-61
<b>1/2 круга 26 мм</b>  KV-7	2-0	3	8x75	Синий/белый	36	Прокладки 3x7 мм жёсткие	88863240-56
<b>1/2 круга 26 мм</b>  KV-34	0	3.5	90	Синий	36		88863119-61
<b>1/2 круга 40 мм</b>  KV-37	0	3.5	75	Синий	36		88863092-61
	1	4	75	Синий	36		88863092-71

## ПРОКЛАДКИ / PLEDGETS

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
<b>PTFE прямоугольные</b>					10x36	3x3 мм жёсткие	88868675-01
					10x36	3x7 мм жёсткие	88868677-01
					10x36	3x7 мм мягкие	88868682-01
					5x36	9.5x4.8 мм жёсткие	88868679-01
					5x36	9.5x4.8 мм мягкие	88868678-01



# VASCUFIL™

Монофиламентный нерассасывающийся шовный материал из полибутестера с рассасывающимся покрытием из Polytribolate™

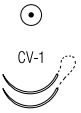
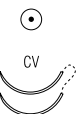
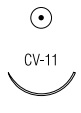

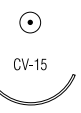
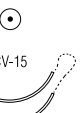


Инновация в кардиохирургии.



???

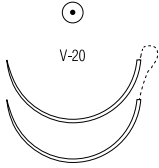
<b>Описание материала</b>	Vascufil™ - покрытый нерассасывающийся монофиламентный хирургический шовный материал, состоящий из полибутестера, кополимера бутилен терефталата и политераметилена гликоля. Шовный материал имеет покрытие из POLYTRIBOLATE™- рассасывающийся полимер из ε-капролактона-гликолида-полоксамера 188.
<b>Показания</b>	Монофиламентный шовный материал Vascufil™ применяется как нерассасывающийся шовный материал для сопоставления тканей и/или для лигирования в сердечно-сосудистой хирургии и офтальмохирургии. Применение данного шовного материала на нервных тканях и в микрохирургии не рекомендуется.
<b>Применение</b>	Монофиламентный шовный материал Vascufil™ вызывает минимальную воспалительную реакцию в тканях, быстро инкапсулируется.
<b>Срок поддержки раны</b>	Монофиламентный нерассасывающийся шовный материал Vascufil™ не теряет прочность in vivo. Выведение рассасывающегося покрытия полностью завершается в течение 30 дней.
<b>Стерилизация</b>	Гамма облучение.
<b>Упаковка</b>	<p>Стерильный шовный материал Vascufil™ производится различной длины, диаметра и с разным количеством в индивидуальной упаковке. Возможные варианты размеров от 2-0 USP (3 EP) до 7-0 USP (0.5 EP).</p> <p>Шовный материал VASCUFIL™ окрашен в синий цвет фталоцианином меди.</p> <p>Перед применением, пожалуйста, ознакомьтесь с Инструкцией из каждой индивидуальной упаковки. Внимательно изучите все показания, противопоказания, меры предосторожности и способы применения.</p>

КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

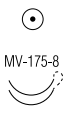
Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа	
							USP
<b>3/8 круга 9 мм</b> 	7-0	0.5	45	Синий	36	Surgalloy™	88864703-01V
	7-0	0.5	60	Синий	36	Surgalloy™	88864705-01V
	7-0	0.5	75	Синий	36	Surgalloy™	88864704-01V
	6-0	0.7	45	Синий	36	Surgalloy™	88864703-11V
	6-0	0.7	60	Синий	36	Surgalloy™	88864705-11V
	6-0	0.7	75	Синий	36	Surgalloy™	88864704-11V
<b>3/8 круга 11 мм</b> 	6-0	0.7	75	Синий	36	Surgalloy™	88864756-11V
<b>3/8 круга 13 мм</b> 	5-0	1	75	Синий	36	Surgalloy™	88864722-21V
<b>3/8 круга 13 мм</b> 	6-0	0.7	60	Синий	36	Surgalloy™	88864709-11V
	6-0	0.7	75	Синий	36	Surgalloy™	88864710-11V
	5-0	1	75	Синий	36	Surgalloy™	88864710-21V
	5-0	1	90	Синий	36	Surgalloy™	88864711-21V
<b>3/8 круга 17 мм</b> 	5-0	1	75	Синий	36	Surgalloy™	88864739-21V
	4-0	1.5	75	Синий	36	Surgalloy™	88864739-31V
<b>3/8 круга 17 мм</b> 	4-0	1.5	90	Синий	36	Surgalloy™	88864716-31V
<b>1/2 круга 13 мм</b> 	6-0	0.7	75	Синий	36	Surgalloy™	88864741-11V
	6-0	0.7	4x75	Синий	12	Surgalloy™	88864742-15V
	5-0	1	75	Синий	36	Surgalloy™	88864741-21V
<b>1/2 круга 17 мм</b> 	5-0	1	90	Синий	36	Surgalloy™	88864719-21V
	4-0	1.5	90	Синий	36	Surgalloy™	88864719-31V



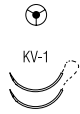
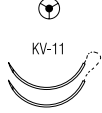
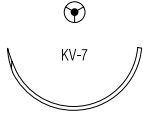
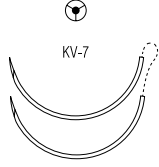
## КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
<b>1/2 круга 26 мм</b> 	<b>4-0</b>	1.5	90	СИНИЙ	36	Surgalloy™	88864750-31V
	<b>3-0</b>	2	90	СИНИЙ	36	Surgalloy™	88864750-41V
	<b>2-0</b>	3	90	СИНИЙ	36	Surgalloy™	88864750-51V

## МИКРОХИРУРГИЧЕСКАЯ КОЛЮЩАЯ / MICROSURGERY TAPER POINT

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
<b>3/8 круга 8 мм</b> 	<b>7-0</b>	0.5	60	СИНИЙ	36	Surgalloy™	88864794-01V

## КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ / TAPERCUTTING

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
<b>3/8 круга 9 мм</b> 	<b>6-0</b>	0.7	60	Синий	36	Surgalloy™	88864714-11V
<b>3/8 круга 13 мм</b> 	<b>6-0</b>	0.7	75	Синий	36	Surgalloy™	88864734-11V
	<b>5-0</b>	1	75	Синий	36	Surgalloy™	88864734-21V
<b>1/2 круга 26 мм</b> 	<b>2-0</b>	3	90	Синий	36	Surgalloy™	88864730-51V
<b>1/2 круга 26 мм</b> 	<b>4-0</b>	1.5	90	Синий	36	Surgalloy™	88864731-31V
	<b>3-0</b>	2	90	Синий	36	Surgalloy™	88864731-41V
	<b>2-0</b>	3	90	Синий	36	Surgalloy™	88864731-51V

# FLEXON™

Кручёная проволока из нержавеющей стали с покрытием

Превосходная стабильность с высокой гибкостью.

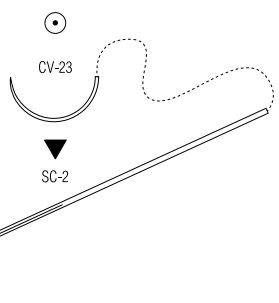
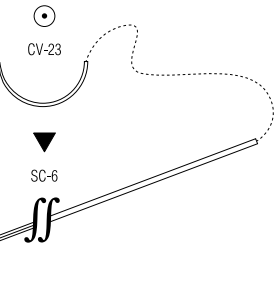
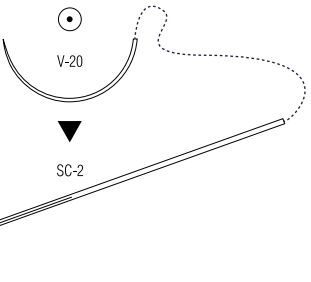
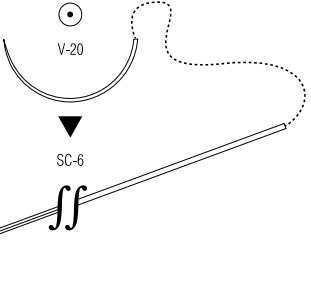


Проводник для временного водителя сердечного ритма.

<b>Описание материала</b>	Проводник для временного водителя сердечного ритма - материал Flexon™ представляет собой кручёную проволоку из нержавеющей стали с покрытием из оранжевого или белого PTFE (политетрафторэтилен) или прозрачного FEP.
<b>Показания</b>	Материал Flexon™ предназначен для использования в качестве временного проводника в предсердии и желудочковой зоне до и после операций на сердце.
<b>Применение</b>	Шовный материал Flexon™ вызывает минимальную реакцию тканей и не рассасывается.
<b>Срок поддержки раны</b>	Постоянная.
<b>Стерилизация</b>	Окись этилена.
<b>Упаковка</b>	Проводник временного водителя ритма Flexon™ поставляется покрытым оранжевым или белым PTFE или прозрачным FEP в размерах от 3-0 USP (2 EP) до 0 USP (3.5 EP). Временный проводник сердечного ритма FLEXON™ поставляется стерильным с различными видами игл, включая так называемые «отламывающиеся» иглы BREAKAWAY™. Формируется в коробках по 12 шт.

Перед применением, пожалуйста, ознакомьтесь с Инструкцией из каждой индивидуальной упаковки. Внимательно изучите все показания, противопоказания, меры предосторожности и способы применения.

**КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT**

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
<p><b>1/2 круга</b> <b>17 мм</b></p>  <p><b>Прямая</b> <b>60 мм</b></p>	<b>3-0</b>	2	60		12	Покрытие FEP	88862592-43
<p><b>1/2 круга</b> <b>17 мм</b></p>  <p><b>Прямая</b> <b>88 мм</b></p>	<b>3-0</b>	2	60		12	Break-Away™ Покрытие FEP	88862586-43
<p><b>1/2 круга</b> <b>26 мм</b></p>  <p><b>Прямая</b> <b>60 мм</b></p>	<b>0</b>	3.5	60		12	Покрытие FEP	88862597-63
<p><b>1/2 круга</b> <b>26 мм</b></p>  <p><b>Прямая</b> <b>88 мм</b></p>	<b>2-0</b>	3	60	Оранжевый	12	Break-Away™ Покрытие PTFE	88862617-53
	<b>2-0</b>	3	60	Белый	12	Break-Away™ Покрытие PTFE	88862615-53
	<b>2-0</b>	3	2x60	Оранжевый /белый	12	Break-Away™ Покрытие PTFE	88862623-53



# STEEL™

Монофиламентный нерассасывающийся шовный материал  
из нержавеющей стали 316L

Обеспечивает максимальную прочность.



<b>Описание материала</b>	Шовный материал из нержавеющей стали 316L и соответствуют всем стандартам USP и EP, предъявляемым к нерассасывающимся шовным материалам.
<b>Характеристика материала</b>	Шовный материал из стали наиболее инертный среди всех шовных материалов и обеспечивает максимальную прочность.
<b>Показания</b>	Синтетический стальной шовный материал предназначен для закрытия грудины и также для некоторых ортопедических процедур (например, при восстановлении сухожилия).
<b>Действие</b>	Стальной шовный материал вызывает минимальную реакцию тканей и не рассасывается в организме.
<b>Прочность</b>	Постоянная.
<b>Стерилизация</b>	Окись этилена или гамма облучение.
<b>Упаковка</b>	<p>Возможные варианты размеров стального шовного материала от 2-0 USP (3 EP) до 7 USP (9 EP). Стерильный шовный материал поставляется в отрезках, без игл или с иглами, закрепленными перманентно или ROTO GRIP™, поворачивающимися на 360°.</p> <p>Формируется в коробках по 12 шт.</p> <p>Перед применением, пожалуйста, ознакомьтесь с Инструкцией из каждой индивидуальной упаковки. Внимательно изучите все показания, противопоказания, меры предосторожности и способы применения.</p>

## ЛИГАТУРЫ / PRE-CUT

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
	0	3.5	12x45		12		88862407-63
	2	5	6x45		12		88862408-83

## ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / REVERSE CUTTING

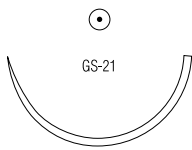
Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
<b>1/2 круга 40 мм</b> 	2	5	5x45		12		88862413-83
<b>1/2 круга 48 мм</b> 	2	5	2x45		12	Rotogrip™	88862420-83
	4	6	2x45		12	Rotogrip™	88862420-09
<b>1/2 круга 55 мм</b> 	5	7	4x45		12	Rotogrip™	88862410-89
	5	7	75		12	Rotogrip™	88862412-89
	5	7	2x75		12	Rotogrip™	88862424-89

## РЕЖУЩАЯ / CONVENTIONAL CUTTING

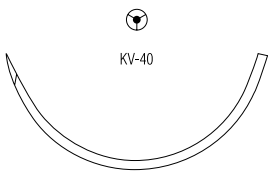
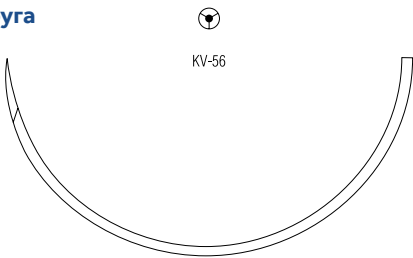
Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
<b>1/2 круга 48 мм</b> 	5	7	4x45		12		88862224-89
	6	8	2x45		12		88862222-69
	6	8	4x45		12		88862224-69
	6	8	6x45		12		88862226-69
	7	9	4x45		12		88862224-49



## КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
<b>1/2 круга 37 мм</b> 	<b>2-0</b>	3	5x45		12		88862345-53

## КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ / TAPERCUTTING

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
<b>1/2 круга 48 мм</b> 	<b>5</b>	7	4x45		12	Rotogrip™	88862414-89
	<b>5</b>	7	4x45		12		88862393-89
	<b>6</b>	8	2x45		12		88862392-69
	<b>6</b>	8	4x45		12		88862393-69
	<b>7</b>	9	2x45		12		88862392-49
<b>1/2 круга 60 мм</b> 	<b>5</b>	7	5x75		12		88862396-89

# MONOSOF™ / DERMALON™

Монофиламентный нерассасывающийся шовный материал из полиамида

Высокая прочность на растяжение. Низкая реактивность ткани.



<b>Описание материала</b>	Монофиламентный шовный материал Monosof™ / Dermalon™ из полиамида является инертным, нерассасывающимся шовным материалом. По химической структуре представляет собой длинную химическую цепь алифатических полимеров Нейлон 6 и Нейлон 6.6.
<b>Показания</b>	Монофиламентный нейлоновый не рассасывающийся шовный материал Monosof™ / Dermalon™ применяется для сопоставления тканей и/или для лигирования, используется в общей, пластической, сердечно-сосудистой хирургии, офтальмологии и нейрохирургии.
<b>Применение</b>	Монофиламентный нейлоновый не рассасывающийся шовный материал Monosof™ / Dermalon™ вызывает минимальную воспалительную реакцию в тканях, быстро инкапсулируется.
<b>Срок поддержки раны</b>	Как и любой другой нейлоновый не рассасывающийся шовный материал со временем подвергается частичному гидролизу in vivo, что может привести к незначительной потере прочности.
<b>Стерилизация</b>	Окись этилена или гамма облучение.
<b>Упаковка</b>	Монофиламентный нерассасывающийся шовный материал Monosof™ производится как неокрашенным, так и в черном цвете размерами от 2 USP (5 EP) до 11-0 USP (0.1 EP). Монофиламентный нерассасывающийся шовный материал Dermalon™ производится окрашенным в синий D&C цвет No. 2 в размерах от 2-0 USP (3 EP) до 6-0 (0.7 EP). Стерильный шовный материал Monosof™ / Dermalon™ поставляется в отрезках различной длины и катушках, в безыгольном исполнении и с различными видами игл, зафиксированными перманентно или отсоединяемыми. Формируется в коробках по 12, 24 или 36 штук.

Перед применением, пожалуйста, ознакомьтесь с Инструкцией из каждой индивидуальной упаковки. Внимательно изучите все показания, противопоказания, меры предосторожности и способы применения.



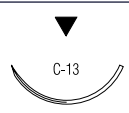
# Monosof™ / Dermalon™

Monosof™ / Dermalon™ - шовный материал, которому вы доверяете около 50 лет, имеющий доказанную временем эффективность.

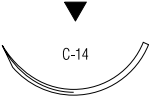
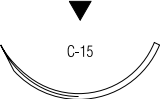



## ЛИГАТУРЫ/ PRE-CUT

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
	2	5	6x45	Чёрный	36		N-64

## ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / REVERSE CUTTING

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
<b>3/8 круга 12 мм</b> 	6-0	0.7	45	Чёрный	36		SN-667
	6-0	0.7	45	Синий	36		88861741-11
	5-0	1	45	Чёрный	36		SN-871
	5-0	1	45	Синий	36		88861741-21
<b>3/8 круга 16 мм</b> 	6-0	0.7	45	Чёрный	36		SN-660
	5-0	1	45	Чёрный	36		SN-659
	4-0	1.5	75	Чёрный	36		SN-762
	3-0	2	75	Чёрный	36		SN-763
<b>3/8 круга 19 мм</b> 	5-0	1	45	Чёрный	36		SN-661
	5-0	1	45	Чёрный	12		SN-661G
	5-0	1	45	Синий	36		88861756-21
	4-0	1.5	45	Чёрный	36		SN-662
	4-0	1.5	45	Синий	36		88861756-31
	4-0	1.5	75	Синий	36		88861757-31
	4-0	1.5	90	Чёрный	36		SN-644
	3-0	2	45	Чёрный	36		SN-653
	3-0	2	45	Синий	36		88861756-41
	3-0	2	75	Чёрный	36		SN-641
	3-0	2	75	Синий	36		88861757-41
	3-0	2	90	Чёрный	36		SN-665
	2-0	3	45	Синий	36		88861756-51
	2-0	3	90	Чёрный	36		SN-666



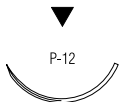
**ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / REVERSE CUTTING**

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
<b>3/8 круга 24 мм</b> 	4-0	1.5	45	Чёрный	36		SN-658
	4-0	1.5	90	Чёрный	36		SN-649
	3-0	2	45	Чёрный	36		SN-663
	3-0	2	45	Чёрный	12		SN-663G
	3-0	2	45	Чёрный	36		88861744-41
	3-0	2	75	Синий	36		88861799-41
	3-0	2	90	Синий	36		SN-648
	2-0	2	45	Чёрный	36		SN-758
	2-0	3	75	Синий	36		88861799-51
	2-0	3	90	Чёрный	36		SN-747
	<b>3/8 круга 26 мм</b> 	2-0	3	45	Чёрный	36	
2-0		3	45	Синий	36		88861744-51
2-0		3	75	Чёрный	36		SN-664
2-0		3	75	Чёрный	12		SN-664-G
<b>3/8 круга 30 мм</b> 	3-0	2	75	Чёрный	36		SN-671
	3-0	2	75	Синий	36		88861750-41
	3-0	2	90	Чёрный	36		SN-771
	2-0	3	75	Чёрный	36		SN-688
	2-0	3	90	Чёрный	36		SN-788
	0	3.5	75	Чёрный	36		SN-689
	1	4	90	Чёрный	36		SN-790
<b>3/8 круга 35 мм</b> 	2-0	3	90	Чёрный	36		SN-694
<b>3/8 круга 39 мм</b> 	3-0	2	75	Чёрный	36		SN-673
	3-0	2	75	Синий	36		88861727-41
	2-0	3	75	Чёрный	36		SN-674
	2-0	3	75	Синий	36		88861727-51
	0	3.5	90	Чёрный	36		SN-775
	1	4	90	Чёрный	36		SN-776

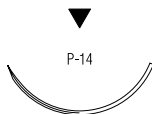
**ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / REVERSE CUTTING**

Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
<b>1/2 круга 18 мм</b> 	4-0	1.5	75	Чёрный	36	SN-630
<b>1/2 круга 30 мм</b> 	3-0	2	75	Чёрный	36	SN-681
	2-0	3	90	Чёрный	36	SN-782
<b>1/2 круга 37 мм</b> 	2-0	3	75	Чёрный	36	CN-819
	1	4	90	Чёрный	36	CN-822
<b>Прямая 51 мм</b> 	4-0	1.5	90	Чёрный	36	SN-615
<b>Прямая 60 мм</b> 	2-0	3	75	Чёрный	36	SN-628
	2-0	3	100	Чёрный	36	SN-728


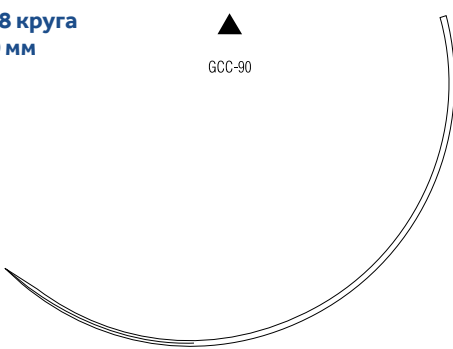
**КОСМЕТИЧЕСКАЯ ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / COSMETIC REVERSE CUTTING**

Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
<b>3/8 круга 11 мм</b> 	6-0	0.7	45	Чёрный	36	Surgalloy™
	6-0	0.7	45	Чёрный	12	Surgalloy™
<b>3/8 круга 13 мм</b> 	6-0	0.7	45	Чёрный	36	Surgalloy™
	5-0	1	45	Чёрный	36	Surgalloy™
	4-0	1.5	45	Чёрный	36	Surgalloy™
	4-0	1.5	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™
<b>3/8 круга 16 мм</b> 	5-0	1	45	Чёрный	36	Surgalloy™
	4-0	1.5	45	Чёрный	36	Surgalloy™
<b>3/8 круга 19 мм</b> 	5-0	1	45	Чёрный	36	Surgalloy™
	4-0	1.5	45	Чёрный	36	Surgalloy™
	3-0	2	45	Чёрный	36	Surgalloy™


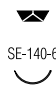
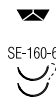
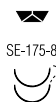
## КОСМЕТИЧЕСКАЯ ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / COSMETIC REVERSE CUTTING

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
<b>3/8 круга</b> <b>24 мм</b> 	<b>3-0</b>	2	45	Чёрный	36	Surgalloy™	SN-5663

## РЕЖУЩАЯ / CONVENTIONAL CUTTING

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
<b>3/8 круга</b> <b>19 мм</b> 	<b>4-0</b>	1.5	45	Чёрный	36		SN-568
	<b>4-0</b>	1.5	45	Синий	36		88861742-31
	<b>3-0</b>	2	45	Синий	36		88861742-41
<b>3/8 круга</b> <b>90 мм</b> 	<b>2-0</b>	3	100	Чёрный	36		CN-791
	<b>1</b>	4	100	Чёрный	36		CN-793

## ПРЕМИУМ ШПАТЕЛЬ / PREMIUM SPATULA







Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
<b>1/4 круга</b> <b>6.3 мм</b> 	<b>8-0</b>	0.4	30	Чёрный	12	Surgalloy™	N-2714-K
<b>3/8 круга</b> <b>6.3 мм</b> 	<b>10-0</b>	0.2	30	Чёрный	12	Surgalloy™	N-2770-K
<b>1/2 круга</b> <b>5.5 мм</b> 	<b>9-0</b>	0.3	30	Чёрный	12	Surgalloy™	N-2760-K
<b>1/2 круга</b> <b>6.9 мм</b> 	<b>8-0</b>	0.4	30	Чёрный	12	Surgalloy™	N-2716-K

## КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
<b>1/2 круга</b> <b>40 мм</b> 	<b>0</b>	3.5	100	Чёрный	36	CN-723
<b>1/2 круга, петля</b> <b>40 мм</b> 	<b>0</b>	3.5	150	Чёрный	24	Петля CN-825-L
<b>1/2 круга, петля</b> <b>48 мм</b> 	<b>1</b>	4	150	Чёрный	24	Петля CN-830-L
<b>Прямая</b> <b>60 мм</b> 	<b>2-0</b>	3	90	Чёрный	36	GN-283
	<b>0</b>	3.5	90	Чёрный	36	GN-284



**МИКРОХИРУРГИЧЕСКАЯ КОЛЮЩАЯ / MICROSURGERY TAPER POINT**

Описание		Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
		USP	Метрик					
<b>3/8 круга 4 мм</b>	 MV-50-3	<b>11-0</b>	0.1	13	Чёрный	12	Surgalloy™	N-2500
<b>3/8 круга 4 мм</b>	 MV-70-3	<b>11-0</b>	0.1	13	Чёрный	12	Surgalloy™	N-2510
		<b>10-0</b>	0.2	13	Чёрный	12	Surgalloy™	N-2512
<b>3/8 круга 4 мм</b>	 MV-135-3	<b>9-0</b>	0.3	8	Чёрный	12	Surgalloy™	N-1603G
<b>3/8 круга 5 мм</b>	 MV-100-4	<b>10-0</b>	0.2	13	Чёрный	12	Surgalloy™	N-2530
		<b>9-0</b>	0.3	13	Чёрный	12	Surgalloy™	N-2532
<b>3/8 круга 5 мм</b>	 MV-135-4	<b>9-0</b>	0.3	13	Чёрный	12	Surgalloy™	N-2546
		<b>8-0</b>	0.4	13	Чёрный	12	Surgalloy™	N-2543
<b>3/8 круга 6 мм</b>	 MV-135-5	<b>9-0</b>	0.3	13	Чёрный	12	Surgalloy™	N-2548
		<b>8-0</b>	0.4	13	Чёрный	12	Surgalloy™	N-2547

# NOVAFIL™

Монофиламентный нерассасывающийся шовный материал  
из полибутэстера

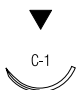
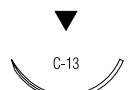
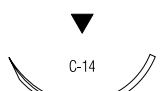
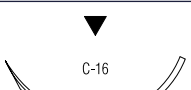


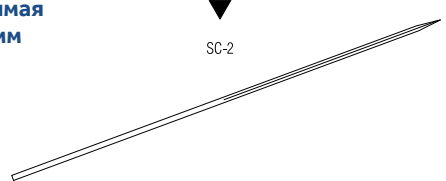
Эластичный и гибкий.








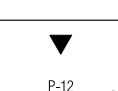



Эластичный и гибкий.  
Контролируемое растяжение в  
ваших руках.

<b>Описание материала</b>	Нерассасывающийся монофиламентный хирургический шовный материал Novafil™ состоит из полибутестера - кополимера бутилена терефталата и политетраметилена-гликолиевого эфира.
<b>Показания</b>	Монофиламентный не рассасывающийся шовный материал Novafil™ применяется для сопоставления тканей и/или для лигирования, включая использование в сердечно-сосудистой и офтальмохирургии. Применение в микрохирургии и на нервных тканях не рекомендуется.
<b>Применение</b>	Монофиламентный не рассасывающийся шовный материал Novafil™ вызывает минимальную воспалительную реакцию в тканях, быстро инкапсулируется. Шовный материал Novafil™ устойчив к воздействию тканевых ферментов.
<b>Срок поддержки раны</b>	Монофиламентный шовный материал Novafil™ не рассасывается и не меняет прочности in vivo.
<b>Стерилизация</b>	Гамма облучение.
<b>Упаковка</b>	<p>Полибутестеровый шовный материал NOVAFIL™ производится в бесцветном варианте или окрашенным в синий цвет фталоцианином меди. Возможные варианты размеров от 1 USP (4 EP) до 7-0 USP (0.5 EP). Стерильный шовный материал NOVAFIL™ поставляется различной длины, диаметра и с разным количеством отрезков в индивидуальной упаковке, в безыгольном исполнении или с различными видами игл, зафиксированными перманентно или отсоединяемыми.</p> <p>Формируется в коробках по 12, 24 или 36 штук.</p> <p>Перед применением, пожалуйста, ознакомьтесь с Инструкцией из каждой индивидуальной упаковки. Внимательно изучите все показания, противопоказания, меры предосторожности и способы применения.</p>

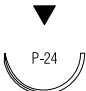
Novafil™ - шовный материал, которому вы доверяете около 30 лет, имеющий доказанную временем эффективность.

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / REVERSE CUTTING								
Описание		Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
		USP	Метрик					
<b>3/8 круга 12 мм</b>		6-0	0.7	45	Синий	12		8886441913
		5-0	1	45	Синий	12		8886441923
		4-0	1.5	45	Синий	12		8886441933
<b>3/8 круга 19 мм</b>		5-0	1	45	Синий	12		8886442023
		4-0	1.5	45	Синий	12		8886442033
		3-0	2	45	Синий	12		8886442043
		3-0	2	75	Синий	36		8886455441
<b>3/8 круга 24 мм</b>		4-0	1.5	45	Синий	12		8886442233
		3-0	2	45	Синий	12		8886442243
		3-0	2	90	Синий	36		8886400241
		2-0	3	45	Синий	12		8886442253
		2-0	3	75	Синий	12		8886442153
<b>3/8 круга 30 мм</b>		3-0	2	75	Синий	36		8886442441
		2-0	3	75	Синий	36		8886442451
		0	3.5	75	Синий	36		8886442461
<b>3/8 круга 39 мм</b>		2-0	3	75	Синий	36		8886442651
<b>3/8 круга 48 мм</b>		1	4	75	Синий	36		8886443671
<b>Прямая 60 мм</b>		3-0	2	75	Синий	36		8886449041
		2-0	3	75	Синий	36		8886449051



## КОСМЕТИЧЕСКАЯ ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / COSMETIC REVERSE CUTTING

Описание		Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
		USP	Метрик					
<b>3/8 круга 11 мм</b>		<b>7-0</b>	0.5	45	Синий	12	Surgalloy™	8886441003
		<b>6-0</b>	0.7	45	Синий	12	Surgalloy™	8886441013
		<b>5-0</b>	1	45	Синий	12	Surgalloy™	8886441023
<b>3/8 круга 13 мм</b>		<b>5-0</b>	1	75	Синий	36	Surgalloy™	8886402721
		<b>4-0</b>	1.5	45	Синий	12	Surgalloy™	SPB-1233G
<b>3/8 круга 13 мм</b>		<b>5-0</b>	1	45	Синий	12		8886440023
<b>3/8 круга 16 мм</b>		<b>4-0</b>	1.5	45	Синий	12	Surgalloy™	SPB-5143G
<b>3/8 круга 16 мм</b>		<b>5-0</b>	1	45	Синий	12		8886440123
		<b>4-0</b>	1.5	45	Синий	12		8886440133
<b>3/8 круга 19 мм</b>		<b>4-0</b>	1.5	45	Синий	12	Surgalloy™	SPB-5633G
<b>3/8 круга 19 мм</b>		<b>4-0</b>	1.5	45	Синий	12		8886440233
		<b>3-0</b>	2	45	Синий	12		8886440243
<b>3/8 круга 24 мм</b>		<b>3-0</b>	2	45	Синий	12	Surgalloy™	SPB-5843G
		<b>3-0</b>	2	75	Синий	36	Surgalloy™	8886458243
		<b>2-0</b>	3	45	Синий	12	Surgalloy™	8886441853
<b>3/8 круга 24 мм</b>		<b>3-0</b>	2	45	Синий	12		8886440343

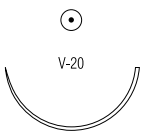
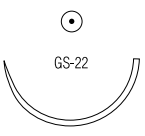
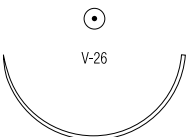
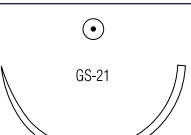


## КОСМЕТИЧЕСКАЯ ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / COSMETIC REVERSE CUTTING

Описание		Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
		USP	Метрик					
<b>1/2 круга 16 мм</b>		<b>4-0</b>	1.5	45	Неокрашенный	12	Surgalloy™	SPB-5433G

## КОСМЕТИЧЕСКАЯ РЕЖУЩАЯ / COSMETIC CONVENTIONAL CUTTING

Описание		Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
		USP	Метрик					
<b>3/8 круга 16 мм</b>		<b>6-0</b>	0.7	45	Синий	12	Dermax™	XNF-1966
		<b>5-0</b>	1	45	Синий	12	Dermax™	XNF-1965
		<b>4-0</b>	1.5	45	Синий	12	Dermax™	XNF-1964
<b>3/8 круга 19 мм</b>		<b>5-0</b>	1	45	Синий	12	Dermax™	XNF-1995
		<b>4-0</b>	1.5	45	Синий	12	Dermax™	XNF-1994
		<b>3-0</b>	2	45	Синий	12	Dermax™	XNF-1993

## КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание		Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
		USP	Метрик					
<b>1/2 круга 26 мм</b>		<b>3-0</b>	2	75	Синий	36	Surgalloy™	8886445241
		<b>2-0</b>	3	75	Синий	36	Surgalloy™	8886445251
		<b>0</b>	3.5	75	Синий	36	Surgalloy™	8886445261
<b>1/2 круга 27 мм</b>		<b>2-0</b>	3	75	Синий	36		8886445951
<b>1/2 круга 37 мм</b>		<b>3-0</b>	2	75	Синий	36		8886445041
<b>1/2 круга 37 мм</b>		<b>0</b>	3.5	75	Синий	36		8886445561
		<b>1</b>	4	75	Синий	36		8886445571
<b>1/2 круга 40 мм</b>		<b>1</b>	4	75	Синий	36		8886446371
<b>1/2 круга, петля 48 мм</b>		<b>0</b>	3.5	200	Синий	12	Петля	8886453863



# SURGILON™

Плетёный нерассасывающийся шовный материал из полиамида

Равномерно покрыт силиконом для улучшения манипуляционных характеристик.





<b>Описание материала</b>	Плетёный шовный материал из полиамида Surgilon™ — инертен и не рассасывается. По химической структуре представляет собой длинную химическую цепь полимеров Нейлон 6 и Нейлон 6.6. Плетеные нити равномерно покрыты силиконом для улучшения манипуляционных характеристик и уменьшения капиллярности.
<b>Показания</b>	Плетёный нейлоновый не рассасывающийся шовный материал Surgilon™ применяется для сопоставления тканей и/или для лигирования, используется в общей, торакальной, пластической, косметической, сердечно-сосудистой хирургии, офтальмологии и нейрохирургии.
<b>Применение</b>	Плетёный нейлоновый не рассасывающийся шовный материал Surgilon™ вызывает минимальную воспалительную реакцию в тканях, быстро инкапсулируется.
<b>Срок поддержки раны</b>	Как и любой другой нейлоновый не рассасывающийся шовный материал со временем подвергается частичному гидролизу in vivo, что может привести к незначительной потере прочности.
<b>Стерилизация</b>	Плетёный шовный материал из полиамида Surgilon™ стерилизуется оксидом этилена в размерах от 6-0 (метрический размер 0,7) и менее, гамма облучением в размерах от 2 (метрический размер 5) до 5-0 (метрический размер 1).
<b>Упаковка</b>	<p>Плетёный нейлоновый шовный материал Surgilon™ производится как неокрашенным (белым), так и в черном цвете ...размерами от 3 USP (6 EP) до 5-0 USP (1 EP). Стерильный шовный материал urgilon™ поставляется различной длины, диаметра и с разным количеством в индивидуальной упаковке, в безыгольном исполнении или с иглами, зафиксированными перманентно или отсоединяемыми.</p> <p>Формируется в коробках по 12, 24 или 36 штук.</p> <p>Перед применением, пожалуйста, ознакомьтесь с Инструкцией из каждой индивидуальной упаковки. Внимательно изучите все показания, противопоказания, меры предосторожности и способы применения.</p>

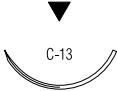
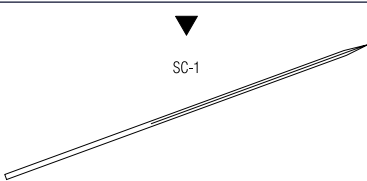
ЛИГАТУРЫ / PRE-CUT

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
	4-0	1.5	12x45	Чёрный	36		88861918-31
	4-0	1.5	7x75	Чёрный	36		88861919-31
	3-0	2	12x45	Чёрный	36		88861918-41
	3-0	2	7x75	Чёрный	36		88861919-41
	2-0	3	12x45	Чёрный	36		88861918-51
	2-0	3	12x45	Белый	36		88861899-51
	2-0	3	7x75	Чёрный	36		88861919-51
	0	3.5	6x45	Чёрный	36		88861917-61
	0	3.5	6x45	Белый	36		88861902-61
	0	3.5	7x75	Чёрный	36		88861919-61
	1	4	6x45	Чёрный	36		88861917-71
	1	4	7x75	Чёрный	36		88861919-71
	2	5	6x45	Чёрный	24		88861917-82


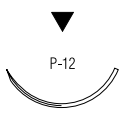
КАТУШКИ / REEL

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
	3-0	2	360	Чёрный	24		88861906-42
	2-0	3	360	Чёрный	24		88861906-52
	0	3.5	250	Чёрный	24		88861920-62
	1	4	250	Чёрный	24		88861920-72
	2	5	300	Чёрный	12		88861914-83
	3	6	238	Чёрный	12		88861920-93


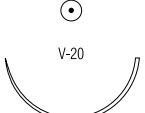



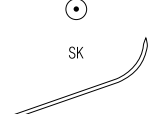
**ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / REVERSE CUTTING**

Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
<b>3/8 круга</b> <b>19 мм</b> 	<b>2-0</b>	3	75	Чёрный	36	88861982-51
<b>3/8 круга</b> <b>24 мм</b> 	<b>3-0</b>	2	75	Чёрный	36	88861935-41
	<b>2-0</b>	3	45	Чёрный	12	88861934-53
	<b>2-0</b>	3	75	Чёрный	36	88861935-51
<b>3/8 круга</b> <b>30 мм</b> 	<b>2-0</b>	3	75	Чёрный	36	88861883-51
	<b>0</b>	3.5	75	Чёрный	36	88861883-61
	<b>1</b>	4	75	Чёрный	36	88861883-71
<b>3/8 круга</b> <b>35 мм</b> 	<b>1</b>	4	75	Чёрный	36	88861922-71
<b>1/2 круга</b> <b>26 мм</b> 	<b>2-0</b>	3	75	Чёрный	36	88861932-51
<b>1/2 круга</b> <b>37 мм</b> 	<b>1</b>	4	75	Чёрный	36	88861915-71
<b>Прямая</b> <b>51 мм</b> 	<b>2-0</b>	3	75	Чёрный	36	88861985-51

## КОСМЕТИЧЕСКАЯ ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / COSMETIC REVERSE CUTTING

Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа	
							USP
<b>3/8 круга</b> <b>13 мм</b> 	<b>5-0</b>	1	45	Чёрный	12	Surgalloy™	SBS-1928G
<b>3/8 круга</b> <b>19 мм</b> 	<b>4-0</b>	1.5	45	Белый	12	Surgalloy™	SBS-1884G
	<b>3-0</b>	2	45	Белый	12	Surgalloy™	SBS-1883G

## КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
<b>1/2 круга</b> <b>17 мм</b> 	<b>4-0</b>	1.5	75	Чёрный	36	88861995-31
	<b>3-0</b>	2	75	Чёрный	36	88861995-41
<b>1/2 круга</b> <b>26 мм</b> 	<b>3-0</b>	2	75	Чёрный	36	88861951-41
	<b>2-0</b>	3	75	Чёрный	36	88861951-51
	<b>0</b>	3.5	75	Чёрный	36	88861951-61
<b>1/2 круга</b> <b>27 мм</b> 	<b>0</b>	3.5	75	Чёрный	36	88861968-61
<b>1/2 круга</b> <b>30 мм</b> 	<b>2-0</b>	3	75	Чёрный	36	88861964-51
	<b>0</b>	3.5	75	Чёрный	36	88861964-61
<b>1/2 круга</b> <b>37 мм</b> 	<b>1</b>	4	75	Чёрный	36	88861971-71
<b>Лыжа</b> <b>23 мм</b> 	<b>2-0</b>	3	250	Чёрный	36	88862011-51



# SOFSILK™

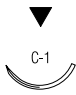
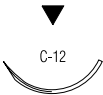
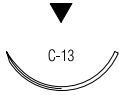
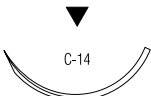


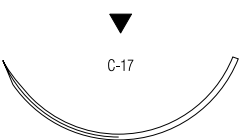
Плетёный нерассасывающийся покрытый шелк

Оптимальные манипуляционные свойства.



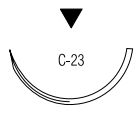
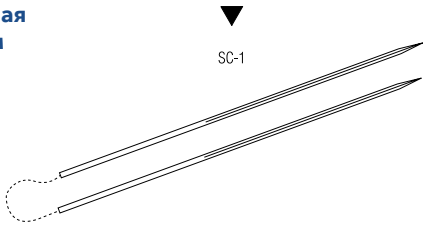
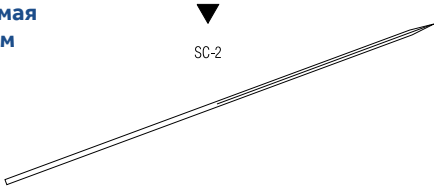
<b>Описание материала</b>	Шовный материал Sof silk™ представляет собой нерассасывающийся, стерильный, немутагенный хирургический шовный материал, состоящий из натуральных белковых шёлковых волокон - фиброин. Этот белок получают от одомашненных гусениц тутового шелкопряда Bombyx mori семейства Bombycidae. Для получения хирургического шовного материала SOFSILK™ шёлковые волокна обрабатываются для удаления серициновой смазки, отбеливаются, сплетаются. Плетёные нити равномерно покрываются силиконом или особой восковой рецептурой для снижения капиллярности и увеличения смачиваемости, обеспечивающей оптимальные манипуляционные свойства, плавное прохождение через ткани и опускание узла.
<b>Показания</b>	Шовный материал Sof silk™ предназначен для сопоставления тканей и/или для лигирования, применения в общей, торакальной, сердечно-сосудистой хирургии, офтальмологии, ортопедии и нейрохирургии.
<b>Применение</b>	Шовный материал Sof silk™ вызывает минимальную воспалительную реакцию в тканях, быстро инкапсулируется.
<b>Срок поддержки раны</b>	Шовный материал Sof silk™ является нерассасывающимся. Дегградация протеиновых волокон шелка in vivo может приводить к частичной потере прочности шовного материала со временем.
<b>Стерилизация</b>	Гамма облучение.
<b>Упаковка</b>	Шовный материал Sof silk™ выпускается белым или окрашенным в черный цвет и покрыт или силиконом, или специальной восковой рецептурой, размерами от 2 USP (5 EP) до 8-0 USP (0.4 EP). Стерильный шовный материал Sof silk™ поставляется с различными видами игл, зафиксированными перманентно или отсоединяемыми. Формируется в коробках по 12,24 или 36 шт.  Перед применением, пожалуйста, ознакомьтесь с Инструкцией из каждой индивидуальной упаковки. Внимательно изучите все показания, противопоказания, меры предосторожности и способы применения.

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / REVERSE CUTTING



Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа	
							USP
<b>3/8 круга 12 мм</b> 	5-0	1	45	Чёрный	36	Покрытие воском	S-1173
<b>3/8 круга 16 мм</b> 	6-0	0.7	45	Чёрный	36	Покрытие силиконом	SS-681
	5-0	1	75	Чёрный	36	Покрытие воском	SS-673
	4-0	1.5	75	Чёрный	36	Покрытие воском	SS-645
	3-0	2	75	Чёрный	36	Покрытие воском	SS-745
<b>3/8 круга 19 мм</b> 	5-0	1	45	Чёрный	36	Покрытие воском	SS-682
	5-0	1	75	Чёрный	36	Покрытие воском	SS-652
	4-0	1.5	45	Чёрный	36	Покрытие воском	SS-683
	3-0	2	45	Чёрный	36	Покрытие воском	SS-694
	3-0	2	75	Чёрный	36	Покрытие воском	SS-654
	0	3.5	75	Чёрный	36	Покрытие воском	SS-656
<b>3/8 круга 24 мм</b> 	4-0	1.5	45	Чёрный	36	Покрытие воском	SS-629
	3-0	2	45	Чёрный	36	Покрытие воском	SS-684
	2-0	3	45	Чёрный	36	Покрытие воском	SS-695
	2-0	3	75	Чёрный	36	Покрытие воском	SS-785
<b>3/8 круга 26 мм</b> 	2-0	3	45	Чёрный	36	Покрытие воском	SS-685
<b>3/8 круга 30 мм</b> 	3-0	2	75	Чёрный	36	Покрытие воском	SS-675
	2-0	3	75	Чёрный	36	Покрытие воском	SS-679
	0	3.5	45	Чёрный	36	Покрытие воском	SS-678
	0	3.5	75	Чёрный	36	Покрытие воском	SS-680
	1	4	75	Чёрный	36	Покрытие воском	SS-689
<b>3/8 круга 39 мм</b> 	2-0	3	75	Чёрный	36	Покрытие воском	SS-648
	0	3.5	75	Чёрный	36	Покрытие воском	SS-647
	1	4	75	Чёрный	36	Покрытие воском	SS-646
	2	5	75	Чёрный	36	Покрытие воском	SS-651



**ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / REVERSE CUTTING**

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
<b>1/2 круга</b> <b>24 мм</b> 	3-0	2	75	Чёрный	36	Покрытие воском	SS-632
	2-0	3	75	Чёрный	36	Покрытие воском	SS-633
<b>Прямая</b> <b>51 мм</b> 	2-0	3	75	Чёрный	36	Покрытие воском	SS-523
<b>Прямая</b> <b>60 мм</b> 	2-0	3	75	Чёрный	36	Покрытие воском	SS-623
	2-0	3	100	Чёрный	36	Покрытие воском	SS-723
	0	3.5	75	Чёрный	36	Покрытие воском	SS-624

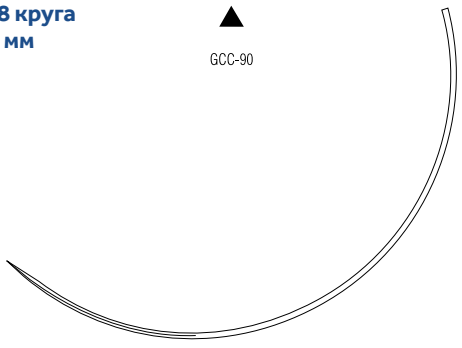
**КОСМЕТИЧЕСКАЯ ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / COSMETIC REVERSE CUTTING**

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
<b>3/8 круга</b> <b>11 мм</b> 	6-0	0.7	45	Чёрный	36	Surgalloy™ Покрытие силиконом	SS-5639
<b>3/8 круга</b> <b>13 мм</b> 	5-0	1	45	Чёрный	36	Surgalloy™ Покрытие воском	SS-5640

**ПРЕМИУМ ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / PREMIUM POINT REVERSE CUTTING**

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
<b>3/8 круга</b> <b>13 мм</b> 	4-0	1.5	45	Чёрный	12	Покрытие воском	S-1789-K

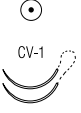


## РЕЖУЩАЯ / CONVENTIONAL CUTTING

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
<b>3/8 круга 90 мм</b> 	2-0	3	100	Чёрный	36	Покрытие воском	CS-791
	0	3.5	100	Чёрный	36	Покрытие воском	CS-792
	1	4	100	Чёрный	36	Покрытие воском	CS-793
	2	5	100	Чёрный	36	Покрытие воском	CS-794

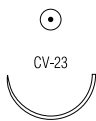
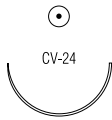
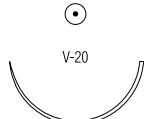

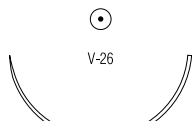

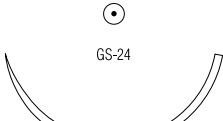
## ПРЕМИУМ ШПАТЕЛЬ / PREMIUM SPATULA

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
<b>3/8 круга 6.3 мм</b> 	8-0	0.4	45	Чёрный	12	Surgalloy™ Покрытие силиконом	S-1734-K

## КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
<b>3/8 круга 9 мм</b> 	7-0	0.5	45	Чёрный	36	Surgalloy™ Покрытие силиконом	VS-809
<b>3/8 круга 13 мм</b> 	6-0	0.7	75	Чёрный	36	Surgalloy™ Покрытие силиконом	VS-889
	5-0	1	75	Чёрный	36	Surgalloy™ Покрытие воском	VS-890
<b>3/8 круга 17 мм</b> 	4-0	1.5	75	Чёрный	36	Surgalloy™ Покрытие воском	VS-881
	3-0	2	75	Чёрный	36	Surgalloy™ Покрытие воском	VS-882

## КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа	
							USP
<b>1/2 круга 17 мм</b> 	4-0	1.5	75	Чёрный	36	Surgalloy™ Покрытие воском	VS-871
	3-0	2	75	Чёрный	36	Surgalloy™ Покрытие воском	VS-872
<b>1/2 круга 20 мм</b> 	4-0	1.5	75	Чёрный	36	Surgalloy™ Покрытие воском	GS-451
	3-0	2	75	Чёрный	36	Surgalloy™ Покрытие воском	GS-452
<b>1/2 круга 26 мм</b> 	3-0	2	75	Чёрный	36	Покрытие воском	GS-832
	2-0	3	5x45	Чёрный	24	D-Tach™ Покрытие воском	GS-62-M
	2-0	3	75	Чёрный	36	Покрытие воском	GS-833
	0	3.5	75	Чёрный	36	Покрытие воском	GS-834
<b>1/2 круга 30 мм</b> 	3-0	2	75	Чёрный	36	Покрытие воском	GS-822
	2-0	3	75	Чёрный	36	Покрытие воском	GS-823
	0	3.5	75	Чёрный	36	Покрытие воском	GS-824
<b>1/2 круга 37 мм</b> 	0	3.5	75	Чёрный	36	Покрытие воском	VS-844
	1	4	75	Чёрный	36	Покрытие воском	VS-845
	2	5	75	Чёрный	36	Покрытие воском	VS-846
<b>1/2 круга 37 мм</b> 	2-0	3	75	Чёрный	36	Покрытие воском	CS-423
	0	3.5	75	Чёрный	36	Покрытие воском	CS-424
<b>1/2 круга 40 мм</b> 	2	5	75	Чёрный	36	Покрытие воском	CS-575

# V-LOC™ 90

Рассасывающееся устройство для ушивания ран

Надёжно. Быстро. Эффективно.

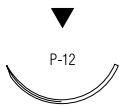
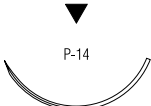

Революционная технология  
сопоставления тканей  
без завязывания узлов.



<b>Описание материала</b>	<p>V-Loc™ 90 - рассасывающееся устройство для закрытия ран, представляющее собой рассасывающуюся нить с насечками, соединенную с хирургической иглой с одной стороны, и имеющую петлю с другой. Насечки и петля созданы для возможности соединять ткани без необходимости завязывания узлов.</p> <p>V-Loc™ 90 изготовлен из синтетического полиэфира: композиции гликолида, диаксанона и триметилен карбоната. V-loc 90 выпускается как неокрашенным, так и фиолетовым. Рассасывающееся устройство для закрытия ран стерильно упаковано, инертно, не содержит антигенных структур.</p>
<b>Показания</b>	<p>V-Loc™ 90 предназначен для сопоставления мягких тканей, когда возможно применение рассасывающихся шовных материалов. Безопасность и эффективность V-Loc™ 90 не установлена при ушивании фасциальных дефектов (брюшная стенка, грудная клетка, фасциальные дефекты конечностей), межкишечных и сосудистых анастомозах, в нейрохирургии, офтальмологии и микрохирургии.</p>
<b>Применение</b>	<p>V-Loc™ 90 вызывает лишь минимальную воспалительную реакцию тканей, которая связана с постепенным формированием вокруг нити фиброзной соединительной ткани. Постепенная потеря прочности и полная абсорбция V-Loc™ 90 происходит путем гидролиза: рассасывающееся устройство для закрытия ран разрушается до гликолевой и диаксаноновой кислот, пропандиола и углекислого газа, которые метаболизируются в организме.</p>
<b>Срок поддержки раны</b>	<p>Не менее 90% начальной прочности сохраняется в течение первой недели, не 75% в течение второй недели после имплантации.</p>
<b>Стерилизация</b>	<p>Окись этилена.</p>
<b>Рассасывание</b>	<p>Абсорбция начинается с потери прочности без существенной потери массы. Исследования на животных показывают, что полное рассасывание заканчивается между 90 и 110 днями.</p>
<b>Упаковка</b>	<p>Шовный материал V-LOC™ 90 производится в бесцветном варианте или окрашенном в фиолетовый цвет. Возможные варианты размеров от 2-0 USP (3 EP) до 4-0 USP (1.5 EP). Стерильный шовный материал поставляется с различными видами перманентно зафиксированных игл. Формируется в коробках по 12 шт.</p> <p>Перед применением, пожалуйста, ознакомьтесь с Инструкцией из каждой индивидуальной упаковки. Внимательно изучите все показания, противопоказания, меры предосторожности и способы применения.</p>

## V-Loc™ 90

V-Loc™ 90 - рассасывающееся устройство для ушивания ран с однонаправленными насечками со средним сроком рассасывания.

КОСМЕТИЧЕСКАЯ ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / COSMETIC REVERSE CUTTING							
Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа	
							USP
<b>3/8 круга 19 мм</b> 	4-0	1.5	15	Неокрашенный	12	Surgalloy™	VLOCM0003
	4-0	1.5	30	Неокрашенный	12	Surgalloy™	VLOCM0013
	4-0	1.5	45	Неокрашенный	12	Surgalloy™	VLOCM0023
	4-0	1.5	58	Неокрашенный	12	Surgalloy™	VLOCM0033
	3-0	2	15	Неокрашенный	12		VLOCM0004
	3-0	2	30	Неокрашенный	12		VLOCM0014
	3-0	2	45	Неокрашенный	12		VLOCM0024
	3-0	2	58	Неокрашенный	12	Surgalloy™	VLOCM0034
	2-0	3	15	Неокрашенный	12		VLOCM0005
<b>3/8 круга 24 мм</b> 	4-0	1.5	45	Неокрашенный	12	Surgalloy™	VLOCM0123
	3-0	2	30	Неокрашенный	12	Surgalloy™	VLOCM0114
	3-0	2	45	Неокрашенный	12	Surgalloy™	VLOCM0124
	3-0	2	58	Неокрашенный	12	Surgalloy™	VLOCM0134
	2-0	3	15	Неокрашенный	12		VLOCM0125
	2-0	3	58	Неокрашенный	12		VLOCM0135
<b>3/8 круга 30 мм</b> 	3-0	2	45	Неокрашенный			VLOCM1824

## КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание		Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
		USP	Метрик					
<b>3/8 круга 17 мм</b>		4-0	1.5	15	Фиолетовый	12		VLOCM1203
		3-0	2	15	Фиолетовый	12	Surgalloy™	VLOCM1204
<b>1/2 круга 17 мм</b>		3-0	2	15	Фиолетовый	12	Surgalloy™	VLOCM0804
		3-0	2	23	Фиолетовый	12	Surgalloy™	VLOCM0844
		3-0	2	30	Фиолетовый	12		VLOCM0814
<b>1/2 круга 26 мм</b>		4-0	1.5	15	Фиолетовый	12	Surgalloy™	VLOCM0603
		3-0	2	15	Фиолетовый	12		VLOCM0604
		3-0	2	23	Фиолетовый	12	Surgalloy™	VLOCM0644
		3-0	2	30	Фиолетовый	12		VLOCM0614
		3-0	2	45	Фиолетовый	12		VLOCM0624
		2-0	3	45	Фиолетовый	12		VLOCM0625
<b>1/2 круга 27 мм</b>		2-0	3	15	Фиолетовый	12		VLOCM2105
		2-0	3	23	Фиолетовый	12		VLOCM2145
		2-0	3	30	Фиолетовый	12		VLOCM2115
<b>1/2 круга 30 мм</b>		3-0	2	23	Фиолетовый	12		VLOCM1544
		2-0	3	23	Фиолетовый	12		VLOCM1545
<b>1/2 круга 37 мм</b>		2-0	3	15	Фиолетовый	12		VLOCM0305
		2-0	3	23	Фиолетовый	12		VLOCM0345
		2-0	3	30	Фиолетовый	12		VLOCM0315
<b>5/8 круга 27 мм</b>		3-0	2	15	Фиолетовый	12		VLOCM1704
		3-0	2	23	Фиолетовый	12		VLOCM1744

# V-LOC™ 180

Рассасывающееся устройство для ушивания ран

Надёжно. Быстро. Эффективно.



Революционная технология  
сопоставления тканей  
без завязывания узлов.

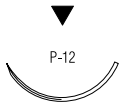



<b>Описание материала</b>	<p>V-Loc™ 180 – рассасывающееся устройство для закрытия ран, представляющее собой рассасывающуюся нить с насечками, соединенную с хирургической иглой с одной стороны, и имеющую петлю с другой. Насечки и петля созданы для возможности соединять ткани без необходимости завязывания узлов. V-Loc™ 180 изготовлен из сополимера гликолевой кислоты и триметилен карбоната.</p> <p>V-Loc™ 180 выпускается как неокрашенным, так и зеленым.</p> <p>Рассасывающееся устройство для закрытия ран стерильно упаковано, инертно, не содержит антигенных структур.</p>
<b>Показания</b>	<p>V-Loc™ 180 предназначен для сопоставления мягких тканей, когда возможно применение рассасывающихся шовных материалов. Безопасность и эффективность V-Loc™ 180 не установлена при ушивании фасциальных дефектов (брюшная стенка, грудная клетка, фасциальные дефекты конечностей), межкишечных и сосудистых анастомозах, в нейрохирургии, офтальмологии и микрохирургии.</p>
<b>Применение</b>	<p>Исследования на животных показали, что V-Loc™ 180 вызывает лишь минимальную реакцию тканей, которая связана с имплантацией инородного тела в зависимости от окружающих тканей. Тканевая реакция исчезает по мере рассасывания</p> <p>V-Loc™ 180. Эксперименты на животных убедительно доказали отсутствие антигенной активности, системной токсичности, канцерогенности, мутагенности, тератогенности и негативных эффектов на репродуктивные функции организма.</p>
<b>Срок поддержки раны</b>	<p>Исследования демонстрируют следующую потерю прочности в узле в процентах по USP и EP, в зависимости от диаметра нити. Примерно 80% прочности сохраняются в первую неделю, 75% в течение второй недели и 65% через три недели после имплантации.</p>
<b>Стерилизация</b>	<p>Окись этилена.</p>
<b>Рассасывание</b>	<p>Абсорбция начинается с потери прочности без существенной потери массы. Исследования на животных показывают, что полное рассасывание заканчивается через 6 месяцев.</p>
<b>Упаковка</b>	<p>Шовный материал V-LOC™ 180 производится в бесцветном варианте или окрашенном в зеленый цвет. Возможные варианты размеров от 0 USP (3.5 EP) до 4-0 USP (1.5 EP). Стерильный шовный материал поставляется с различными видами перманентно зафиксированных игл.</p> <p>Формируется в коробках по 12 шт.</p>


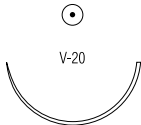
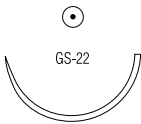
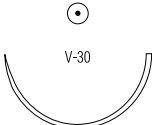
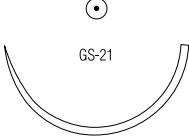
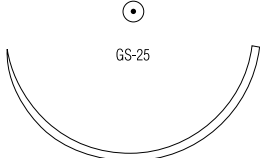
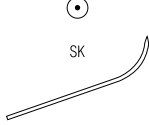
Перед применением, пожалуйста, ознакомьтесь с Инструкцией из каждой индивидуальной упаковки. Внимательно изучите все показания, противопоказания, меры предосторожности и способы применения.

## V-Loc™ 180

V-Loc™ 90 - рассасывающееся устройство для ушивания ран с однонаправленными насечками с длительным сроком рассасывания.

КОСМЕТИЧЕСКАЯ ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / COSMETIC REVERSE CUTTING							
Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
<b>3/8 круга 19 мм</b> 	4-0	1.5	45	Неокрашенный	12	Surgalloy™	VLOCL0023
	4-0	1.5	58	Неокрашенный	12	Surgalloy™	VLOCL0033
	3-0	2	15	Неокрашенный	12		VLOCL0004
	3-0	2	30	Неокрашенный	12		VLOCL0014
	3-0	2	45	Неокрашенный	12		VLOCL0024
	3-0	2	60	Неокрашенный	12		VLOCL0034
	2-0	3	45	Неокрашенный	12		VLOCL0025
<b>3/8 круга 24 мм</b> 	3-0	2	30	Неокрашенный	12		VLOCL0114
	3-0	2	45	Неокрашенный	12		VLOCL0124
	3-0	2	60	Неокрашенный	12		VLOCL0134
	2-0	3	60	Неокрашенный	12		VLOCL0135

**КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT**

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
<b>1/2 круга 17 мм</b> 	4-0	1.5	15	Зеленый	12		VLOCL0803
	4-0	1.5	30	Зеленый	12	Surgalloy™	VLOCL0813
	3-0	2	15	Зеленый	12		VLOCL0804
	3-0	2	23	Зеленый	12	Surgalloy™	VLOCL0844
	3-0	2	30	Зеленый	12		VLOCL0814
	3-0	2	45	Зеленый	12		VLOCL0824
<b>1/2 круга 26 мм</b> 	4-0	1.5	30	Зеленый	12		VLOCL0613
	3-0	2	15	Зеленый	12		VLOCL0604
	3-0	2	23	Зеленый	12	Surgalloy™	VLOCL0644
	3-0	2	30	Зеленый	12	Surgalloy™	VLOCL0614
	3-0	2	45	Зеленый	12	Surgalloy™	VLOCL0624
	2-0	3	30	Зеленый	12		VLOCL0615
	2-0	3	45	Зеленый	12		VLOCL0625
<b>1/2 круга 27 мм</b> 	2-0	3	23	Зеленый	12		VLOCL2145
<b>1/2 круга 30 мм</b> 	3-0	2	23	Зеленый	12		VLOCL1544
<b>1/2 круга 37 мм</b> 	2-0	3	30	Зеленый	12		VLOCL0315
	2-0	3	45	Зеленый	12		VLOCL0325
	2-0	3	60	Зеленый	12		VLOCL0335
	0	3.5	30	Зеленый	12		VLOCL0316
	0	3.5	30	Зеленый	12		VLOCL0316
	0	3.5	45	Зеленый	12		VLOCL0326
	0	3.5	60	Зеленый	12		VLOCL0336
<b>1/2 круга 48 мм</b> 	0	3.5	45	Зеленый	12		VLOCL0426
	0	3.5	60	Зеленый	12		VLOCL0436
<b>Лыжа 23 мм</b> 	3-0	2	23	Зеленый	12		VLOCL2744

# V-LOC™ PBT

Нерассасывающееся устройство для ушивания ран из полибутиэстера

Надёжно. Быстро. Эффективно.

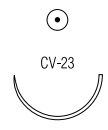
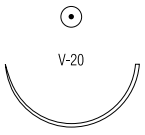
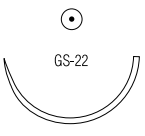
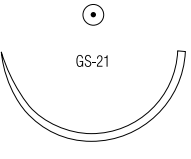


Революционная технология  
сопоставления тканей  
без завязывания узлов.

<b>Описание материала</b>	<p>V-Loc™ PBT – нерассасывающееся устройство для закрытия ран, представляющее собой нерассасывающуюся нить с насечками, соединенную с хирургической иглой с одной стороны, и имеющую петлю с другой. Насечки и петля созданы для возможности соединять ткани без необходимости завязывания узлов. V-Loc™ PBT изготовлен из полибутэстера – кополимера бутилена терефталата и политетраметилена-гликолевого эфира. V-Loc™ PBT выпускается окрашенным в синий цвет. Устройство стерильно упаковано, инертно, не содержит антигенных структур.</p>
<b>Показания</b>	<p>V-Loc™ PBT предназначен для сопоставления мягких тканей, когда необходима их перманентная поддержка. Безопасность и эффективность V-Loc™ PBT не установлена при ушивании фасциальных дефектов (брюшная стенка, грудная клетка, фасциальные дефекты конечностей), межкишечных и сосудистых анастомозах, в нейрохирургии, офтальмологии и микрохирургии.</p>
<b>Применение</b>	<p>Исследования на животных показали, что V-Loc™ PBT вызывает лишь минимальную реакцию тканей, которая связана с имплантацией инородного тела в зависимости от окружающих тканей. Эксперименты на животных убедительно доказали отсутствие антигенной активности, системной токсичности, канцерогенности, мутагенности, тератогенности и негативных эффектов на репродуктивные функции организма.</p>
<b>Срок поддержки раны</b>	<p>Постоянная поддержка.</p>
<b>Стерилизация</b>	<p>Гамма излучение.</p>
<b>Рассасывание</b>	<p>Не рассасывается.</p>
<b>Упаковка</b>	<p>Шовный материал V-LOC™ PBT производится в окрашенном в синий цвет. Возможные варианты размеров от 1 USP (4 EP) до 3-0 USP (2 EP). Стерильный шовный материал поставляется с различными видами перманентно зафиксированных игл. Формируется в коробках по 12 шт.</p> <p>Перед применением, пожалуйста, ознакомьтесь с Инструкцией из каждой индивидуальной упаковки. Внимательно изучите все показания, противопоказания, меры предосторожности и способы применения.</p>

## V-Loc™ PBT

V-Loc™ PBT - нерассасывающееся устройство для ушивания ран с однонаправленными насечками.

КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT								
Описание		Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
		USP	Метрик					
<b>1/2 круга 17 мм</b>	 CV-23	<b>3-0</b>	2	30	Синий	12	Surgalloy™	VLOCN0814
<b>1/2 круга 26 мм</b>	 V-20	<b>2-0</b>	3	30	Синий	12		VLOCN0615
		<b>3-0</b>	2	23	Синий	12		VLOCN0644
<b>1/2 круга 27 мм</b>	 GS-22	<b>0</b>	3.5	45	Синий	12		VLOCN1126
<b>1/2 круга 37 мм</b>	 GS-21	<b>1</b>	4	45	Синий	12		VLOCN0327
		<b>0</b>	3.5	45	Синий	12		VLOCN0326
		<b>2-0</b>	3	45	Синий	12		VLOCN0325



# ИНДЕКСНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ КОДОВ

КОД	МАТЕРИАЛ	СТР.	КОД	МАТЕРИАЛ	СТР.	КОД	МАТЕРИАЛ	СТР.
2-CL-852	Polysorb™	25	88861968-61	Surgilon™	108	88863001-72	Ti-Cron™ / Surgidac™	66
88861727-41	Monosof™ / Dermalon™	93	88861971-71	Surgilon™	108	88863002-62	Ti-Cron™ / Surgidac™	66
88861727-51	Monosof™ / Dermalon™	93	88861982-51	Surgilon™	107	88863003-32	Ti-Cron™ / Surgidac™	66
88861741-11	Monosof™ / Dermalon™	92	88861985-51	Surgilon™	107	88863003-42	Ti-Cron™ / Surgidac™	66
88861741-21	Monosof™ / Dermalon™	92	88861995-31	Surgilon™	108	88863003-52	Ti-Cron™ / Surgidac™	66
88861742-31	Monosof™ / Dermalon™	95	88861995-41	Surgilon™	108	88863008-21	Ti-Cron™ / Surgidac™	66
88861742-41	Monosof™ / Dermalon™	95	88862011-51	Surgilon™	108	88863008-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	66
88861744-41	Monosof™ / Dermalon™	93	88862222-69	Steel™	88	88863012-61	Ti-Cron™ / Surgidac™	67
88861744-51	Monosof™ / Dermalon™	93	88862224-49	Steel™	88	88863017-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	74
88861750-41	Monosof™ / Dermalon™	93	88862224-69	Steel™	88	88863017-61	Ti-Cron™ / Surgidac™	74
88861756-21	Monosof™ / Dermalon™	92	88862224-89	Steel™	88	88863023-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	67
88861756-31	Monosof™ / Dermalon™	92	88862226-69	Steel™	88	88863023-61	Ti-Cron™ / Surgidac™	67
88861756-41	Monosof™ / Dermalon™	92	88862345-53	Steel™	89	88863023-71	Ti-Cron™ / Surgidac™	67
88861756-51	Monosof™ / Dermalon™	92	88862392-49	Steel™	89	88863026-71	Ti-Cron™ / Surgidac™	68
88861757-31	Monosof™ / Dermalon™	92	88862392-69	Steel™	89	88863026-81	Ti-Cron™ / Surgidac™	68
88861757-41	Monosof™ / Dermalon™	92	88862393-69	Steel™	89	88863027-79	Ti-Cron™ / Surgidac™	68
88861799-41	Monosof™ / Dermalon™	93	88862393-89	Steel™	89	88863028-71	Ti-Cron™ / Surgidac™	68
88861799-51	Monosof™ / Dermalon™	93	88862396-89	Steel™	89	88863046-31	Ti-Cron™ / Surgidac™	66
88861883-51	Surgilon™	107	88862407-63	Steel™	88	88863047-31	Ti-Cron™ / Surgidac™	66
88861883-61	Surgilon™	107	88862408-83	Steel™	88	88863047-41	Ti-Cron™ / Surgidac™	66
88861883-71	Surgilon™	107	88862410-89	Steel™	88	88863048-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	66
88861899-51	Surgilon™	106	88862412-89	Steel™	88	88863050-41	Ti-Cron™ / Surgidac™	67
88861902-61	Surgilon™	106	88862413-83	Steel™	88	88863050-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	67
88861906-42	Surgilon™	106	88862414-89	Steel™	89	88863050-61	Ti-Cron™ / Surgidac™	67
88861906-52	Surgilon™	106	88862420-09	Steel™	88	88863052-56	Ti-Cron™ / Surgidac™	74
88861914-83	Surgilon™	106	88862420-83	Steel™	88	88863054-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	67
88861915-71	Surgilon™	107	88862424-89	Steel™	88	88863054-61	Ti-Cron™ / Surgidac™	67
88861917-61	Surgilon™	106	88862586-43	Flexon™	84	88863054-71	Ti-Cron™ / Surgidac™	67
88861917-71	Surgilon™	106	88862592-43	Flexon™	84	88863054-81	Ti-Cron™ / Surgidac™	67
88861917-82	Surgilon™	106	88862597-63	Flexon™	84	88863055-41	Ti-Cron™ / Surgidac™	66
88861918-31	Surgilon™	106	88862615-53	Flexon™	84	88863056-89	Ti-Cron™ / Surgidac™	67
88861918-41	Surgilon™	106	88862617-53	Flexon™	84	88863059-53	Ti-Cron™ / Surgidac™	69
88861918-51	Surgilon™	106	88862623-53	Flexon™	84	88863062-41	Ti-Cron™ / Surgidac™	69
88861919-31	Surgilon™	106	88862627-41	Ti-Cron™ / Surgidac™	70	88863062-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	69
88861919-41	Surgilon™	106	88862631-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	74	88863065-61	Ti-Cron™ / Surgidac™	67
88861919-51	Surgilon™	106	88862636-56	Ti-Cron™ / Surgidac™	70	88863070-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	67
88861919-61	Surgilon™	106	88862658-56	Ti-Cron™ / Surgidac™	74	88863082-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	73
88861919-71	Surgilon™	106	88862775-21	Ti-Cron™ / Surgidac™	70	88863082-61	Ti-Cron™ / Surgidac™	73
88861920-62	Surgilon™	106	88862775-31	Ti-Cron™ / Surgidac™	70	88863083-56	Ti-Cron™ / Surgidac™	71
88861920-72	Surgilon™	106	88862775-41	Ti-Cron™ / Surgidac™	70	88863084-46	Ti-Cron™ / Surgidac™	71
88861920-93	Surgilon™	106	88862801-21	Ti-Cron™ / Surgidac™	70	88863086-56	Ti-Cron™ / Surgidac™	71
88861922-71	Surgilon™	107	88862808-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	75	88863087-31	Ti-Cron™ / Surgidac™	71
88861932-51	Surgilon™	107	88862815-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	76	88863087-41	Ti-Cron™ / Surgidac™	71
88861934-53	Surgilon™	107	88862839-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	71	88863087-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	71
88861935-41	Surgilon™	107	88862862-34	Ti-Cron™ / Surgidac™	69	88863088-41	Ti-Cron™ / Surgidac™	75
88861935-51	Surgilon™	107	88862877-56	Ti-Cron™ / Surgidac™	75	88863088-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	75
88861951-41	Surgilon™	108	88862879-56	Ti-Cron™ / Surgidac™	75	88863090-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	73
88861951-51	Surgilon™	108	88862880-41	Ti-Cron™ / Surgidac™	75	88863090-61	Ti-Cron™ / Surgidac™	73
88861951-61	Surgilon™	108	88862880-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	75	88863090-71	Ti-Cron™ / Surgidac™	73
88861964-51	Surgilon™	108	88862947-53	Ti-Cron™ / Surgidac™	69	88863091-56	Ti-Cron™ / Surgidac™	71
88861964-61	Surgilon™	108	88862981-56	Ti-Cron™ / Surgidac™	72	88863092-61	Ti-Cron™ / Surgidac™	76



# ИНДЕКСНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ КОДОВ

КОД	МАТЕРИАЛ	СТР.	КОД	МАТЕРИАЛ	СТР.	КОД	МАТЕРИАЛ	СТР.
88863092-71	Ti-Cron™ / Surgidac™	76	88863227-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	71	88863395-71	Ti-Cron™ / Surgidac™	68
88863093-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	72	88863229-31	Ti-Cron™ / Surgidac™	70	88863395-81	Ti-Cron™ / Surgidac™	68
88863093-61	Ti-Cron™ / Surgidac™	72	88863229-41	Ti-Cron™ / Surgidac™	70	8886400241	Novafil™	100
88863097-61	Ti-Cron™ / Surgidac™	73	88863230-56	Ti-Cron™ / Surgidac™	70	8886402721	Novafil™	101
88863097-71	Ti-Cron™ / Surgidac™	73	88863233-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	74	8886440023	Novafil™	101
88863103-71	Ti-Cron™ / Surgidac™	74	88863235-56	Ti-Cron™ / Surgidac™	75	8886440123	Novafil™	101
88863107-31	Ti-Cron™ / Surgidac™	74	88863240-56	Ti-Cron™ / Surgidac™	76	8886440133	Novafil™	101
88863111-79	Ti-Cron™ / Surgidac™	73	8886324931	Ti-Cron™ / Surgidac™	70	8886440233	Novafil™	101
88863113-71	Ti-Cron™ / Surgidac™	73	88863256-31	Ti-Cron™ / Surgidac™	72	8886440243	Novafil™	101
88863113-81	Ti-Cron™ / Surgidac™	73	88863256-41	Ti-Cron™ / Surgidac™	72	8886440343	Novafil™	101
88863119-61	Ti-Cron™ / Surgidac™	76	88863256-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	72	8886441003	Novafil™	101
88863125-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	75	88863256-61	Ti-Cron™ / Surgidac™	72	8886441013	Novafil™	101
88863128-82	Ti-Cron™ / Surgidac™	67	88863257-62	Ti-Cron™ / Surgidac™	72	8886441023	Novafil™	101
88863139-21	Ti-Cron™ / Surgidac™	70	88863267-42	Ti-Cron™ / Surgidac™	72	8886441853	Novafil™	101
88863154-09	Ti-Cron™ / Surgidac™	68	88863269-56	Ti-Cron™ / Surgidac™	71	8886441913	Novafil™	100
88863155-81	Ti-Cron™ / Surgidac™	68	88863271-21	Ti-Cron™ / Surgidac™	71	8886441923	Novafil™	100
88863157-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	75	88863271-31	Ti-Cron™ / Surgidac™	71	8886441933	Novafil™	100
88863159-31	Ti-Cron™ / Surgidac™	75	88863271-41	Ti-Cron™ / Surgidac™	71	8886442023	Novafil™	100
88863159-41	Ti-Cron™ / Surgidac™	75	88863274-61	Ti-Cron™ / Surgidac™	73	8886442033	Novafil™	100
88863159-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	75	88863277-56	Ti-Cron™ / Surgidac™	71	8886442043	Novafil™	100
88863160-31	Ti-Cron™ / Surgidac™	75	88863280-11	Ti-Cron™ / Surgidac™	70	8886442153	Novafil™	100
88863160-41	Ti-Cron™ / Surgidac™	75	88863280-21	Ti-Cron™ / Surgidac™	70	8886442233	Novafil™	100
88863160-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	75	88863280-31	Ti-Cron™ / Surgidac™	70	8886442243	Novafil™	100
88863163-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	69	88863280-41	Ti-Cron™ / Surgidac™	70	8886442253	Novafil™	100
88863163-71	Ti-Cron™ / Surgidac™	69	88863290-56	Ti-Cron™ / Surgidac™	76	8886442441	Novafil™	100
88863167-41	Ti-Cron™ / Surgidac™	76	8886329541	Ti-Cron™ / Surgidac™	70	8886442451	Novafil™	100
88863167-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	76	88863297-21	Ti-Cron™ / Surgidac™	70	8886442461	Novafil™	100
88863167-61	Ti-Cron™ / Surgidac™	76	88863306-56	Ti-Cron™ / Surgidac™	72	8886442651	Novafil™	100
88863182-41	Ti-Cron™ / Surgidac™	74	88863309-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	68	8886443671	Novafil™	100
88863182-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	74	88863309-71	Ti-Cron™ / Surgidac™	68	8886445041	Novafil™	102
88863185-31	Ti-Cron™ / Surgidac™	72	88863314-31	Ti-Cron™ / Surgidac™	70	8886445241	Novafil™	102
88863185-41	Ti-Cron™ / Surgidac™	72	88863323-56	Ti-Cron™ / Surgidac™	71	8886445251	Novafil™	102
88863185-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	72	88863324-56	Ti-Cron™ / Surgidac™	72	8886445261	Novafil™	102
88863185-61	Ti-Cron™ / Surgidac™	72	88863336-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	72	8886445561	Novafil™	102
88863185-71	Ti-Cron™ / Surgidac™	72	88863356-56	Ti-Cron™ / Surgidac™	72	8886445571	Novafil™	102
88863186-21	Ti-Cron™ / Surgidac™	71	88863365-56	Ti-Cron™ / Surgidac™	74	8886445951	Novafil™	102
88863186-31	Ti-Cron™ / Surgidac™	71	88863369-31	Ti-Cron™ / Surgidac™	71	8886446371	Novafil™	102
88863186-41	Ti-Cron™ / Surgidac™	71	88863369-41	Ti-Cron™ / Surgidac™	71	88864703-01V	Vascufil™	80
88863186-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	71	88863369-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	71	88864703-11V	Vascufil™	80
88863202-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	76	88863372-82	Ti-Cron™ / Surgidac™	73	88864704-01V	Vascufil™	80
88863204-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	75	88863376-81	Ti-Cron™ / Surgidac™	73	88864704-11V	Vascufil™	80
88863205-41	Ti-Cron™ / Surgidac™	73	88863380-52	Ti-Cron™ / Surgidac™	66	88864705-01V	Vascufil™	80
88863205-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	73	88863380-62	Ti-Cron™ / Surgidac™	66	88864705-11V	Vascufil™	80
88863205-61	Ti-Cron™ / Surgidac™	73	88863380-72	Ti-Cron™ / Surgidac™	66	88864709-11V	Vascufil™	80
88863212-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	76	88863380-82	Ti-Cron™ / Surgidac™	66	88864710-11V	Vascufil™	80
88863218-56	Ti-Cron™ / Surgidac™	75	88863381-09	Ti-Cron™ / Surgidac™	66	88864710-21V	Vascufil™	80
88863219-56	Ti-Cron™ / Surgidac™	75	88863381-89	Ti-Cron™ / Surgidac™	66	88864711-21V	Vascufil™	80
88863221-56	Ti-Cron™ / Surgidac™	75	88863385-56	Ti-Cron™ / Surgidac™	71	88864714-11V	Vascufil™	81
8886322631	Ti-Cron™ / Surgidac™	70	88863393-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	73	88864716-31V	Vascufil™	80
88863222-56	Ti-Cron™ / Surgidac™	76	88863395-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	68	88864719-21V	Vascufil™	80
88863227-41	Ti-Cron™ / Surgidac™	71	88863395-61	Ti-Cron™ / Surgidac™	68	88864719-31V	Vascufil™	80

# ИНДЕКСНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ КОДОВ

КОД	МАТЕРИАЛ	СТР.	КОД	МАТЕРИАЛ	СТР.	КОД	МАТЕРИАЛ	СТР.
88864722-21V	Vascufil™	80	8886621321	Maxon™	48	8886664141	Maxon™	44
88864730-51V	Vascufil™	81	8886621721	Maxon™	47	8886664151	Maxon™	44
88864731-31V	Vascufil™	81	8886621721	Maxon™	48	8886674441	Maxon™	45
88864731-41V	Vascufil™	81	8886621731	Maxon™	47	8886674451	Maxon™	45
88864731-51V	Vascufil™	81	8886621731	Maxon™	48	8886674551	Maxon™	45
88864734-11V	Vascufil™	81	8886621741	Maxon™	47	8886675551	Maxon™	45
88864734-21V	Vascufil™	81	8886621741	Maxon™	48	8886675561	Maxon™	45
88864739-21V	Vascufil™	80	8886622131	Maxon™	47	8886675571	Maxon™	45
88864739-31V	Vascufil™	80	8886622131	Maxon™	48	8886676971	Maxon™	45
88864741-11V	Vascufil™	80	8886622943	Maxon™	47	8886678771	Maxon™	45
88864741-21V	Vascufil™	80	8886622943	Maxon™	48	8886690831	Maxon™	45
88864742-15V	Vascufil™	80	8886623331	Maxon™	47	8886690841	Maxon™	45
88864750-31V	Vascufil™	81	8886623331	Maxon™	48	88868675-01	Ti-Cron™ / Surgidac™	76
88864750-41V	Vascufil™	81	8886623341	Maxon™	47	88868677-01	Ti-Cron™ / Surgidac™	76
88864750-51V	Vascufil™	81	8886623341	Maxon™	48	88868678-01	Ti-Cron™ / Surgidac™	76
88864756-11V	Vascufil™	80	8886623351	Maxon™	47	88868679-01	Ti-Cron™ / Surgidac™	76
88864794-01V	Vascufil™	81	8886623351	Maxon™	48	88868682-01	Ti-Cron™ / Surgidac™	76
8886449041	Novafil™	100	8886623531	Maxon™	47	C-214	Caprosyn™	30
8886449051	Novafil™	100	8886623531	Maxon™	48	CC-1945G	Caprosyn™	33
8886453863	Novafil™	102	8886623541	Maxon™	47	CC-543	Caprosyn™	30
8886455441	Novafil™	100	8886623541	Maxon™	48	CC-658	Caprosyn™	32
8886458243	Novafil™	101	8886623741	Maxon™	49	CC-801	Caprosyn™	32
8886600741	Maxon™	44	8886623761	Maxon™	49	CC-802	Caprosyn™	32
8886600751	Maxon™	44	8886627761	Maxon™	50	CC-803	Caprosyn™	32
8886601563	Maxon™	44	8886629571	Maxon™	50	CC-810	Caprosyn™	32
8886603641	Maxon™	47	8886631962	Maxon™	49	CC-811	Caprosyn™	32
8886603641	Maxon™	48	8886631972	Maxon™	49	CC-812	Caprosyn™	32
8886605731	Maxon™	47	8886639053	Maxon™	45	CC-813	Caprosyn™	32
8886605731	Maxon™	48	8886640351	Maxon™	49	CC-830	Caprosyn™	32
8886605941	Maxon™	45	8886640451	Maxon™	49	CC-844	Caprosyn™	32
8886611831	Maxon™	44	8886641971	Maxon™	49	CC-845	Caprosyn™	32
8886612411	Maxon™	46	8886645661	Maxon™	49	CC-883	Caprosyn™	32
8886612421	Maxon™	46	8886646221	Maxon™	47	CC-884	Caprosyn™	32
8886612701	Maxon™	46	8886646221	Maxon™	48	CC-885	Caprosyn™	32
8886612711	Maxon™	46	8886646231	Maxon™	47	CC-904	Caprosyn™	33
8886613431	Maxon™	47	8886646231	Maxon™	48	CC-905	Caprosyn™	33
8886613431	Maxon™	48	8886653211	Maxon™	46	CC-913	Caprosyn™	32
8886613901	Maxon™	46	8886653221	Maxon™	46	CC-914	Caprosyn™	32
8886614501	Maxon™	46	8886653311	Maxon™	46	CC-915	Caprosyn™	32
8886614811	Maxon™	46	8886660521	Maxon™	44	CC-923	Caprosyn™	32
8886614921	Maxon™	47	8886660531	Maxon™	44	CC-924	Caprosyn™	32
8886614921	Maxon™	48	8886660821	Maxon™	44	CC-925	Caprosyn™	32
8886620721	Maxon™	47	8886660831	Maxon™	44	CC-983	Caprosyn™	30
8886620721	Maxon™	48	8886660841	Maxon™	44	CD-3113-K	Ti-Cron™ / Surgidac™	69
8886620731	Maxon™	47	8886661231	Maxon™	44	CD-3123-K	Ti-Cron™ / Surgidac™	69
8886620731	Maxon™	48	8886661831	Maxon™	44	CL-030	Polysorb™	27
8886620741	Maxon™	47	8886661841	Maxon™	44	CL-047	Polysorb™	27
8886620741	Maxon™	48	8886661851	Maxon™	44	CL-055	Polysorb™	27
8886621311	Maxon™	47	8886662801	Maxon™	46	CL-10-MG	Polysorb™	22
8886621311	Maxon™	48	8886663931	Maxon™	44	CL-11-MG	Polysorb™	22
8886621321	Maxon™	47	8886663941	Maxon™	44	CL-201-M	Polysorb™	22

# ИНДЕКСНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ КОДОВ

КОД	МАТЕРИАЛ	СТР.	КОД	МАТЕРИАЛ	СТР.	КОД	МАТЕРИАЛ	СТР.
CL-21-MG	■ Polysorb™	23	CL-824	■ Polysorb™	23	CL-933	■ Polysorb™	17
CL-232	■ Polysorb™	21	CL-824-L	■ Polysorb™	23	CL-936	■ Polysorb™	17
CL-239	■ Polysorb™	22	CL-825	■ Polysorb™	23	CL-937	■ Polysorb™	17
CL-31-MG	■ Polysorb™	23	CL-833	■ Polysorb™	17	CL-941	■ Polysorb™	26
CL-330	■ Polysorb™	21	CL-835-L	■ Polysorb™	23	CL-942	■ Polysorb™	26
CL-457	■ Polysorb™	19	CL-837	■ Polysorb™	26	CL-943	■ Polysorb™	26
CL-460	■ Polysorb™	20	CL-838	■ Polysorb™	26	CL-944	■ Polysorb™	26
CL-461	■ Polysorb™	20	CL-839	■ Polysorb™	26	CL-945	■ Polysorb™	26
CL-510	■ Polysorb™	26	CL-840	■ Polysorb™	26	CL-946	■ Polysorb™	26
CL-511	■ Polysorb™	26	CL-841	■ Polysorb™	26	CL-948	■ Polysorb™	25
CL-513	■ Polysorb™	26	CL-842	■ Polysorb™	22	CL-949	■ Polysorb™	25
CL-516	■ Polysorb™	26	CL-844	■ Polysorb™	22	CL-950	■ Polysorb™	25
CL-517	■ Polysorb™	26	CL-855	■ Polysorb™	23	CL-951	■ Polysorb™	25
CL-528	■ Polysorb™	16	CL-862	■ Polysorb™	23	CL-953	■ Polysorb™	22
CL-533	■ Polysorb™	17	CL-863	■ Polysorb™	23	CL-954	■ Polysorb™	22
CL-534	■ Polysorb™	17	CL-864	■ Polysorb™	23	CL-955	■ Polysorb™	22
CL-543	■ Polysorb™	17	CL-865	■ Polysorb™	23	CL-957	■ Polysorb™	25
CL-544	■ Polysorb™	17	CL-866	■ Polysorb™	23	CL-964	■ Polysorb™	23
CL-568	■ Polysorb™	17	CL-867	■ Polysorb™	16	CL-968	■ Polysorb™	23
CL-569	■ Polysorb™	17	CL-868	■ Polysorb™	16	CL-971	■ Polysorb™	22
CL-5-M	■ Polysorb™	22	CL-869	■ Polysorb™	16	CL-974	■ Polysorb™	23
CL-602	■ Polysorb™	26	CL-870	■ Polysorb™	16	CL-992	■ Polysorb™	16
CL-603	■ Polysorb™	26	CL-871	■ Polysorb™	21	CLT-259	■ Polysorb™	25
CL-622-M	■ Polysorb™	23	CL-882	■ Polysorb™	21	CLT-952	■ Polysorb™	25
CL-63	■ Polysorb™	23	CL-883	■ Polysorb™	21	CLT-954	■ Polysorb™	25
CL-633-M	■ Polysorb™	23	CL-885	■ Polysorb™	21	CM-126	■ Biosyn™	38
CL-64-M	■ Polysorb™	23	CL-892	■ Polysorb™	20	CM-208	■ Biosyn™	38
CL-665-M	■ Polysorb™	23	CL-893	■ Polysorb™	20	CM-222	■ Biosyn™	37
CL-673-G	■ Polysorb™	24	CL-894	■ Polysorb™	20	CM-528	■ Biosyn™	36
CL-6-M	■ Polysorb™	22	CL-903	■ Polysorb™	23	CM-544	■ Biosyn™	36
CL-739	■ Polysorb™	26	CL-904	■ Polysorb™	23	CM-740L	■ Biosyn™	41
CL-740-L	■ Polysorb™	26	CL-905	■ Polysorb™	23	CM-767L	■ Biosyn™	40
CL-741-L	■ Polysorb™	26	CL-906	■ Polysorb™	23	CM-776L	■ Biosyn™	40
CL-769	■ Polysorb™	16	CL-911	■ Polysorb™	23	CM-780L	■ Biosyn™	41
CL-779	■ Polysorb™	23	CL-913	■ Polysorb™	23	CM-790L	■ Biosyn™	40
CL-801	■ Polysorb™	23	CL-914	■ Polysorb™	23	CM-810	■ Biosyn™	40
CL-802	■ Polysorb™	23	CL-915	■ Polysorb™	23	CM-811	■ Biosyn™	40
CL-803	■ Polysorb™	23	CL-916	■ Polysorb™	17	CM-812	■ Biosyn™	40
CL-804	■ Polysorb™	17	CL-917	■ Polysorb™	17	CM-813	■ Biosyn™	40
CL-805	■ Polysorb™	17	CL-918	■ Polysorb™	17	CM-816	■ Biosyn™	36
CL-809	■ Polysorb™	22	CL-919	■ Polysorb™	17	CM-831	■ Biosyn™	39
CL-810	■ Polysorb™	22	CL-922	■ Polysorb™	22	CM-832	■ Biosyn™	39
CL-811	■ Polysorb™	22	CL-923	■ Polysorb™	22	CM-844	■ Biosyn™	40
CL-812	■ Polysorb™	22	CL-924	■ Polysorb™	22	CM-845	■ Biosyn™	40
CL-813	■ Polysorb™	22	CL-925	■ Polysorb™	22	CM-879	■ Biosyn™	36
CL-814	■ Polysorb™	22	CL-926	■ Polysorb™	22	CM-882	■ Biosyn™	39
CL-815	■ Polysorb™	17	CL-927	■ Polysorb™	17	CM-883	■ Biosyn™	39
CL-816	■ Polysorb™	17	CL-928	■ Polysorb™	17	CM-884	■ Biosyn™	39
CL-817	■ Polysorb™	17	CL-929	■ Polysorb™	17	CM-904	■ Biosyn™	40
CL-818	■ Polysorb™	17	CL-931	■ Polysorb™	22	CM-905	■ Biosyn™	40
CL-823	■ Polysorb™	15	CL-932	■ Polysorb™	22	CM-914	■ Biosyn™	40

# ИНДЕКСНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ КОДОВ

КОД	МАТЕРИАЛ	СТР.	КОД	МАТЕРИАЛ	СТР.	КОД	МАТЕРИАЛ	СТР.
CM-922	Biosyn™	40	CV-2275G	Velosorb™ Fast	11	GC-122	Caprosyn™	32
CM-923	Biosyn™	40	CV-2279	Velosorb™ Fast	11	GC-123	Caprosyn™	32
CM-924	Biosyn™	40	CV-2280	Velosorb™ Fast	11	GC-124	Caprosyn™	32
CM-925	Biosyn™	40	CV-2293	Velosorb™ Fast	11	GC-321	Caprosyn™	32
CM-953	Biosyn™	40	CV-3100	Velosorb™ Fast	9	GC-322	Caprosyn™	32
CM-954	Biosyn™	40	CV-3110	Velosorb™ Fast	9	GC-323	Caprosyn™	32
CM-966	Biosyn™	40	CV-3120	Velosorb™ Fast	9	GL-120	Polysorb™	21
CN-723	Monosof™ / Dermalon™	96	CV-322	Velosorb™ Fast	10	GL-121	Polysorb™	21
CN-791	Monosof™ / Dermalon™	95	CV-323	Velosorb™ Fast	10	GL-122	Polysorb™	21
CN-793	Monosof™ / Dermalon™	95	CV-415	Velosorb™ Fast	9	GL-123	Polysorb™	21
CN-819	Monosof™ / Dermalon™	94	CV-416G	Velosorb™ Fast	9	GL-124	Polysorb™	21
CN-822	Monosof™ / Dermalon™	94	CV-417G	Velosorb™ Fast	9	GL-125	Polysorb™	21
CN-825-L	Monosof™ / Dermalon™	96	CV-418	Velosorb™ Fast	9	GL-126	Polysorb™	22
CN-830-L	Monosof™ / Dermalon™	96	CV-4721	Velosorb™ Fast	7	GL-127	Polysorb™	22
CP-411	Surgipro™ II / Surgipro™	59	CV-4731	Velosorb™ Fast	7	GL-128	Polysorb™	22
CP-412	Surgipro™ II / Surgipro™	59	CV-485	Velosorb™ Fast	7	GL-129	Polysorb™	22
CP-414	Surgipro™ II / Surgipro™	60	CV-486	Velosorb™ Fast	7	GL-181	Polysorb™	20
CP-415	Surgipro™ II / Surgipro™	60	CV-500G	Velosorb™ Fast	11	GL-182	Polysorb™	20
CP-423	Surgipro™ II / Surgipro™	60	CV-501G	Velosorb™ Fast	11	GL-183	Polysorb™	20
CP-424	Surgipro™ II / Surgipro™	60	CV-55	Velosorb™ Fast	10	GL-191	Polysorb™	20
CP-425	Surgipro™ II / Surgipro™	60	CV-56	Velosorb™ Fast	10	GL-192	Polysorb™	20
CP-433	Surgipro™ II / Surgipro™	60	CV-57	Velosorb™ Fast	10	GL-222	Polysorb™	21
CP-434	Surgipro™ II / Surgipro™	60	CV-604	Velosorb™ Fast	10	GL-223	Polysorb™	21
CP-435	Surgipro™ II / Surgipro™	60	CV-605	Velosorb™ Fast	10	GL-224	Polysorb™	21
CP-443	Surgipro™ II / Surgipro™	54	CV-606	Velosorb™ Fast	10	GL-225	Polysorb™	21
CP-455	Surgipro™ II / Surgipro™	60	CV-7190	Velosorb™ Fast	11	GL-226	Polysorb™	21
CP-535	Surgipro™ II / Surgipro™	60	CV-7191	Velosorb™ Fast	11	GL-282	Polysorb™	20
CP-824	Surgipro™ II / Surgipro™	60	CV-8644	Velosorb™ Fast	6	GL-302	Polysorb™	19
CP-824-L	Surgipro™ II / Surgipro™	61	CV-8977	Velosorb™ Fast	6	GL-303	Polysorb™	19
CP-825	Surgipro™ II / Surgipro™	60	CV-8978	Velosorb™ Fast	6	GL-321	Polysorb™	21
CP-834-L	Surgipro™ II / Surgipro™	61	CV-8979	Velosorb™ Fast	6	GL-322	Polysorb™	21
CP-844	Surgipro™ II / Surgipro™	63	CV-8980	Velosorb™ Fast	6	GL-323	Polysorb™	21
CS-423	Sofsilk™	115	CV-9007G	Velosorb™ Fast	6	GL-332	Polysorb™	21
CS-424	Sofsilk™	115	CV-916	Velosorb™ Fast	11	GL-522	Polysorb™	19
CS-575	Sofsilk™	115	CV-917	Velosorb™ Fast	11	GL-523	Polysorb™	19
CS-791	Sofsilk™	114	CV-918	Velosorb™ Fast	11	GL-524	Polysorb™	19
CS-792	Sofsilk™	114	CV-919	Velosorb™ Fast	11	GL-881	Polysorb™	19
CS-793	Sofsilk™	114	CV-931G	Velosorb™ Fast	7	GL-884	Polysorb™	20
CS-794	Sofsilk™	114	CV-932G	Velosorb™ Fast	7	GL-885	Polysorb™	20
CV-0046	Velosorb™ Fast	11	CV-944	Velosorb™ Fast	10	GL-889	Polysorb™	19
CV-1002	Velosorb™ Fast	11	CV-945	Velosorb™ Fast	10	GL-890	Polysorb™	19
CV-1213	Velosorb™ Fast	9	CV-946	Velosorb™ Fast	10	GLS-121	Polysorb™	21
CV-1214	Velosorb™ Fast	9	CV-947	Velosorb™ Fast	10	GLS-122	Polysorb™	21
CV-1215	Velosorb™ Fast	9	CV-9590	Velosorb™ Fast	10	GLS-123	Polysorb™	21
CV-1324	Velosorb™ Fast	10	CV-9591	Velosorb™ Fast	10	GLS-323	Polysorb™	21
CV-1673	Velosorb™ Fast	10	CV-9592	Velosorb™ Fast	10	GLT-69-MG	Polysorb™	25
CV-1674G	Velosorb™ Fast	11	CV-9936G	Velosorb™ Fast	7	GM-121	Biosyn™	39
CV-2003G	Velosorb™ Fast	11	CV-9975G	Velosorb™ Fast	10	GM-122	Biosyn™	39
CV-2216	Velosorb™ Fast	11	EL-415	Polysorb™	24	GM-123	Biosyn™	39
CV-2217	Velosorb™ Fast	11	EL-450	Polysorb™	24	GM-125	Biosyn™	39
CV-2218	Velosorb™ Fast	11	GC-121	Caprosyn™	32	GM-181	Biosyn™	39

# ИНДЕКСНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ КОДОВ

КОД	МАТЕРИАЛ	СТР.	КОД	МАТЕРИАЛ	СТР.	КОД	МАТЕРИАЛ	СТР.
GM-183	Biosyn™	39	L-1745K	Polysorb™	27	LL-225	Polysorb™	15
GM-222	Biosyn™	39	L-1785K	Polysorb™	27	LL-226	Polysorb™	15
GM-223	Biosyn™	39	L-1787-K	Polysorb™	27	LL-322	Polysorb™	15
GM-281	Biosyn™	39	L-1792-K	Polysorb™	27	M-74	Biosyn™	36
GM-282	Biosyn™	39	L-23	Polysorb™	14	M-75	Biosyn™	36
GM-291	Biosyn™	39	L-23	Polysorb™	14	N-1603G	Monosof™ / Dermalon™	97
GM-322	Biosyn™	39	L-26	Polysorb™	14	N-2500	Monosof™ / Dermalon™	97
GM-323	Biosyn™	39	L-26	Polysorb™	14	N-2510	Monosof™ / Dermalon™	97
GM-324	Biosyn™	39	L-27	Polysorb™	14	N-2512	Monosof™ / Dermalon™	97
GM-326	Biosyn™	39	L-27	Polysorb™	14	N-2530	Monosof™ / Dermalon™	97
GM-327	Biosyn™	39	L-2748-K	Polysorb™	27	N-2532	Monosof™ / Dermalon™	97
GM-332	Biosyn™	39	L-2752K	Polysorb™	27	N-2543	Monosof™ / Dermalon™	97
GM-421	Biosyn™	39	L-28	Polysorb™	14	N-2546	Monosof™ / Dermalon™	97
GM-432	Biosyn™	39	L-28	Polysorb™	14	N-2547	Monosof™ / Dermalon™	97
GM-67-M	Biosyn™	39	L-2800	Polysorb™	24	N-2548	Monosof™ / Dermalon™	97
GM-875	Biosyn™	38	L-3	Polysorb™	14	N-2714-K	Monosof™ / Dermalon™	95
GMM-341L	Maxon™	49	L-3	Polysorb™	14	N-2716-K	Monosof™ / Dermalon™	95
GMM-343L	Maxon™	49	L-33	Polysorb™	14	N-2760-K	Monosof™ / Dermalon™	95
GMM-344L	Maxon™	49	L-33	Polysorb™	14	N-2770-K	Monosof™ / Dermalon™	95
GMM-496L	Maxon™	50	L-36	Polysorb™	14	N-64	Monosof™ / Dermalon™	92
GMM-497L	Maxon™	50	L-36	Polysorb™	14	P-2756K	Surgipro™ II / Surgipro™	56
GMM-632L	Maxon™	49	L-38	Polysorb™	14	S-1173	Sofsilk™	112
GMM-634L	Maxon™	49	L-38	Polysorb™	14	S-1734-K	Sofsilk™	114
GMM-806L	Maxon™	50	L-39	Polysorb™	14	S-1789-K	Sofsilk™	113
GMM-807L	Maxon™	50	L-39	Polysorb™	14	SBS-1883G	Surgilon™	108
GMM-873L	Maxon™	50	L-40	Polysorb™	14	SBS-1884G	Surgilon™	108
GMMT-90L	Maxon™	50	L-40	Polysorb™	14	SBS-1928G	Surgilon™	108
GN-283	Monosof™ / Dermalon™	96	L-403	Polysorb™	14	SC-3625G	Caprosyn™	31
GN-284	Monosof™ / Dermalon™	96	L-403	Polysorb™	14	SC-3626G	Caprosyn™	31
GP-282	Surgipro™ II / Surgipro™	61	L-404	Polysorb™	14	SC-5587G	Caprosyn™	31
GS-451	Sofsilk™	115	L-404	Polysorb™	14	SC-5590G	Caprosyn™	31
GS-452	Sofsilk™	115	L-405	Polysorb™	14	SC-5616G	Caprosyn™	31
GS-62-M	Sofsilk™	115	L-405	Polysorb™	14	SC-5617G	Caprosyn™	31
GS-822	Sofsilk™	115	L-41	Polysorb™	14	SC-5618G	Caprosyn™	31
GS-823	Sofsilk™	115	L-41	Polysorb™	14	SC-5626G	Caprosyn™	31
GS-824	Sofsilk™	115	L-42	Polysorb™	14	SC-5637G	Caprosyn™	31
GS-832	Sofsilk™	115	L-42	Polysorb™	14	SC-5638G	Caprosyn™	31
GS-833	Sofsilk™	115	L-73	Polysorb™	14	SC-5679	Caprosyn™	31
GS-834	Sofsilk™	115	L-73	Polysorb™	14	SC-5686G	Caprosyn™	31
L-11	Polysorb™	14	L-76	Polysorb™	14	SC-5688G	Caprosyn™	31
L-11	Polysorb™	14	L-76	Polysorb™	14	SC-5689G	Caprosyn™	31
L-12	Polysorb™	14	LL-101	Polysorb™	15	SC-5690G	Caprosyn™	31
L-12	Polysorb™	14	LL-112	Polysorb™	15	SC-5779	Caprosyn™	31
L-13	Polysorb™	14	LL-113	Polysorb™	15	SC-5780G	Caprosyn™	31
L-13	Polysorb™	14	LL-114	Polysorb™	15	SC-586	Caprosyn™	30
L-14	Polysorb™	14	LL-115	Polysorb™	15	SC-587	Caprosyn™	30
L-14	Polysorb™	14	LL-116	Polysorb™	15	SC-643	Caprosyn™	30
L-15	Polysorb™	14	LL-221	Polysorb™	15	SC-644	Caprosyn™	30
L-15	Polysorb™	14	LL-222	Polysorb™	15	SC-690G	Caprosyn™	30
L-1669-K	Polysorb™	27	LL-223	Polysorb™	15	SC-691	Caprosyn™	30
L-1742K	Polysorb™	27	LL-224	Polysorb™	15	SC-692	Caprosyn™	30

# ИНДЕКСНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ КОДОВ

КОД	МАТЕРИАЛ	СТР.	КОД	МАТЕРИАЛ	СТР.	КОД	МАТЕРИАЛ	СТР.
SCD-2864G	Ti-Cron™ / Surgidac™	69	SL-722	Polysorb™	16	SN-653	Monosoft™ / Dermalon™	92
SL-1615	Polysorb™	18	SL-822	Polysorb™	15	SN-658	Monosoft™ / Dermalon™	93
SL-1625	Polysorb™	18	SL-823	Polysorb™	15	SN-659	Monosoft™ / Dermalon™	92
SL-1653	Polysorb™	19	SM-3625	Biosyn™	37	SN-660	Monosoft™ / Dermalon™	92
SL-1657	Polysorb™	19	SM-431	Biosyn™	38	SN-661	Monosoft™ / Dermalon™	92
SL-1689	Polysorb™	18	SM-432	Biosyn™	38	SN-661G	Monosoft™ / Dermalon™	92
SL-432	Polysorb™	20	SM-5624	Biosyn™	37	SN-662	Monosoft™ / Dermalon™	92
SL-5626	Polysorb™	18	SM-5627	Biosyn™	37	SN-663	Monosoft™ / Dermalon™	93
SL-5627	Polysorb™	18	SM-5628	Biosyn™	37	SN-663G	Monosoft™ / Dermalon™	93
SL-5628	Polysorb™	18	SM-5637	Biosyn™	37	SN-664	Monosoft™ / Dermalon™	93
SL-5628G	Polysorb™	18	SM-5638	Biosyn™	37	SN-664-G	Monosoft™ / Dermalon™	93
SL-5633	Polysorb™	18	SM-5678	Biosyn™	37	SN-665	Monosoft™ / Dermalon™	92
SL-5636	Polysorb™	18	SM-5679	Biosyn™	37	SN-666	Monosoft™ / Dermalon™	92
SL-5637	Polysorb™	18	SM-5679G	Biosyn™	37	SN-667	Monosoft™ / Dermalon™	92
SL-5638	Polysorb™	18	SM-5687	Biosyn™	37	SN-671	Monosoft™ / Dermalon™	93
SL-5640	Polysorb™	18	SM-5688	Biosyn™	37	SN-673	Monosoft™ / Dermalon™	93
SL-5640G	Polysorb™	18	SM-5690	Biosyn™	37	SN-674	Monosoft™ / Dermalon™	93
SL-5641	Polysorb™	18	SM-632	Biosyn™	36	SN-681	Monosoft™ / Dermalon™	94
SL-5678	Polysorb™	18	SM-633	Biosyn™	36	SN-688	Monosoft™ / Dermalon™	93
SL-5679	Polysorb™	18	SM-643	Biosyn™	37	SN-689	Monosoft™ / Dermalon™	93
SL-5680	Polysorb™	18	SM-690	Biosyn™	36	SN-694	Monosoft™ / Dermalon™	93
SL-5686	Polysorb™	18	SM-691	Biosyn™	36	SN-728	Monosoft™ / Dermalon™	94
SL-5687	Polysorb™	18	SM-693	Biosyn™	36	SN-747	Monosoft™ / Dermalon™	93
SL-5687G	Polysorb™	18	SM-822	Biosyn™	36	SN-758	Monosoft™ / Dermalon™	93
SL-5688	Polysorb™	18	SM-823	Biosyn™	36	SN-762	Monosoft™ / Dermalon™	92
SL-5690	Polysorb™	18	SMM-5043	Maxon™	46	SN-763	Monosoft™ / Dermalon™	92
SL-586	Polysorb™	16	SMM-5044	Maxon™	46	SN-764	Monosoft™ / Dermalon™	93
SL-587	Polysorb™	16	SMM-5431	Maxon™	46	SN-771	Monosoft™ / Dermalon™	93
SL-607	Polysorb™	15	SMM-5516	Maxon™	46	SN-775	Monosoft™ / Dermalon™	93
SL-608	Polysorb™	15	SMM-5526	Maxon™	46	SN-776	Monosoft™ / Dermalon™	93
SL-611	Polysorb™	16	SMM-5536	Maxon™	46	SN-782	Monosoft™ / Dermalon™	94
SL-612	Polysorb™	16	SN-3697	Monosoft™ / Dermalon™	94	SN-788	Monosoft™ / Dermalon™	93
SL-613	Polysorb™	16	SN-5663	Monosoft™ / Dermalon™	95	SN-790	Monosoft™ / Dermalon™	93
SL-622	Polysorb™	16	SN-5666	Monosoft™ / Dermalon™	94	SN-871	Monosoft™ / Dermalon™	92
SL-630	Polysorb™	15	SN-5667	Monosoft™ / Dermalon™	94	SP-1606	Surgipro™ II / Surgipro™	55
SL-632	Polysorb™	16	SN-5668	Monosoft™ / Dermalon™	94	SP-1634	Surgipro™ II / Surgipro™	56
SL-634	Polysorb™	15	SN-5669	Monosoft™ / Dermalon™	94	SP-1635	Surgipro™ II / Surgipro™	56
SL-635	Polysorb™	15	SN-568	Monosoft™ / Dermalon™	95	SP-1644	Surgipro™ II / Surgipro™	56
SL-636	Polysorb™	15	SN-5691	Monosoft™ / Dermalon™	94	SP-1693G	Surgipro™ II / Surgipro™	55
SL-637	Polysorb™	15	SN-5694	Monosoft™ / Dermalon™	94	SP-1696	Surgipro™ II / Surgipro™	55
SL-642	Polysorb™	17	SN-5696	Monosoft™ / Dermalon™	94	SP-1696G	Surgipro™ II / Surgipro™	55
SL-643	Polysorb™	17	SN-5697	Monosoft™ / Dermalon™	94	SP-1697	Surgipro™ II / Surgipro™	55
SL-653	Polysorb™	17	SN-5698	Monosoft™ / Dermalon™	94	SP-559G	Surgipro™ II / Surgipro™	54
SL-690	Polysorb™	15	SN-5699	Monosoft™ / Dermalon™	94	SP-5663	Surgipro™ II / Surgipro™	55
SL-691	Polysorb™	15	SN-615	Monosoft™ / Dermalon™	94	SP-5680G	Surgipro™ II / Surgipro™	55
SL-692	Polysorb™	15	SN-628	Monosoft™ / Dermalon™	94	SP-5681	Surgipro™ II / Surgipro™	55
SL-693	Polysorb™	15	SN-630	Monosoft™ / Dermalon™	94	SP-5681G	Surgipro™ II / Surgipro™	55
SL-694	Polysorb™	15	SN-641	Monosoft™ / Dermalon™	92	SP-5682	Surgipro™ II / Surgipro™	55
SL-696	Polysorb™	16	SN-644	Monosoft™ / Dermalon™	92	SP-5682G	Surgipro™ II / Surgipro™	55
SL-712	Polysorb™	16	SN-648	Monosoft™ / Dermalon™	93	SP-5686	Surgipro™ II / Surgipro™	55
SL-721	Polysorb™	16	SN-649	Monosoft™ / Dermalon™	93	SP-5687	Surgipro™ II / Surgipro™	55

# ИНДЕКСНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ КОДОВ

КОД	МАТЕРИАЛ	СТР.	КОД	МАТЕРИАЛ	СТР.	КОД	МАТЕРИАЛ	СТР.
SP-5687G	■ Surgipro™ II / Surgipro™	55	SS-675	■ Sofsilik™	112	SV-9911G	■ Velosorb™ Fast	8
SP-5692G	■ Surgipro™ II / Surgipro™	55	SS-678	■ Sofsilik™	112	SV-9913	■ Velosorb™ Fast	8
SP-5695	■ Surgipro™ II / Surgipro™	55	SS-679	■ Sofsilik™	112	SV-9915	■ Velosorb™ Fast	8
SP-5697G	■ Surgipro™ II / Surgipro™	55	SS-680	■ Sofsilik™	112	SV-9926	■ Velosorb™ Fast	7
SP-5698	■ Surgipro™ II / Surgipro™	55	SS-681	■ Sofsilik™	112	SV-9927	■ Velosorb™ Fast	7
SP-5699	■ Surgipro™ II / Surgipro™	55	SS-682	■ Sofsilik™	112	SV-9928	■ Velosorb™ Fast	7
SP-622	■ Surgipro™ II / Surgipro™	54	SS-683	■ Sofsilik™	112	SV-9937G	■ Velosorb™ Fast	8
SP-622-BC	■ Surgipro™ II / Surgipro™	55	SS-684	■ Sofsilik™	112	SV-9938G	■ Velosorb™ Fast	8
SP-623	■ Surgipro™ II / Surgipro™	54	SS-685	■ Sofsilik™	112	SV-9940G	■ Velosorb™ Fast	7
SP-623-BC	■ Surgipro™ II / Surgipro™	55	SS-689	■ Sofsilik™	112	SV-9941G	■ Velosorb™ Fast	7
SP-629	■ Surgipro™ II / Surgipro™	54	SS-694	■ Sofsilik™	112	SV-9943	■ Velosorb™ Fast	9
SP-631	■ Surgipro™ II / Surgipro™	54	SS-695	■ Sofsilik™	112	SV-9944G	■ Velosorb™ Fast	9
SP-649	■ Surgipro™ II / Surgipro™	54	SS-723	■ Sofsilik™	113	SV-9961G	■ Velosorb™ Fast	7
SP-660	■ Surgipro™ II / Surgipro™	54	SS-745	■ Sofsilik™	112	SVP-2251	■ Velosorb™ Fast	8
SP-660G	■ Surgipro™ II / Surgipro™	54	SS-785	■ Sofsilik™	112	SVP-2285	■ Velosorb™ Fast	8
SP-661	■ Surgipro™ II / Surgipro™	54	SV-2238	■ Velosorb™ Fast	9	SVP-2294	■ Velosorb™ Fast	8
SP-661G	■ Surgipro™ II / Surgipro™	54	SV-2239	■ Velosorb™ Fast	9	SVP-2295	■ Velosorb™ Fast	8
SP-665	■ Surgipro™ II / Surgipro™	54	SV-2240	■ Velosorb™ Fast	9	SVP-2296	■ Velosorb™ Fast	8
SP-665G	■ Surgipro™ II / Surgipro™	54	SV-2252	■ Velosorb™ Fast	6	SVP-494	■ Velosorb™ Fast	8
SP-670	■ Surgipro™ II / Surgipro™	54	SV-2253	■ Velosorb™ Fast	6	UC-202	■ Caprosyn™	31
SP-675	■ Surgipro™ II / Surgipro™	54	SV-2286	■ Velosorb™ Fast	7	UC-203	■ Caprosyn™	31
SP-683	■ Surgipro™ II / Surgipro™	54	SV-2287	■ Velosorb™ Fast	7	UC-204	■ Caprosyn™	31
SP-683G	■ Surgipro™ II / Surgipro™	54	SV-2289	■ Velosorb™ Fast	6	UC-403	■ Caprosyn™	31
SP-684	■ Surgipro™ II / Surgipro™	54	SV-2294	■ Velosorb™ Fast	6	UC-404	■ Caprosyn™	31
SP-684G	■ Surgipro™ II / Surgipro™	54	SV-2296	■ Velosorb™ Fast	6	UC-863	■ Caprosyn™	32
SP-685	■ Surgipro™ II / Surgipro™	54	SV-2297	■ Velosorb™ Fast	6	UC-978	■ Caprosyn™	33
SP-689	■ Surgipro™ II / Surgipro™	54	SV-2298	■ Velosorb™ Fast	6	UL-046	■ Polysorb™	27
SP-690	■ Surgipro™ II / Surgipro™	54	SV-2299	■ Velosorb™ Fast	6	UL-101	■ Polysorb™	20
SP-868	■ Surgipro™ II / Surgipro™	54	SV-2930	■ Velosorb™ Fast	6	UL-102	■ Polysorb™	20
SPB-1233G	■ Novafil™	101	SV-424	■ Velosorb™ Fast	8	UL-201	■ Polysorb™	20
SPB-5143G	■ Novafil™	101	SV-425	■ Velosorb™ Fast	8	UL-202	■ Polysorb™	20
SPB-5433G	■ Novafil™	101	SV-426	■ Velosorb™ Fast	8	UL-203	■ Polysorb™	20
SPB-5633G	■ Novafil™	101	SV-439	■ Velosorb™ Fast	8	UL-204	■ Polysorb™	20
SPB-5843G	■ Novafil™	101	SV-4431	■ Velosorb™ Fast	6	UL-205	■ Polysorb™	20
SS-523	■ Sofsilik™	113	SV-4550	■ Velosorb™ Fast	7	UL-214	■ Polysorb™	20
SS-5639	■ Sofsilik™	113	SV-487G	■ Velosorb™ Fast	9	UL-215	■ Polysorb™	20
SS-5640	■ Sofsilik™	113	SV-488G	■ Velosorb™ Fast	9	UL-245	■ Polysorb™	24
SS-623	■ Sofsilik™	113	SV-4893	■ Velosorb™ Fast	8	UL-246	■ Polysorb™	24
SS-624	■ Sofsilik™	113	SV-493	■ Velosorb™ Fast	8	UL-876	■ Polysorb™	24
SS-629	■ Sofsilik™	112	SV-494	■ Velosorb™ Fast	8	UL-877	■ Polysorb™	24
SS-632	■ Sofsilik™	113	SV-496G	■ Velosorb™ Fast	8	UL-878	■ Polysorb™	24
SS-633	■ Sofsilik™	113	SV-497G	■ Velosorb™ Fast	8	UL-879	■ Polysorb™	24
SS-645	■ Sofsilik™	112	SV-6830	■ Velosorb™ Fast	8	UM-201	■ Biosyn™	38
SS-646	■ Sofsilik™	112	SV-6840	■ Velosorb™ Fast	8	UM-202	■ Biosyn™	38
SS-647	■ Sofsilik™	112	SV-834G	■ Velosorb™ Fast	9	UM-203	■ Biosyn™	38
SS-648	■ Sofsilik™	112	SV-835G	■ Velosorb™ Fast	9	UM-204	■ Biosyn™	38
SS-651	■ Sofsilik™	112	SV-844G	■ Velosorb™ Fast	9	UM-213	■ Biosyn™	38
SS-652	■ Sofsilik™	112	SV-845G	■ Velosorb™ Fast	9	UM-214	■ Biosyn™	38
SS-654	■ Sofsilik™	112	SV-935	■ Velosorb™ Fast	8	UM-215	■ Biosyn™	38
SS-656	■ Sofsilik™	112	SV-9909G	■ Velosorb™ Fast	9	UM-243	■ Biosyn™	41
SS-673	■ Sofsilik™	112	SV-9910G	■ Velosorb™ Fast	8	UM-245	■ Biosyn™	41

# ИНДЕКСНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ КОДОВ

КОД	МАТЕРИАЛ	СТР.	КОД	МАТЕРИАЛ	СТР.	КОД	МАТЕРИАЛ	СТР.
UM-345	Biosyn™	41	VLOCL0803	V-Loc™ 180	123	VLOCN0814	V-Loc™ PBT	126
UM-403	Biosyn™	38	VLOCL0804	V-Loc™ 180	123	VLOCN1126	V-Loc™ PBT	126
UM-877	Biosyn™	41	VLOCL0813	V-Loc™ 180	123	VP-151	Surgipro™ II / Surgipro™	59
UM-878	Biosyn™	41	VLOCL0814	V-Loc™ 180	123	VP-204-X	Surgipro™ II / Surgipro™	58
UM-879	Biosyn™	41	VLOCL0824	V-Loc™ 180	123	VP-205-X	Surgipro™ II / Surgipro™	58
UM-886	Biosyn™	38	VLOCL0844	V-Loc™ 180	123	VP-331-X	Surgipro™ II / Surgipro™	58
UM-977	Biosyn™	41	VLOCL1544	V-Loc™ 180	123	VP-421-X	Surgipro™ II / Surgipro™	59
UM-978	Biosyn™	41	VLOCL2145	V-Loc™ 180	123	VP-510-X	Surgipro™ II / Surgipro™	59
UM-986	Biosyn™	38	VLOCL2744	V-Loc™ 180	123	VP-511-X	Surgipro™ II / Surgipro™	59
UV-1382	Velosorb™ Fast	10	VLOCM0003	V-Loc™ 90	118	VP-520-X	Surgipro™ II / Surgipro™	59
VCD2030556MFE	Ti-Cron™ / Surgidac™	72	VLOCM0004	V-Loc™ 90	118	VP-521-X	Surgipro™ II / Surgipro™	59
VCD2030556MSE	Ti-Cron™ / Surgidac™	72	VLOCM0005	V-Loc™ 90	118	VP-522-X	Surgipro™ II / Surgipro™	59
VCD20305FE	Ti-Cron™ / Surgidac™	72	VLOCM0013	V-Loc™ 90	118	VP-523	Surgipro™ II / Surgipro™	59
VCD20305MFE	Ti-Cron™ / Surgidac™	72	VLOCM0014	V-Loc™ 90	118	VP-532-X	Surgipro™ II / Surgipro™	57
VCD20305MSE	Ti-Cron™ / Surgidac™	72	VLOCM0023	V-Loc™ 90	118	VP-533	Surgipro™ II / Surgipro™	57
VCD20305SE	Ti-Cron™ / Surgidac™	72	VLOCM0024	V-Loc™ 90	118	VP-542-X	Surgipro™ II / Surgipro™	59
VCD20316FE	Ti-Cron™ / Surgidac™	71	VLOCM0033	V-Loc™ 90	118	VP-543	Surgipro™ II / Surgipro™	59
VCD20316MFE	Ti-Cron™ / Surgidac™	71	VLOCM0034	V-Loc™ 90	118	VP-555-X	Surgipro™ II / Surgipro™	58
VCD20316MSE	Ti-Cron™ / Surgidac™	71	VLOCM0114	V-Loc™ 90	118	VP-556-MX	Surgipro™ II / Surgipro™	58
VCD20316SE	Ti-Cron™ / Surgidac™	71	VLOCM0123	V-Loc™ 90	118	VP-556-X	Surgipro™ II / Surgipro™	58
VCD2031MFEE	Ti-Cron™ / Surgidac™	75	VLOCM0124	V-Loc™ 90	118	VP-557-X	Surgipro™ II / Surgipro™	58
VCD2031MSE	Ti-Cron™ / Surgidac™	75	VLOCM0125	V-Loc™ 90	118	VP-558-X	Surgipro™ II / Surgipro™	58
VCD20331FE	Ti-Cron™ / Surgidac™	71	VLOCM0134	V-Loc™ 90	118	VP-566-X	Surgipro™ II / Surgipro™	58
VCD2036305FE	Ti-Cron™ / Surgidac™	72	VLOCM0135	V-Loc™ 90	118	VP-580-X	Surgipro™ II / Surgipro™	57
VLOCL0004	V-Loc™ 180	122	VLOCM0305	V-Loc™ 90	119	VP-581-X	Surgipro™ II / Surgipro™	57
VLOCL0014	V-Loc™ 180	122	VLOCM0315	V-Loc™ 90	119	VP-582-X	Surgipro™ II / Surgipro™	57
VLOCL0023	V-Loc™ 180	122	VLOCM0345	V-Loc™ 90	119	VP-585-X	Surgipro™ II / Surgipro™	57
VLOCL0024	V-Loc™ 180	122	VLOCM0603	V-Loc™ 90	119	VP-630-X	Surgipro™ II / Surgipro™	62
VLOCL0025	V-Loc™ 180	122	VLOCM0604	V-Loc™ 90	119	VP-631-X	Surgipro™ II / Surgipro™	62
VLOCL0033	V-Loc™ 180	122	VLOCM0614	V-Loc™ 90	119	VP-660-X	Surgipro™ II / Surgipro™	58
VLOCL0034	V-Loc™ 180	122	VLOCM0624	V-Loc™ 90	119	VP-702-MX	Surgipro™ II / Surgipro™	56
VLOCL0114	V-Loc™ 180	122	VLOCM0625	V-Loc™ 90	119	VP-702-X	Surgipro™ II / Surgipro™	56
VLOCL0124	V-Loc™ 180	122	VLOCM0644	V-Loc™ 90	119	VP-703-X	Surgipro™ II / Surgipro™	56
VLOCL0134	V-Loc™ 180	122	VLOCM0804	V-Loc™ 90	119	VP-704-X	Surgipro™ II / Surgipro™	62
VLOCL0135	V-Loc™ 180	122	VLOCM0814	V-Loc™ 90	119	VP-705-MX	Surgipro™ II / Surgipro™	57
VLOCL0315	V-Loc™ 180	123	VLOCM0844	V-Loc™ 90	119	VP-705-X	Surgipro™ II / Surgipro™	57
VLOCL0316	V-Loc™ 180	123	VLOCM1203	V-Loc™ 90	119	VP-706-X	Surgipro™ II / Surgipro™	57
VLOCL0316	V-Loc™ 180	123	VLOCM1204	V-Loc™ 90	119	VP-708-X	Surgipro™ II / Surgipro™	62
VLOCL0325	V-Loc™ 180	123	VLOCM1544	V-Loc™ 90	119	VP-709-X	Surgipro™ II / Surgipro™	56
VLOCL0326	V-Loc™ 180	123	VLOCM1545	V-Loc™ 90	119	VP-70-X	Surgipro™ II / Surgipro™	57
VLOCL0335	V-Loc™ 180	123	VLOCM1704	V-Loc™ 90	119	VP-710-X	Surgipro™ II / Surgipro™	58
VLOCL0336	V-Loc™ 180	123	VLOCM1744	V-Loc™ 90	119	VP-711-X	Surgipro™ II / Surgipro™	58
VLOCL0426	V-Loc™ 180	123	VLOCM1824	V-Loc™ 90	118	VP-712-X	Surgipro™ II / Surgipro™	62
VLOCL0436	V-Loc™ 180	123	VLOCM2105	V-Loc™ 90	119	VP-713-MX	Surgipro™ II / Surgipro™	56
VLOCL0604	V-Loc™ 180	123	VLOCM2115	V-Loc™ 90	119	VP-713-X	Surgipro™ II / Surgipro™	56
VLOCL0613	V-Loc™ 180	123	VLOCM2145	V-Loc™ 90	119	VP-715-X	Surgipro™ II / Surgipro™	58
VLOCL0614	V-Loc™ 180	123	VLOCN0325	V-Loc™ PBT	126	VP-720-X	Surgipro™ II / Surgipro™	57
VLOCL0615	V-Loc™ 180	123	VLOCN0326	V-Loc™ PBT	126	VP-725-X	Surgipro™ II / Surgipro™	57
VLOCL0624	V-Loc™ 180	123	VLOCN0327	V-Loc™ PBT	126	VP-726-MX	Surgipro™ II / Surgipro™	57
VLOCL0625	V-Loc™ 180	123	VLOCN0615	V-Loc™ PBT	126	VP-726-X	Surgipro™ II / Surgipro™	57
VLOCL0644	V-Loc™ 180	123	VLOCN0644	V-Loc™ PBT	126	VP-727-X	Surgipro™ II / Surgipro™	57



# ИНДЕКСНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ КОДОВ

КОД	МАТЕРИАЛ	СТР.	КОД	МАТЕРИАЛ	СТР.
VP-728-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	62	VP-934-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	62
VP-72-MX	■ Surgipro™ II / Surgipro™	56	VP-935-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	62
VP-72-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	56	VP-936-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	62
VP-733-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	58	VP-945	■ Surgipro™ II / Surgipro™	60
VP-735-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	61	VP-956	■ Surgipro™ II / Surgipro™	62
VP-737-MX	■ Surgipro™ II / Surgipro™	61	VP-973-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	61
VP-738-MX	■ Surgipro™ II / Surgipro™	62	VP-975-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	63
VP-738-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	62	VP-976-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	63
VP-73-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	56	VP-977	■ Surgipro™ II / Surgipro™	63
VP-744-MX	■ Surgipro™ II / Surgipro™	61	VP-978	■ Surgipro™ II / Surgipro™	63
VP-744-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	61	VPF-522-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	59
VP-745-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	61	VPF-543	■ Surgipro™ II / Surgipro™	59
VP-746-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	56	VPF-557-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	58
VP-747-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	61	VPF-702-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	56
VP-74-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	57	VPF-706-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	57
VP-754-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	58	VPF-709-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	56
VP-755-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	58	VPF-711-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	58
VP-757-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	58	VPF-713-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	56
VP-75-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	57	VPF-735-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	61
VP-760-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	59	VS-809	■ Sofsilik™	114
VP-761-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	59	VS-844	■ Sofsilik™	115
VP-762-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	59	VS-845	■ Sofsilik™	115
VP-763-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	62	VS-846	■ Sofsilik™	115
VP-76-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	57	VS-871	■ Sofsilik™	115
VP-771-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	59	VS-872	■ Sofsilik™	115
VP-776-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	57	VS-881	■ Sofsilik™	114
VP-813-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	57	VS-882	■ Sofsilik™	114
VP-831-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	59	VS-889	■ Sofsilik™	114
VP-832-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	59	VS-890	■ Sofsilik™	114
VP-833	■ Surgipro™ II / Surgipro™	59	XC-823	■ Caprosyn™	33
VP-834	■ Surgipro™ II / Surgipro™	59	XC-834	■ Caprosyn™	33
VP-841-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	57	XC-844	■ Caprosyn™	33
VP-842-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	60	XC-845	■ Caprosyn™	33
VP-843	■ Surgipro™ II / Surgipro™	60	XM-822	■ Biosyn™	38
VP-851-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	57	XM-823	■ Biosyn™	38
VP-853	■ Surgipro™ II / Surgipro™	60	XM-845	■ Biosyn™	38
VP-870-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	58	XNF-1964	■ Novafi™	102
VP-871-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	58	XNF-1965	■ Novafi™	102
VP-872-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	58	XNF-1966	■ Novafi™	102
VP-875-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	62	XNF-1993	■ Novafi™	102
VP-881-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	57	XNF-1994	■ Novafi™	102
VP-889-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	57	XNF-1995	■ Novafi™	102
VP-890-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	57			
VP-900-MX	■ Surgipro™ II / Surgipro™	61			
VP-900-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	61			
VP-902-MX	■ Surgipro™ II / Surgipro™	61			
VP-902-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	61			
VP-904-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	61			
VP-914-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	62			
VP-925-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	62			
VP-926-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	62			





© 2017 Medtronic. Все права защищены. Medtronic, логотип Medtronic и слоган Further, Together являются торговыми марками компании Медтроник. Все бренды, обозначенные ™, являются собственностью компании Медтроник.

# Medtronic

[www.medtronic.com](http://www.medtronic.com)  
ООО "Медтроник"  
123112, Москва,  
Пресненская набережная, д. 10  
Тел.: +7(495)580-73-77  
Факс: +7(495)580-73-78  
E-mail: [info.russia@medtronic.ru](mailto:info.russia@medtronic.ru)